

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 送水吸引チューブ 70355000

KARL STORZ HAMOUエンドマツ用チュービングセット

再使用禁止

【禁忌・禁止】


本品はディスポーザブル製品であるので再使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

※代表的な形状を下記に示す。(滅菌済・単回使用)

ラパロスコピー用

031517-01、031517-10

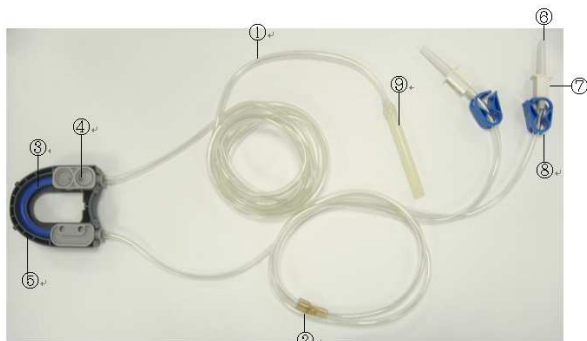


番号	名 称	機能及び動作	原材料
①	輸液チューブ	灌流液の流路。	ポリ塩化ビニル※ (DEHP39.5%)
②	Yコネクタ	灌流液を分岐する。	ポリ塩化ビニル※(DEHP15 ~20%)
③	輸液チューブ	灌流液の流路。	シリコーンゴム※
④	メンブレン	チューブ内の圧力を装置 のセンサーに伝える。	シリコーンゴム※
⑤	チューブカート リッジ	チューブを装置本体に装 着する。	ABS 樹脂※
⑥	保護キャップ	未使用時のスパイクを保 護する。	高密度ポリエチレン
⑦	スパイク	灌流バッグに差し込む部 分。	ABS 樹脂※
⑧	クランプ	灌流量を調節または停止 する。	高密度ポリエチレン
⑨	送水用コネクタ	灌流器具等に接続する。	シリコーンゴム※

※:組織、体液又は血液に間接的又は直接接触することがある部分

ヒステロスコピー用

031518-01、031518-10

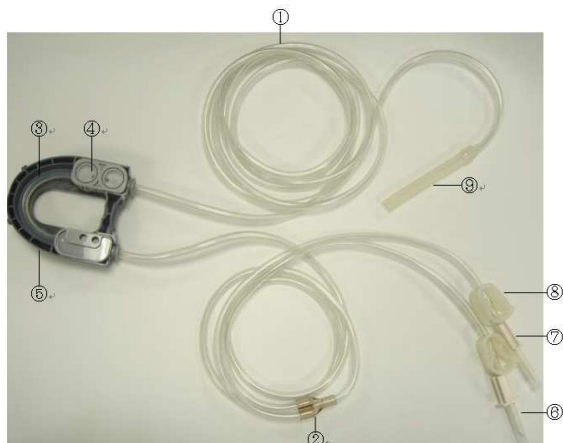

番号	名 称	機能及び動作	原材料
①	輸液チューブ	灌流液の流路。	ポリ塩化ビニル※ (DEHP39.5%)
②	Yコネクタ	灌流液を分岐する。	ポリ塩化ビニル※(DEHP15 ~20%)
③	輸液チューブ	灌流液の流路。	シリコーンゴム※
④	メンブレン	チューブ内の圧力を装置 のセンサーに伝える。	シリコーンゴム※
⑤	チューブカート リッジ	チューブを装置本体に装 着する。	ABS 樹脂※
⑥	保護キャップ	未使用時のスパイクを保 護する。	高密度ポリエチレン
⑦	スパイク	灌流バッグに差し込む部 分。	ABS 樹脂※
⑧	クランプ	灌流量を調節または停止 する。	高密度ポリエチレン
⑨	送水用コネクタ	灌流器具等に接続する。	シリコーンゴム※

※:組織、体液又は血液に間接的又は直接接触することがある部分

【使用目的又は効果】

本品は、送水装置と、内視鏡又は内視鏡用処置具等との接続に用いる柔軟性のあるチューブである。

【使用方法等】

＜使用前準備＞

- 滅菌包装を開けて本品を無菌的に取り出す。
- 包装の開封、破損、汚損又はピンホール等が認められた場合は使用しないこと。

＜使用中＞

- チュービングセットを送水装置に接続する。
- スパイクを灌流液バッグに挿し込む。
- 送水用コネクタを滅菌済みの灌流用器具等に接続する。
- ポンプを作動させ、チューブ内のエアを抜く。
- 目的の処置を行う。

＜使用後＞

- 本体より取り外し、適切な方法により廃棄を行う。
- 本品は、滅菌済ディスポーザブル製品であるため、一回限りの使用のみで再使用しないこと。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- 接続部の径が合わないときには無理に使用しないこと。
- コネクタ等が確実に接続されていることを確認すること。
- 本品に使用されるポリ塩化ビニルには可塑剤としてフタル酸ジ-2-エチルヘキシル (DEHP) が含まれ、溶出する可能性があるので注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

- 室温下で保管すること。
- 水に濡れないように保管すること。
- 直射日光の当たる場所、高温・多湿な場所、過度なホコリが発生する場所、空气中に塩分や硫黄分を含む場所での保管は避けること。
- 傾斜、振動、衝撃(運搬時を含む。)等安定状態に注意すること。
- 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

＜有効期間＞

個別包装に記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:カールストルツ・エンドスコープ・ジャパン株式会社
TEL:03-6380-8622

製造業者:KARL STORZ SE & Co. KG(カールストルツ社)
国名:Germany

添付文書番号 : KSTJ - Z128