

LED 照明システム EyeMag Light II

【警告】


- 本装置の照明は高輝度の LED 光源に該当するため、術者または患者がランプをのぞきこんだり、目に直接照射しないこと。[眼機能障害や眼、後眼部、網膜疾患のおそれ]
- いかなる照明も組織乾燥や熱傷等が発生するおそれがあるため、照明時間は最小限に抑えること。[組織障害のおそれ]
- バッテリーは使用せず放置しておく期間が長くなると充電不良が発生する確率が高くなる。充電時には、適切に開始されたことを確認して、その後過熱などの異常がないか間隔をおいて確認すること。

【禁忌・禁止】

- 以下の場所では使用しないこと。
 - ・ 爆発の危険のあるところ。
 - ・ 引火性の麻酔薬、アルコール、ベンジン、又は類似薬品等、揮発性又は引火性の溶剤のあるところ。
 - ・ 湿気のあるところ。
- 本装置は防水加工されていないため、いかなる状態でも液体がかからないようにすること。
- 本装置の近くで携帯電話の使用はしないこと。
- 当社が認めた者以外は修理しないこと。絶対に分解、改造を行わないこと。
- 使用前点検時もしくは使用時に故障と判断した場合には、直ちに使用を停止もしくは中止すること。この場合、適切な処置が完了するまで、本装置を使用しないこと。
- 異常加熱、発煙、火花、異臭又は異音がする場合またはそれ以外の異常を感じた場合には、直ちに電源を切ること。この場合、適切な処置が完了するまで、本装置を使用しないこと。
- 併用医用機器については併用禁忌を参照すること。
- 本構成品以外は、取付できません。
- 充電中に過熱などの異常を確認したバッテリーは使用しないこと。

＜構成＞

本品の形状、構成は以下の通り。

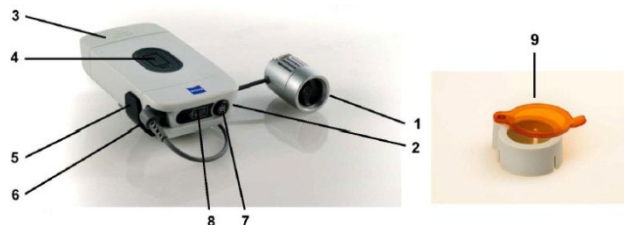

番号	名称
1	LED ヘッドランプ（電源ケーブル付）
2	制御ユニット
3	バッテリーパック（着脱式）
4	バッテリーパック着脱ボタン
5	ベルトクリップ
6	ケーブルコネクタ（LED ヘッドランプ専用）
7	ON/OFF スイッチ、減光スイッチ
8	機能インジケータ
9	オレンジ・フィルタ
-	充電器

＜機器の分類＞

- ・ 電撃に対する保護の程度：B 形装着部を持つ機器
- ・ 電撃に対する保護の形式：クラス 2 機器（充電器）
- ・ 液体に対する保護形式：IP20

＜電気的定格＞

- ・ 充電器
定格電圧：単相 AC 100V 50-60Hz
最大消費電力：3.5W/5.0W**
- ・ EMC 適合規格：IEC60601-1-2 CLASS B 準拠
- ・ バッテリーパック（着脱式）
定格電圧 DC 7.2V
最大消費電流：470mA/640mA**

＜寸法＞

- ・ LED ヘッドランプ：φ26mm×38mm
重量：32g（ケーブル含む）
- ・ 制御ユニット：33mm×61mm×106mm
重量：46g（バッテリーパックなし）

＜原理＞

充電式のバッテリーから制御ユニットの調整により電源供給し、LED 光源を発光させる。

＜動作環境＞

温度範囲： +10℃～+35℃
(+20℃以上の周囲温度で自動調光が可能)
湿度範囲： 最大 85%

【使用目的又は効果】

＜使用目的＞

手術者の頭部に装着するよう設計された装置（ランプ）をいう。バンド又はヘルメットフレームに取り付けて手術者の前頭部に配置し、手術、診断、治療中に術野を直接照明する。

【使用方法等】

- ・ 充電が完了したバッテリーパックが制御ユニットに正しく装着されていることを確認する。
- ・ 併用する双眼ルーペの種類に応じた方法で装着されていることを確実にする。
- ・ LED ヘッドランプに接続している電源ケーブルを作業の妨げにならないよう注意する。
- ・ 制御ユニットの電源スイッチを ON にする。
- ・ 制御ユニットで光量の調整をおこなう。

詳細は取扱説明書を参照のこと。

※＜組み合わせて使用する医療機器＞

本装置は、以下の医療機器と併用して使用する。

販売名	製造販売届出番号	製造販売業者
双眼ルーペ EyeMag PRO	13B1X00119005090	自社
双眼ルーペ EyeMag Smart	13B1X00119005080	自社
コブルーペ K	13B1X00119005070	自社

取扱説明書を必ずご参照ください。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- 本装置の操作者は、取扱説明書を読了し、本装置を使用するための訓練を受けた者のみとすること。
- 本装置は医科向けに設計・製造されており、それ以外の用途には使用しないこと。

＜その他の注意＞

- 本装置の充電器は、専用の構成部品であるため、他の機器には使用しないこと。
- 使用前に以下の項目を確認すること。
 - ・ 本装置の機械的な接続が適切になされていて、各部取付ネジが確実に締められており、各部に緩みなどがないこと。
 - ・ LED ヘッドランプが正しく点灯すること。
 - ・ 充電時、本装置に設定されている電圧が使用場所での電圧に対応していること。
 - ・ 機器の突然の故障により、手術の目的の達成や患者の安全が脅かされることがないように、予備の対応を検討しておくこと。
 - ・ 本装置に使用されている LED ヘッドランプは消耗品であり、正しく点灯しなくなったときには交換すること。
 - ・ 本装置に使用されているバッテリーパックは消耗品であり、十分に充電しても点灯時間が短くなったときには交換すること。不要になった着脱式バッテリーパックは回収を行っている地方自治体の指示に従って廃棄すること。
 - ・ 付属のバッテリーパックは本装置専用です。他の電気用品には使用できません。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

- 本装置を保管する前に、下記の条件を満たす事を確認すること。
 - ・ 水の被らない場所。
 - ・ 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、水分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響を生ずるおそれのない場所。
 - ・ 温度範囲 -20℃～+40℃
 - ・ 湿度範囲 10% - 95% （結露不可）
 - ・ 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所でないこと
- 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）など、安定状態に注意すること。
- 保管時には、ほこりがかからないよう専用ケースに収納すること。

＜耐用期間＞

定期的に業者による点検を行った場合：5年（自己認証）

[保守用等の部品は製造中止後8年間保持]

【保守・点検に係る事項】

点検時に何らかの問題が発生した場合には、取扱店又は当社テクニカルサービスに連絡し、異常が改善されるまでは使用しないこと。

＜使用者による保守点検事項＞

以下の点検項目は、使用前にすべてチェックを行い、異常がないことを確認すること。

- 取扱説明書、添付文書が本装置の近くにあり、すぐに参照できること。
- 外装に瑕疵、変形などがないこと。
- 配線等に亀裂、断線がないこと。
- 機械的な接続が適切になされていること。
- 各部取り付けネジが確実に締められていること。

- 各部に緩みなどがないこと。
- LED ヘッドランプの角度調整後、その位置を安定して保持できること。
- 照明が問題なく点灯すること。
- 本装置から異音、異臭がしないこと。
- 充電が適切に行われていること。
- バッテリーパックが異常に加熱していないこと。

＜業者による保守点検事項＞

本装置を安全に使用するために、当社による12ヶ月毎の点検を推奨。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： カールツァイスメディテック株式会社

*電話 0570-021311

輸入先国：チェコ共和国

製造業者：SCHOTT CR, s. r. o.

取扱説明書を必ずご参照ください。