

機械器具 58 整形用機械器具
一般医療機器 歯科用インプラント補綴用器具（70722000）

インプレッションツールⅢ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

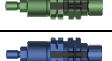
- 次の患者にはしやしないこと。
・本品の成分及び類似成分に対して過敏症の既往歴のある患者。

【形状・構造及び原理等】

・構成

本品は、インプレッションポスト本体、六角付きスリーブ、スクリューから構成されている。

*・形状・構造

No	製品番号	名称	形状
1	VD-401	インターナル インプレッションポスト φ3.0mm（3 ピースタイプ）	
2	VD-402	インターナル インプレッションポスト φ3.5mm（3 ピースタイプ）	
3	VD-403	インターナル インプレッションポスト φ4.5mm（3 ピースタイプ）	
4	VD-404	インターナル インプレッションポスト φ5.7mm（3 ピースタイプ）	

原材料：チタン合金

【使用目的又は効果】

歯科インプラント用の補綴物の設計、製作、装着・固定などの目的に用いる器具である。
指定の歯科用インプラントの上部構造を製作するために使用する。

【使用方法等】

- 印象採得部位に適した製品を選択する。
- 通法に従い、選択した製品を口腔内のインプラントフィクスチャに六角付きスリーブをスクリューで装着、固定し、印象採得を行う。
- 印象採得後、通法に従い、作業模型を製作する。

<使用方法に関連する使用上の注意>

- インプラントフィクスチャのサイズに適した、インプレッションポストを用いること。
- インプラント体及び周辺組織への穿孔や損傷に注意すること。
- 折損、変形などの原因になるため必要以上の力を加えないこと。
- 本品は、未滅菌品である。滅菌が必要な場合、加熱蒸気滅菌（高圧蒸気滅菌等）を行うこと。高圧蒸気滅菌の条件は、飽和蒸気中、121℃、40 分以上が推奨される。滅菌器の操作は、滅菌器製造販売業者の指示に従うこと。滅菌前には本品を十分に洗浄し、滅菌後は本品を十分に乾燥させること。
- 水分がついたままの状態、又は湿った状態では使用しないこと。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- インプラント治療を行う際には、「口腔インプラント治療指針」（公益社団法人日本口腔インプラント学会編）等の最新情報を参考に行なうこと。
- 埋入したインプラントフィクスチャの太さに適した製品を選択すること。また、上部構造物との関係をきちんと把握しておくこと。
- 本品に落下させるなど強い衝撃を与えないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 高温、多湿、直射日光を避け、室温で清潔な場所に保管すること。
- 歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管すること。

【包装】

- 1 セット／袋

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- 製造販売業者
株式会社カイマンデンタル
東京都千代田区一番町 8 番地 15
電話：03-3238-7560 FAX：03-3238-7561
- 製造業者
株式会社デンテック