

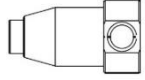
レスキューツール BH

【禁忌・禁止】

- 次の患者には使用しないこと
- ・本品の成分及び類似成分にたいして過敏症のある患者。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

品番	名称	形状
VD-520	スクリーリムーバー	
VD-521	スクリーリムーバー用ハンドル	
VD-522	スクリーリムーバー用ガイドスリーブ φ 3.0mm/ φ 3.4mm 用	
VD-523	スクリーリムーバー用ガイドスリーブ φ 3.5mm/ φ 4.5mm 用	
VD-524	スクリーリムーバー用ガイドスリーブ φ 5.7mm 用	

・原理

リムーバー等を使用して、スクリー等を緩める方に回転させて取り除く。

2. 原材料：ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

外科手術時にピン、ネジ又は器具等を挿入又は除去する場合に組み合わせて用いる。

【使用方法等】

- (1) 使用前に以下の条件(推奨)で滅菌を行う。
滅菌の種類:オートクレーブ滅菌
時間と温度:121℃ 20分間
- (2) フィクスチャに対して適切なサイズのガイドスリーブを選び、スクリーリムーバー用ハンドルに取り付ける。
- (3) スクリーリムーバーにハンドピースアダプターを装着する。
- (4) ガイドスリーブをフィクスチャに装着する。
- (5) スクリーリムーバーを垂直になるようにしてスリーブに通し、慎重に操作して取り除く。

<使用方法等に関連する注意上の注意>

- (1) 形成には適切なインストルメントを用いること。
- (2) 使用時には、周辺組織への損傷に注意すること。
- (3) 折損、変形などの原因になるため必要以上の力を加えないこと。
- (4) 「使用方法等」に示した滅菌条件は推奨であり、使用する滅菌器の使用方法に従うこと。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- (1) インプラント治療を行う際には、「口腔インプラント治療指針」(公益社団法人日本口腔インプラント学会編)等の最新情報を参考に行うこと。
- (2) 本品に形状の異常、変形、破損、除去できない汚れ等の異常が認められた場合、また、本品が劣化・摩耗した場合は、使用しないこと。
- (3) 術中は患者の全身のおよび口腔内の状態を監視し、異常が認められた場合は治療の中止等を含め、患者の安全を確保すること。
- (4) 本品は、未滅菌なので、使用前に滅菌を行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

高温、高湿、直射日光を避け、清潔な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

1. 製造販売業者

株式会社カイマンデンタル
東京都千代田区一番町 8 番地 15
TEL:03-3238-7560 FAX:03-3238-7561

2. 製造業者

株式会社デンテック