

2021 年 9 月作成（第 4 版）

届出番号：12B3X10005000001

2019 年 2 月「新記載要領に基づく改訂」

類別名称：視力補正用眼鏡 分類：一般医療機器

一般的名称：眼鏡（JMDN コード：35065000）

販売名：クリックリーダー

【警告】

- ・ご使用上の注意の範囲外の予期せぬ不具合や有害事象が起こった場合には、直ちに使用を中止してください。
- ・万一、ご使用中に不快感や視力の異常を感じた時、また、フレームやレンズに拭いても取れない様な汚れやキズが生じた場合には、直ちに使用を中止し、医師・購入店・専門店などにご連絡・ご相談下さい。

【禁忌・禁止】

- ・メガネを掛けて、太陽や強い光を直視しないで下さい。また、プラスチックレンズも強い衝撃があれば破損する可能性がありますのでスポーツ時などのご使用はお避け下さい。
- ・単焦点レンズを使用した商品は手元の細かい文字などを見る時に使用する老眼鏡です。メガネを着けたまま歩くなどは出来ません。
- ・二重焦点レンズを使用した商品は、階段の昇り降りや段差のある所では足元が見えにくく危険です。室内外を問わず、歩行時などには使用しないで下さい。
- ・なお、商品は枠（フレーム）の中央部に磁石を使用しています。ペースメーカー、クレジットカード等の磁気カード類、ディスク・テープ及び精密機器等、磁気の影響を受けるものに近づけないで下さい。


【形状、構造及び原理】

- ・テンプル（ツル）がヘッドバンドの様に一体となって繋がったプラスチック枠に、老視の視力補正を目的とした屈折補正用単焦点、二重焦点光学レンズ1組を変形加工（枠の形にはまるように）して、嵌め合せた眼鏡。
- ・枠の中央部には、磁石が埋め込まれており、磁石を脱着して、メガネの掛け外しを行う。
- ・メガネを使用しないときには、アクセサリのように首に掛けておく事が出来る。また、枠の横部分は、スライドする構造となっており、前後のサイズ調整が可能となる。
- ・フレームの形状・タイプは、プラスチックで成形されたスタンダードなタイプに加え、ツルの部分が変形し、角度の調整ができるタイプ、ツル部分にプラスチックゴム（エラストマー）を使用したタイプ、小さく折り畳み可能なタイプなど様々なタイプが存在する。

【屈折補正用光学レンズ】

- ・当該品に使用する屈折補正用光学レンズは、単焦点・二重焦点レンズを使用する。

種別	球面屈折力	レンズ度数（+0.50刻み）
単焦点レンズ	光学中心部	+1.00～+4.00
二重焦点レンズ	台玉部	±0.00
	小玉部	+1.00～+4.00

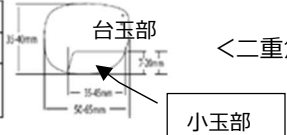

【形状、構造】

(1) レンズ部の形状及びサイズ

形状						
型	スクエア型 (1) ～ (3)	スクエアⅡ型	長円型	ラウンド型	楕円型	逆三角型
縦 (内寸)	26～31mm	29～34mm	25～30mm	36～41mm	34～39mm	26～31mm
横 (内寸)	49～54mm	54～59mm	52～57mm	44～49mm	42～47mm	51～56mm

(2) 枠部の形状及びサイズ

形状及びサイズ (±2.0 mm)				
型	スクエア型 (1)	スクエア型 (2)	スクエア型 (3)	スクエアⅡ型
形状及びサイズ (±2.0 mm)				
型	長円型	ラウンド型	楕円型	逆三角型

【原理】

- ・屈折補正用単焦点レンズは、中央部が厚く並行光線を集束させる働きを持つ凸レンズの性質を持つ。
- ・凸レンズの性質は、光を屈折させ集束し、手前に焦点を結ぶ。
- ・レンズを通し、物を見ると手前に焦点を結ぶので、眼の屈折調整力の不足を補い、手元の細かい文字などが見やすくなる。
- ・屈折補正用二重焦点レンズの台玉部は度数のない、いわゆる「素通し」であるが、小玉部は、凸レンズとなっている。
- ・メガネを着けた状態で、視線を少し下げ、この小玉部を通して手元の細かい文字などを見る。

【原材料】

- ・フレーム : プラスチック (ナイロン)、磁石、銅亜鉛ニッケル合金、チタン合金、エラストマー
- ・レンズ : プラスチック 単焦点レンズ (アクリル) 二重焦点レンズ (ポリカーボネート)

【使用目的又は効果】

- ・眼の屈折調整力の不足 (老視) により、見えづらくなった手元の細かい文字等を見る時に使用する。
- ・屈折補正効果を持つ単焦点・二重焦点光学レンズを嵌め合せた枠を顔に掛け、これを通して見ることによって、眼の屈折調整力の不足を補う視力補正効果が生じる。

【使用方法】

1) 単焦点レンズ使用品

- ・メガネを顔に掛けた状態で、ご自身の距離で、手元の細かい文字などが快適に見える度数の物を選ぶ。

2) 二重焦点レンズ使用品

- ・メガネを顔に掛けた状態で視線を少し下げ、レンズの近用部を通して、ご自身の距離で、手元の細かい文字等が快適に見える度数の物を選ぶ。

度数簡易検査表

遠くを見る時
ごく普通に遠用部を通してご覧下さい。(度数なし)

近くを見る時
視線を少し下げ、近用部を通してご覧下さい。(度付)


この老眼鏡は
高品質なフレームと
レンズを使用しており、
デザインは最高の掛け心地と
フィット感が得られる

遠用部
近用部

3) 共通

- ・ご使用の際は、両手でフレームの中央部にある磁石を取り外し、ツル (テンプル) を両耳に掛け、枠が顔にぶつからないように注意しながら、眼の前にある磁石をゆっくりと接合させます。そのまま、レンズを通して細かい文字等を見ます。
- ・ご使用後は、両手でフレームを持ち、ゆっくりと左右に広げ、磁石を外して下さい。そのまま、首に掛けておく、また、ケースなどに収納して下さい。

磁石が接合している状態

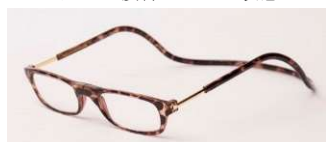

両手で磁石を外した状態



眼鏡装用から磁石を外した状態



磁石を外し、首に掛けた状態

【使用上の注意】

●単焦点レンズ使用品


- ・当商品はアクリル光学レンズを使用しています。素材の特性からアルコール類を含むウェットタイプのメガネ拭きなどを使用しての消毒や拭取りは、レンズのカット面よりアルコール類が浸透し、亀裂やワレが生じる場合がございますのでご注意ください。

●二重焦点レンズ使用品

- ・レンズの遠用部と近用部はピントの合う位置が変わるなど、急激に見え方が変わります。遠近感がくる場合がありますのでご注意ください。

●共通

- ・フレームが直接、頭・顔に触れる部分に関して肌の弱い方、アレルギー体質の方などはご使用の際、十分にご注意下さい。
- ・ツル (テンプル) を伸長する際は、①の画像を参照してください。戻す場合は②の通り、反対側に操作して下さい。また、力を入れすぎて引張ると、可動部が抜けてしまう場合があります。誤って指を挟んだりし、ケガに繋がりますので、よく確かめて操作してください。
- ・なお、使用当初は可動部が固く感じる場合もあります。そのような時は、無理に引っ張らず、潤滑剤をつけるなどしてから操作して下さい。
- ・また、可動部を伸ばしたままの状態、何らかの応力が加わった場合、フレームが折れる等の可能性があります。使用後は、②の状態に戻してから収納するなどをして下さい。
- ・レンズの入替、交換はレンズを取り外す際、フレーム塗装が剥離し、キズ・破損が生じる場合がありますので、お奨め致しません。購入店や専門店にてご相談下さい。

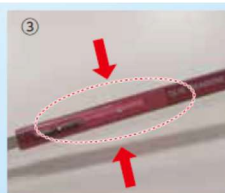

【保管方法及び有効期間】

- ・ご使用されないときは、フレーム・レンズについた水分、汗・皮脂、整髪料・化粧品、溶剤、ゴミ・ホコリ等の汚れをよく拭取り、ケース等に入れ、幼児の手の届かない場所に保管してください。
- ・また、車内や高温・高湿となるような場所は避け、清潔で乾燥した場所に荷重のかからない状態で保管してください。濡れた、汚れのついたまま、もしくは無理な状態で保管すると、商品の変形・劣化・破損の原因となる場合がありますのでご注意ください。
- ・付属のケースに収納する際は、以下の画像を参照頂き、ケース中央部の縫い付けにフレームが引っかからないようにし、収納して下さい。



【保守・点検に係る事項】

- ・ご使用の頻度にもよりますが、約半年から1年毎を目安に定期的にネジの緩み、枠とレンズのガタツキ、レンズ面の汚れ・キズの有無等を点検してください。もし、不具合が見つかった場合には、購入店や専門店にてご相談下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 オーケー光学 〒262-0003 千葉県千葉市花見川区宇那谷町 1504-9 TEL : 043-215-0830

製造業者 木水眼鏡製作所

本品には取扱説明書がありますので、必ず確認してください。