

機械器具 74 医薬品注入器
一般医療機器 耳鼻咽喉科用薬液噴霧器 70453000

点鼻スプレー


再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 使用前又は使用中に破損等の異常が認められる場合は使用しないでください。
2. 本品に加工を施さないでください。
3. 再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

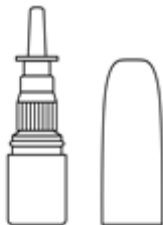

2. 原材料

ポンプ部: ポリプロピレン、ポリオキシメチレン

【使用目的又は効果】

本品は医薬品を投与するために、耳鼻咽喉内部に吹き込むことができる手動ポンプを有する噴霧器である。

【使用方法等】

1. 使用準備

- 1) 本品のキャップを外します。
- 2) ポンプと容器を、ゆるやかにねじってはずします。
注 1) ポンプと容器はスクリュー式で固定されています。
- 3) 容器に薬剤師の指導のもと、薬剤を必要量注入します。
- 4) 薬剤を注入後は、容器とポンプ部をゆるやかにねじることにより、接続します。
- 5) 容器とポンプがしっかりと固定されていることを確認してください。次にキャップを付け、キャップがしっかりと固定されていることを確認してください。

2. 使用方法

- 1) キャップをはずします。
- 2) 容器を持ち、薬剤が噴霧するまで、はね部を 2, 3 回押してください。
- 3) 静かに息を吸い込みながら、薬剤の用法用量に従い、はね部を押し、鼻腔内に噴霧してください。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 包装が破損している場合、又は製品に損傷等の異常が認められる場合は使用しないでください。
- 2) 製品に無理に力を加えたり、加工を施さないでください。
- 3) はね部をゆっくり押すと霧状にならないことがあります。その際は、強めに押してください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- 1) 使用前：水濡れに注意し、高温・多湿な場所及び直射日光を避けて、清潔な状態で保管してください。
- 2) 使用后：薬剤の用法用量で使用后は使用せず、廃棄ください。

【包装】

個包装 50 個入／箱

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社北里
〒416-0932 静岡県富士市柳島 100 番地 10
TEL: 0545-65-7122 FAX: 0545-65-7128

製造業者 株式会社北里

**【お問い合わせ先】

株式会社北里
TEL: 0120-457-454 (フリーダイヤル)
FAX: 0120-111-471

Nose Spray

General Information

Refer to the label on the product or package before use.

Indications for Use

Nose Spay is an aerosol spray with a manual pump that enables users to administer a medicine by spraying into the ear, nose, and throat.

Contraindications

- Do not use if any damage or abnormality is observed before use or during use.
- Do not make any modification to this product.
- Do not reuse.

Instructions for Use

Preparation

1. Remove the cap.
2. Twist gently to detach the pump and the container.
Note: Pump and container are fixed with screw type.
3. Fill necessary quantity of medicine into the container under the instruction of pharmacists.
4. Twist the pump gently to attach to the container.
5. Confirm that the pump and the container are firmly fixed and then the cap is attached and firmly fixed.

Instructions for Use

1. Remove the cap.
2. Press the pump 2 or 3 times until medicine is sprayed in a mist.
3. Spray into the nasal cavity while inhaling slowly following prescribed usage and dosage.

Precautions

- Do not use if the package or the product is damaged.
- Do not make any modification to this product.
- Do not apply excessive force.
- Press the pump strongly. Spray may not be misty when pressing slowly.
- This instruction is only suggestion. The final decision on the technique and procedure used is the responsibility of the user.

Storage Instructions and Expiration Date

Before use: Store in a clean and dry condition away from sunlight, heat and humidity.

After use: Do not reuse and dispose the product after use following prescribed usage and dosage.

Symbols on the Label

	Do not reuse
	Batch code
	Re-order number