

物理療法台(13964000)
一般医療機器

ラウンドチェアーWMタイプ

【警告】


- ・本製品は、医師、医療従事者以外は使用しないで下さい。
- ・患者および使用者の安全を守り、機器を正しく使用するために、本書の記載事項に従ってください。
- ・患者が各操作スイッチに触れたりしないように、常に患者から目を離さないようにしてください。
- ・患者および使用者の手・指・身体の一部を機器の可動部やその周辺に近寄らせないでください。
[挟まれて人身事故の原因となります。]
- ・電源は必ずAC100Vを使用してください。
- ・ペースメーカーを使用している患者には十分に注意してください。使用中に異常が見られた場合には、直ちに本製品の電源を切り、使用を中止してください。
- ・医用電気メス、レーザーメスなどの電子機器の使用時には誤動作を起こさせる可能性があるため本製品の電源コンセントを抜いてください。

【禁忌・禁止】

次の行為を禁止します。

- ・本製品の分解・改造はしないで下さい。また、不具合状態のまま使用しないで下さい。
- ・保守点検を行っていない状態で使用しないで下さい。
- ・本製品に二人以上載せての治療はおやめ下さい。
- ・本製品に火気を近づけないで下さい。
- ・設置時、使用時には、本製品の周辺に若干の余裕を取りご使用ください。
- ・電磁妨害波が存在する環境下では、誤作動を起こす可能性があります。

【形状・構造及び原理等】

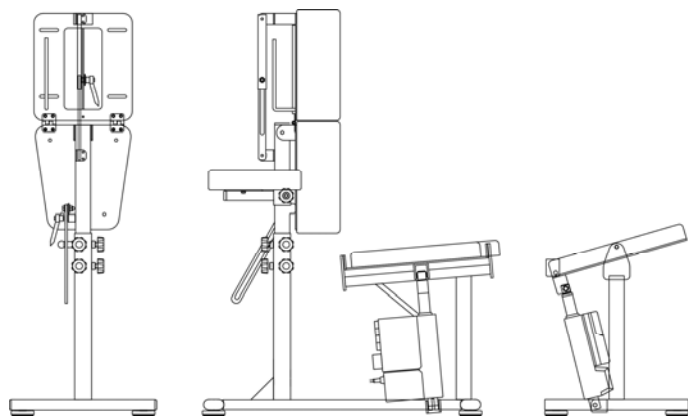

1)構成

- (1)スチールフレーム部 (2)座シート
(3)電動アクチュエーター(4)制御ボックス(電源部)
(5)フットスイッチ

2)電気定格

AC100V 周波数 50/60Hz

3)本体寸法及び重量

- (1)寸法:幅50×奥行90×高さ109(cm)
(2)重量:約32kg

4)作動・動作原理

座部は電動アクチュエーターを内蔵し、フットスイッチを操作することにより、適切なポジションに調整することができる。ヘッド部・胸部はクランプレバーにより適切なポジションに調整することができる。

【使用目的または効果】

本製品は、診療室などで使用し、運動療法及びマッサージに使用することを目的とした物理療法台です。

【使用方法等】

座部…フットスイッチにて適切なポジションに調整することができる。

ヘッド部・胸部…クランプレバー操作により最適なポジションにできる。

【使用上の注意】

詳細については、取扱説明書を必ずお読みください。

1)使用注意

周りに誰もいないことを確認の上、操作間違いのないよう十分注意して操作すること。
必ず平らで丈夫な床の上に設置すること。

2)重要な基本的注意

使用する前に装置に異常がなく、構成品、付属品が確実に固定されていることを確認すること。

3)その他の注意

使用時は必ずがたつきがない状態で使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1)保管方法

保管環境 温度 10～40° 湿度 30～75%

2)使用耐用年数

- (1)指定された保守点検を実施した場合の耐用年数は10年です。(自己認証)
(2)座シート、およびスイッチ類は、使用環境によって異なります。

【保守・点検に係る事項】

1)本製品、および部品は、必ず日常点検を行ってください。

- (1)設置状態の確認。(2)スイッチ操作での作動確認。
(3)コード類の点検。(4)電動アクチュエーターの異音異臭の確認。

2)しばらく使用しなかった本製品を再使用するときは、使用前に清掃を行い、清掃作業を行った後必ず本製品に異常がなく安全に作動することを確認してください。

●本製品を廃棄するとき

本製品や交換した部品を廃棄するときには、感染予防を十分に行い、その時点での法規制にしたがい、適切な処理をしてください。

【製造販売業者及び製造業者氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者:株式会社高田ベッド製作所
製造業者:株式会社高田ベッド製作所
住所:大阪府泉南市りんくう南浜2番地27
TEL:(072)484-8800 FAX:(072)484-8806

取扱説明書を必ずご参照ください。