

機械器具 12 理学診療用器具

一般医療機器 再使用可能な止血帯（JMDN コード：17230000）

TTGD 携行止血帯

【禁忌・禁止】

- ・ 四肢の止血以外の目的に使用しないこと。
- ・ 小児に対しては使用しないこと。
- ・ 組織壊死の恐れがある為、30 分以上の連続使用をしないこと。但し、生命の危機が切迫している出血に対して使用する場合には、その限りではない。
- ・ 肘、膝の関節を装着部としないこと。
- ・ 衣服内の固形物の上へ使用しないこと。
- ・ 体液が付着した止血帯は、再使用しないこと。


【形状・構造及び原理等】

〈形状〉

製品図	型番	サイズ
 標準タイプ	TTGD-TQ01-L	大
	TTGD-TQ01-S	小
 巻き上げハンドル付属タイプ	TTGD-TQ02-L	大
	TTGD-TQ02-S	小

※ 標準タイプ TTGD-TQ01 につきましては、
使用において巻き上げ容易な強度の高い棒状のものが
必要になります。

〈組成・原材料〉

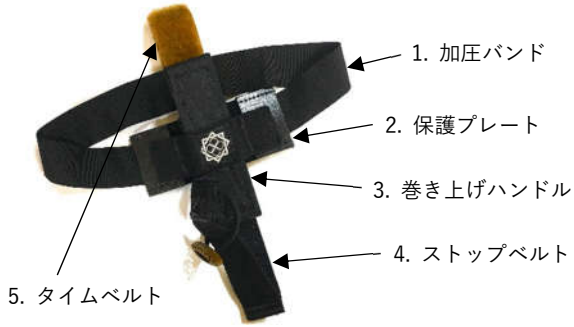

1. 加压バンド	ナイロン ポリプロピレン 軟質塩化ビニール
2. 保護プレート	ポリエチレン ポリプロピレン
3. 巻き上げハンドル※	ポリプロピレン 軟質塩化ビニール
4. ストップベルト	ポリプロピレン ナイロン
5. タイムベルト	ナイロン

※ 標準タイプ TTGD-TQ01 には付属していません

〈動作原理〉

加压バンドを装着した状態で巻き上げることで、装着部が圧迫される。出血の状態を確認しながら、適正な圧力を加えて固定することで、正常血流の遮断による止血効果が得られる。

【使用目的又は効果】

〈使用目的〉

創傷等により出血のある上下肢に装着して、循環血流の抑制及び遠位部への正常血流の遮断により、創傷部からの出血を止める為に用いる。
特に止血帯法以外の止血法では制御が困難な、動脈性出血の止血を目的とする。

【使用方法等】

1. 出血部から5～8cm中枢側に加圧バンドを装着する。
2. 保護プレートを皮膚に密着するまでスライドさせ、加圧バンドの周囲長を調整する。
3. 出血状態を確認しながら、出血が止まるまで加圧バンドを巻き上げる。

タイプ毎の加圧バンドの巻き上げについて

TTGD-TQ01 に関しては、巻き上げ容易な強度の高い棒状の物を使用して行う。TTGD-TQ02 に関しては、付属の巻き上げハンドルを使用して行う。

4. 巻き上げハンドル (TTGD-TQ01 の場合は、巻き上げに用いた棒状の物) をストップベルトで固定する。
5. 出血が持続する場合は、更にバンドを強く締める。それでも出血が持続する場合は、2本目のTTGD 携行止血帯を一本目よりも更に中枢側に並べて装着する。
6. タイムバンドに装着した時間を記録する。
タイムバンドに書きづらい場合は、衣類等見やすいところに記載する。

【使用上の注意】

- ・ 使用にあたり本書をよく読み、禁忌・禁止事項の記載内容及び使用方法を遵守すること。
- ・ 出血の状態を確認し、必要以上に締めないこと。
- ・ 装着後は、速やかに医療機関を受診し、医師の判断及び処置を受けること
- ・ 止血帯の解除は、原則医療機関で行うこと。
- ・ 使用前に製品の状態を確認すること。汚染や劣化がある場合には使用しないこと。
- ・ 製品の洗浄には、薬品や溶剤を使用しないこと。

【保管方法及び有効期限等】

〈保管方法〉

直射日光、高温多湿、汚染を避け、常温で保管する。

〈有効期間・耐用年数〉

開封前、適切な保管条件下で10年

開封後、未使用且つ適切な保管条件下で3年

【保守・点検に係る事項】

使用前及び使用後は、製品に破損箇所及び汚染箇所が無い事を確認すること。

【資料請求先】

田村装備開発株式会社

下記QRコードよりホームページに入れます。

ご使用前に、取り扱い動画をご視聴下さい。



【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造及び製造販売元】

株式会社豊栄

所在地：〒277-0924 *千葉県柏市風早 1-8-9

電話番号：04-7192-3321(代) FAX 04-7192-3310

【総販売元】

田村装備開発株式会社

所在地：〒355-0008 埼玉県東松山市大谷 4453

電話番号：0493-36-1255(代) FAX 0493-36-1256

販売名

TTGD携行止血帯

一般医療機器

一般の名称

再使用可能な止血帯

医療機器届出番号

12B2X10012000002

製造販売元

株式会社 豊栄

千葉県柏市風早1丁目8番9

型番・製造番号



総販売元

田村装備開発株式会社

埼玉県東松山市大谷4453

*本紙はいつでも読めるように大切に保管して下さい。