

類 別:機械器具77 バイブレーター
一般的名称:家庭用電気マッサージ器 (JMDN コード:34662000)
分 類:管理医療機器

レイマックスモジュールバイター VR-303

*印:改定箇所を示す


【警告】

以下のような磁気の影響を受ける可能性のある医用電気機器を使用している人は、使用しないでください。

- ・ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み形医用電気機器を使用している人。
- ・医師からマッサージを禁じられている人。
血栓[そく(塞)栓]、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎、皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)などの人。

【形状、構造及び原理】

<各部の名称及び動き>

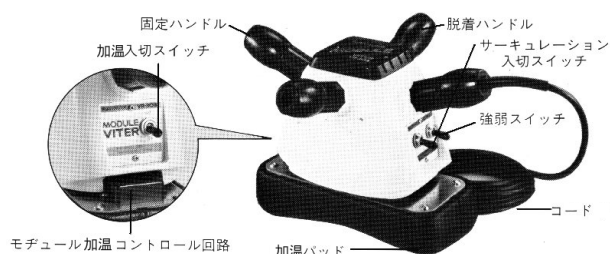

【サーキュレーション入切スイッチ】

電源の「入」「切」を行います。

【強弱スイッチ】

サーキュレーションの「強」・「弱」の選択を行います。

【加温入切スイッチ】

加温の「入」「切」を行います。

【加温パッド】

患部に圧接し、回転振動を伝達します。

【固定ハンドル】

ここを握って本体を持ちます。

【脱着ハンドル】

適時に脱着が出来、加温パッドを縦方向に当てる時などに使用します。

【コード】

電源プラグをコンセントに差し込みます。

【モジュール加温コントロール回路】

加温温度を制御する回路が組み込まれています。

<作動原理>

電動機の回転軸先端に固定した偏心軸に圧接パッドを有し患部面に平行な回転振動を与える振動型マッサージャー。

マッサージ効果を高めるために、パッドに加温機能あり。

【効能又は効果】

あんま、マッサージの代用。

一般家庭で使用する。

【製品仕様】

定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
消費電力	57/72W (50/60Hz)
回転数	強回転 (50Hz/60Hz) 2,900/3,350rpm 弱回転 (50Hz/60Hz) 1,450/1,700rpm
加温パッド部温度	約63℃
安全装置	温度ヒューズ内蔵、巻き込み防止装置 モジュール加温コントロール回路

<寸法/重量>

本体外形寸法	296mm×260mm×177mm
コード寸法	2.8m (固定ハンドル先端より)
重量	3kg

【使用方法】

1. 入・切スイッチが「切」になっていることを確かめ、電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
2. 加温パッドをご使用箇所にあて、サーキュレーション入切スイッチを「入」にします。
症状の程度や部位に合わせて強弱スイッチを適宜変えながらご使用ください。
3. パッドを加温する時は、加温入切スイッチを「入」にしてください。「入」後、約3分間(室温20℃の場合)で所定の温度になります。
4. 使用後は必ずサーキュレーション入切スイッチ及び加温入切スイッチを「切」にして、電源プラグをコンセントから抜いてください。

【使用上の注意】

<ご使用前の注意>

- ・次の人は使用前に医師に相談してください。
悪性しゅよう(腫瘍)のある人。
心臓に障害のある人。
妊娠初期の不安定期又は出産直後の人。
糖尿病などによる高度な末しょう(梢)循環障害による知覚障害のある人。
温度感覚喪失が認められる人。

- 皮膚に創傷のある人。
- 安静を必要とする人。
- 体温 38℃以上(有熱期)の人。
- 急性炎症症状〔けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など〕の強い時期。
- 衰弱しているとき。
- 骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、ねんざ(捻挫)、肉離れなど、急性〔とう(疼)痛性〕疾患の人。
- 脊椎(せきつい)に異常のある人、又は背骨が左右に曲がっている人
- その他、医師の治療を受けている人や、身体に異常を感じている人。
- ・加温機能を使用する時は、着衣の上かタオル等をあててご使用ください。同一箇所に1分間以上の連続使用はしないで下さい。低温やけどを起こすおそれがあります。
- ・低温やけどを起こすおそれがありますので、次のような方がお使いの時は、特に注意してください。
 - 乳幼児、皮膚の弱い方。
 - 子供、お年寄り、ご自分で意思表示出来ない方。
 - 眠気をさそう薬(睡眠薬・かぜ薬など)を服用された方
 - 深酒をされた方。疲労の激しい方。
- ・各スイッチが、正常に作動するか確認してからご使用ください。また、しばらく使用しなかったときは、使用前に機器が正常に、かつ、安全に作動することを確認してからご使用ください。
- ・電源プラグをコンセントに確実に差し込んでご使用ください。
- ・他の治療器と同時に使用しないでください。
- ・AC100V 以外では使用しないでください。
- ・浴室などの湿度の高い所では使用しないでください。
- ・加温パッドに破れ等があるかを確認して、あった場合は使用しないでください。
- ・付属品は同梱されているものをご使用ください。
- ・次の方は取り扱える人が必ず付き添ってご使用ください。
 - 乳幼児・子供、知覚障害の方。
 - 取扱説明書の内容を理解できない方。

<ご使用中の注意>

- ・使用しても効果が現れない場合、医師又は専門家に相談ください。
- ・ご使用は1回10分以内です。
- ・食前・食後30分以内のご使用はしないでください。
- ・頸椎部への1分以上の使用はしないでください。
- ・同一箇所への3分以上の連続使用はしないでください。
- ・強い力でパッドを押しつけたり、腰掛けたりしないでください。
- ・本来の目的以外には使用しないでください。
- ・連続で1時間以上ご使用の時は、10分程度機器を休め

- ・加温パッドはビニル製ですので、過熱物に触れないようにしてください。
- ・布団やコタツの中など送風効果の悪い所でのご使用はしないでください。
- ・身体に異常を感じたときには、使用を直ちに中止してください。
- ・本機器には巻き込み防止装置が付いていますが、万一毛髪や衣服が巻きこみされたときは直ちに「切」スイッチを「切」にして、電源プラグをコンセントから抜いてください。*
- ・停電のときは直ちにサーキュレーション入切スイッチ及び加温入切スイッチを「切」にして、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・機器には水分(水やお茶等)がかからないようにしてください。感電や故障の原因になります。
- ・機器に故障が発見された場合は、事故防止のため、使用を直ちに中止し、サーキュレーション入切スイッチ及び加温入切スイッチを「切」にして、電源プラグをコンセントから抜いてください。

<ご使用後及び保管上の注意>

- ・使用後は、サーキュレーション入切スイッチ及び加温入切スイッチを「切」にして、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・電源プラグを抜く時は、コードをもって引き抜くなどしてコードの接続部に無理な力をかけないでください。
- ・次の使用に支障のないように清浄にし、湿気のすくないところに整理、保管してください。
- ・梱包資材及び機器本体の廃棄については各自治体の定めに従って廃棄してください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- ・暖房器具のそば、日光の当たるところ、ほこりの多い所、湿気の多い所を避けて保管してください。
- 保管条件： 周囲温度 0～45℃

保守・点検に係わる事項】

- ・お手入れは電気掃除機で表面のほこりを吸い取る程度にしてください。本体が汚れた時は、中性洗剤を布に浸して拭き取ってください。シンナー、ベンジンは使用禁止です。
- ・故障したり、電源コードが破損した場合は、勝手にいじらず、販売店又は製造販売元にご連絡ください。
- ・機器は、改造、修理又は分解しないでください。

【包装】

1台/箱 (本体、脱着ハンドル、取扱説明書)

【製造販売業者及び製造業者の氏名及び住所】

製造販売業者：株式会社豊栄

住 所：千葉県柏市風早1丁目8番9*

電 話：04-7192-3321

製造業者：株式会社豊栄