

機械器具（09）医療用エックス線装置及び医療用エックス線装置用エックス線管
一般医療機器 全身画像診断・放射線治療用患者体位固定具 40902000
トランダクションシート


【禁忌・禁止】

本品の素材に対して過敏症の既往歴がある患者に使用しないこと。

* 【形状・構造及び原理等】


1. 形状、構造

シート

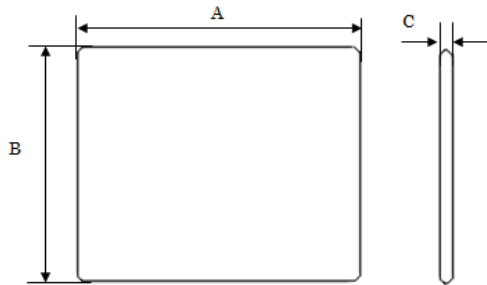

型番	A(許容差)mm	B(許容差)mm	C(許容差)mm	重量(許容差)g
TDS001-1	600(±10)	500(±10)	3(±1)	330(±20)
TDS001-2	600(±10)	450(±10)	3(±1)	297(±15)
TDS001-3	600(±10)	400(±10)	3(±1)	264(±14)
TDS001-4	600(±10)	350(±10)	3(±1)	231(±12)
TDS001-5	600(±10)	300(±10)	3(±1)	198(±10)
TDS001-6	600(±10)	250(±10)	3(±1)	165(±10)
TDS001-7	400(±10)	200(±10)	3(±1)	88(±5)
TDS001-8	400(±10)	100(±10)	3(±1)	44(±3)
TDS001-9	400(±10)	300(±10)	3(±1)	132(±6)
TDS001-10	500(±10)	400(±10)	3(±1)	220(±11)
TDS001-11	500(±10)	300(±10)	3(±1)	165(±8)
TDS001-12	450(±10)	350(±10)	3(±1)	173(±8)
TDS001-13	450(±10)	250(±10)	3(±1)	124(±6)

マジックベルト
型番：TDS001B

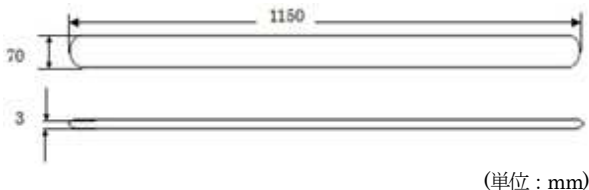

2. 原理

本品に含まれる金属により、患者への放射線量等をコントロールする。

【使用目的又は効果】

画像診断撮影時に、患者の手や足を適切に固定する。本品によって固定された部位はMR撮影時の電磁波の影響を受けない。

【使用方法等】

本品は再使用可能である。

1. 本品に破損がないことを確認する。
2. 画像診断（検査）部位以外の患者身体を本品で覆い、マジックベルト等で固定する。

【使用上の注意】

- (1) 本品に破れがあったときは、使用を中止すること。
- (2) 化学薬品等で拭かないこと。
- (3) かゆみ、かぶれなどの症状が現れた場合は使用を中止すること。

【保守・点検に係る事項】

- ・ しばらく使用しなかった本品を使用する時は、使用前に必ず点検すること。
- ・ 本品は、必要に応じて布等に殺菌消毒剤（塩化ベンザルコニウムアルコール、消毒用アルコール等）を湿らせて拭くこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社ジェイ・トラスト

製造業者：株式会社ジェイ・トラスト

TEL: 03-6280-3701

FAX: 03-6280-3703