

【添付文書】

20250117-002

製造販売届出番号 27B3X00300 000002

2025年10月14日作成（第1版）

医療機器 01 手術台及び治療台

手術台アクセサリ JMDN コード：70469000

販売名：手外科手術用手置台「OKETAR」

【禁忌・禁止】


- ・ 本品の使用目的以外には使用しないこと
- ・ 弊社が指定した製品以外との併用はしないこと

【原材料】

【使用目的又は効果】

原材料 ステンレススチール/ポリカーボネート/
シリコンゴム/アルミニウム

【形状】

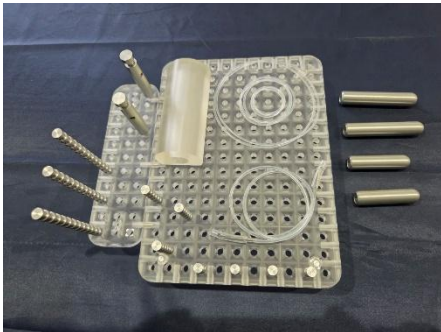

【使用目的】 手術台に付属するアクセサリとして使用する

【使用目的又は効果】

患者の手・指を任意の体位で固定するために使用する。
付属のパーツの組み合わせにより、自由度の高い
手の固定ポジションを決めることが可能である
本製品は再使用が可能である。

【性能及び安全性に関する規格】

ISO9001 に準拠

【使用方法】

1. 使用前

(1)本品は未滅菌のため、使用前に医療機関により
検証された滅菌バリデーションの滅菌条件に従い
滅菌を行うことを推奨する。

(2)本品は未滅菌のため、医療機関により検証され
た滅菌バリデーションの滅菌条件により滅菌
を行うことを推奨する。

標準的滅菌条件の例： 高圧蒸気滅菌法

上記の条件は滅菌の製品の無菌性を保証するもの
ではない。滅菌後の保証については、各医療機
関の責任の下行うこと。

2. 使用時 一般的な使用方法

手外科手術において樹脂製の手台に付属の手・指
を固定ピンを手台の穴に挿入して、Oリングを
引っ掛けることで手・指をしっかりと固定し、
術者が自由度の高い手のポジショニングを行う。

【保管方法】

- 1.常温・常湿にて清潔な場所に保管すること。
- 2.保管中は器械が破損しないように十分注意をする
こと

【製造販売業者】

株式会社カジテック・メディカル

電話番号：072-883-0303

Fax 番号：072-883-0304