

添付文書

令和 6 年 12 月 1 日作成(第 8 版) * *

令和 5 年 1 月 20 日作成(第 7 版) *

医療機器認証番号：221AGBZX00086Z00

機械器具 80 はり又はきゅう用器具

管理医療機器 滅菌済み鍼 (コード：34175000)

再使用禁止

ファロスディスポ鍼


【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 刺入の際、深さは鍼長の 1/3 以上残して刺入してください。
3. 原則禁忌
以下の方には原則として使用しないとするが、特に必要な場合は医師等に相談してください。
妊婦・ステンレス成分にアレルギーのある方・悪性腫瘍・出血性疾患

【形状・構造及び原理等】

本品は、JIS T 9301 に規定されている性能（引き抜き強さ）について適合しています。

1. 各部名称

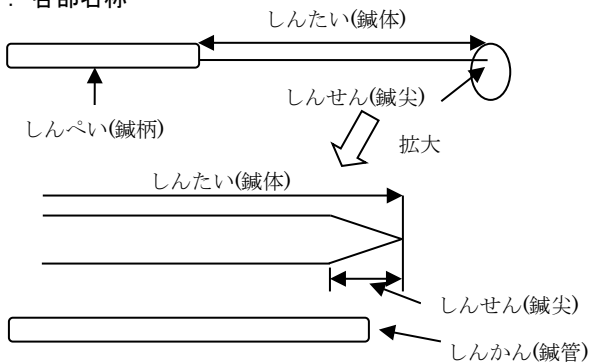

名称	原材料
鍼体	ステンレス鋼線
鍼柄	アルミ、銅又はプラスチック
鍼管	ポリ酢酸ビニル
潤滑剤	シリコーン油

2. サイズ表※

鍼体径 (φmm)	故称	鍼体長(mm)												
		7	10	13	15	25	30	39	48	60	75	90	100	125
0.10					○									
0.12	00番	○	○		○		○							
0.14	0番	○	○		○		○	○						
0.16	1番	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
0.18	2番			○	○	○	○	○	○	○				
0.20	3番			○	○	○	○	○	○	○				
0.22	4番			○		○	○	○	○	○				
0.24	5番			○		○	○	○	○	○	○	○		
0.26	6番								○	○				
0.28	7番								○	○				
0.30	8番			○		○		○	○	○	○	○	○	
0.34	10番			○		○			○	○	○		○	○

＜注＞タイプによって上記表○印のサイズがない製品あります。

【使用目的又は効果】

鍼治療に使用すること。

【使用方法等】

1. パッケージから取出し鍼管を皮膚の上に立てて置く
2. 鍼管に毫鍼を入れ、鍼管からはみ出た部分（鍼柄頭）を指で叩打する
3. 穿皮（切皮）→排管→刺入する

【使用上の注意】

＜重要な基本的事項＞

1. 個別包装により無菌が保たれています。包装がすでに破損又は汚損していた場合は、使用しないでください。
2. ご使用前に鍼を点検してください。湾曲や損傷のある場合は使用しないでください。
3. 筋肉部への治療では、極度の筋硬直により折鍼の危険性があります。φ0.18 mm以上の太い鍼をご使用ください。患者の緊張を取り除き咳などにも注意しながら施術してください。
4. 刺入した鍼が抜けなくなった時は無理に抜かず筋を弛緩させるなどの処置を行い、ゆっくりとまっすぐに抜いてください。抜鍼時に鍼を曲げたり、ひねりなどの力をかけたまま引抜くと折鍼の危険性があります。
5. 刺入の際、深さは鍼長の 1/3 以上残して刺入してください。
6. 衛生的な環境で施術前に開封し、刺入部位をアルコール綿などで消毒してから使用してください。
7. 通電に適した鍼ではありません。通電等で生じた事故についての責任は負いません。
8. アルミニウム鍼柄タイプは灸の温度に耐えるものではない為、灸頭鍼としての使用は行わないでください。
9. 銅鍼柄タイプは灸頭鍼としての使用が可能です。施灸の際局所の火傷にご注意ください。
10. この鍼は滅菌済みで 1 回限りの使用となっています。

【保管方法及び有効期間等】

＜貯蔵・保管＞

水濡れ、直射日光、多温多湿及び化学物質で汚染される可能性のある場所を避けて保存してください。

＜有効期間・使用の期限＞

使用期限は外箱に記載（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ファロス

* 住所：大阪府堺市堺区幸通 1 番 15 号

電話番号：072-282-5537

* 製造業者：

Wujiang City Cloud & Dragon Medical Co., Ltd.

輸入元：中国