

耳式体温計 フォラケア・イヤースキャン


- 【警告】**

 1. 保管方法を確認し、保管場所と使用場所に温度差がある場合は本品を 30 分ほど使用環境温度内の環境になじませてから使用すること。[正しく測定されないおそれがある。]
 2. プローブが汚れた場合は清掃を行い、破損した場合は使用しないこと。[正しく測定されない、けがのおそれがある。]
 3. プローブカバーが汚れていたり破損している場合は新しいものに交換すること。[正しく測定されない、けがのおそれがある。]
 4. 他の人が使用したプローブカバーは使用しないこと。[感染のおそれがある。]
 5. 専用のプローブカバーを使用すること。[正しく測定されない、故障のおそれがある。]
 6. 耳での体温測定以外に使用しないこと。[故障のおそれがある。]
 7. 落とす、蹴る、振るなどの強い衝撃を与えないこと。[故障のおそれがある。]
- 【禁忌・禁止】**


 1. 本品による体温測定結果のみで病状の判断を行わないこと。[他の要因も含めて総合的に判断する必要がある。]
 2. 分解、修理、改造等を行わないこと。[機器が正常に動作しなくなるおそれがある。]
 3. 耳に疾患がある場合は使用しないこと。[悪化のおそれがある。]

【形状・構造及び原理等】

1. 構造及び名称

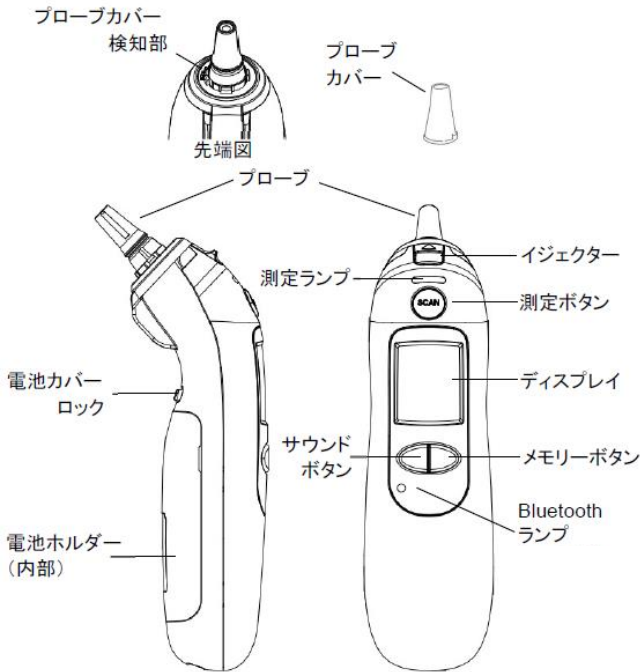

ディスプレイ表示

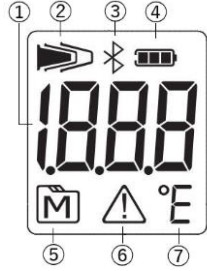

No	表示	内容
①	測定温度	測定結果を示す
②	プローブカバーマーク	プローブカバー未装着時に表示される
③	Bluetooth マーク	Bluetooth 通信状態を示す
④	電池マーク	電池残量を示す
⑤	メモリーマーク	メモリーモードを示す
⑥	エラーマーク	エラー発生時に表示される
⑦	単位	測定単位 : °C

寸法 : 150mm (縦) × 42mm (横) × 56mm (厚さ)
重さ : 80g (電池を含まない)

2. 体に接触する部分の組成
プローブカバー : PE 樹脂
3. 電氣的定格
電圧 : DC 3V
電源 : 1.5V 単 3 アルカリ乾電池 × 2 本
EMC : IEC60601-1-2 : 2014 に適合
4. 機器の分類
電撃に対する保護の形式及び程度 : 内部電源機器、BF 形
水の有害な浸入に対する保護の程度に関する分類 : IP22
5. 原理
耳孔から放出される赤外線をセンサーが感知して温度を計測し、口腔温に換算して表示する。
6. 性能
 - 1) 測定範囲 : 32.0 ~ 43.0 °C
 - 2) 測定精度
35.0 ~ 42.0 °C : ± 0.2 °C
34.9 °C 以下および 42.1 °C 以上 : ± 0.3 °C
 - 3) 最小表示単位 : 0.1 °C
7. 使用環境
温度 : 10 °C ~ 40 °C、湿度 : 95 % RH 以下 (結露しないこと)

【使用目的又は効果】

人の鼓膜及びその周辺の赤外線を測定し、口腔温に換算して表示する。

【使用方法等】

1. 電池の入れ方
 - 1) 電池カバーロックをスライドさせて電池カバーを開く。
 - 2) 向きに注意して単 3 アルカリ乾電池 2 本を電池ホルダーに挿入する。
 - 3) 電池カバーを閉める。

2. 体温測定方法

- 1) 新しいプローブカバーをプローブに装着すると電源がオンになる。
- 2) ディスプレイの表示が「- - -」になったら耳孔内にプローブを挿入する。
- 3) 測定ボタンを押すと電子音が鳴って測定され、結果が表示される。
- 4) イジェクターを押し、プローブカバーを取り外して廃棄する。
- 5) 測定ボタンを長押しする、または約 60 秒間操作を行わないと自動的に電源がオフになる。

3. メモリーモード

- 1) 電源オンの状態でメモリーボタンを押すとメモリーモードになり、最新の測定結果が表示される。
- 2) 続けてメモリーボタンを押すごとに測定結果が新しい順に表示される。
- 3) 測定ボタンを押すと体温測定モードに戻る。

4. アラート表示

- 1) "Lo"表示
測定結果が測定範囲を下回る場合（31.9℃以下）に表示され、ディスプレイが赤く点灯する。
- 2) "Hi"表示
測定結果が測定範囲を超える場合（43.1℃以上）に表示され、ディスプレイが赤く点灯する。

5. 通信機能

スマートフォン・タブレット向け専用アプリ「iFORAMP」に測定結果を記録できる。詳細はアプリの説明書を参照。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
 - 1) 測定結果に疑問を感じる場合は医師に相談すること。
 - 2) 小児だけの使用は避けること。また小児の手の届かない場所に保管すること。
 - 3) 分解、修理、改造等を行わないこと。
 - 4) 測定可能な温度範囲外および使用環境条件外では使用しないこと。
 - 5) 水などの液体を避けること。
2. 使用上の注意
 - 1) 温度 10℃～40℃、湿度 95%RH 以下の環境で使用する。
 - 2) 左右の耳で測定結果が異なることがあるので、同じ側の耳で測定すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所で保管すること。
温度：-20℃～60℃、湿度：95%RH 以下（結露しないこと）
2. 耐用年数は記載された使用環境条件、保管環境条件及び使用方法に従い適切に使用された場合、3 年である。[自己認証による]

【保守・点検に係る事項】

1. 本体に汚れがあるときは、乾いた柔らかい布で拭きとること。
2. プローブに汚れがあるときは、清潔な乾燥した綿棒で拭きとること。
3. 清掃後 30 分間は新しいプローブカバーを装着しないこと。
4. 研磨剤や有機溶剤は使用しないこと。
5. 耐水仕様ではないので、水洗いしないこと。
6. 涼しい乾燥したところで保管し、埃や直射日光は避けること。
7. 廃棄する際は各自治体の規定に従うこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社フォラケア・ジャパン
東京都港区新橋 5-10-8 FORA ビル
(TEL) 03-6452-8642

外国製造業者（国名）

Taidoc technology corporation（台湾）