

## ブレストライト

### 【警告】


1. 電源オンの状態で光源を見ないこと。  
[一時的に目がまぶしく、見えにくくなる。]
2. 授乳期の方が使用しないこと。
3. 異常を見つけたら、専門医に相談すること。
4. ブレストライトジェル(別売品)の成分にアレルギーがある方は使用しないこと。

### 【形状・構造及び原理等】

本品は乳房の異常を見つけるのに役立ち、手軽に行うことができる。乳房組織を通して無害な赤色光を照らして、乳房内部を見ることができる。乳房検査のスクリーニング装置で、異常を見つけたら、専門医を受診する。

#### 1. 製品構成

ブレストライト本体  
電源アダプター

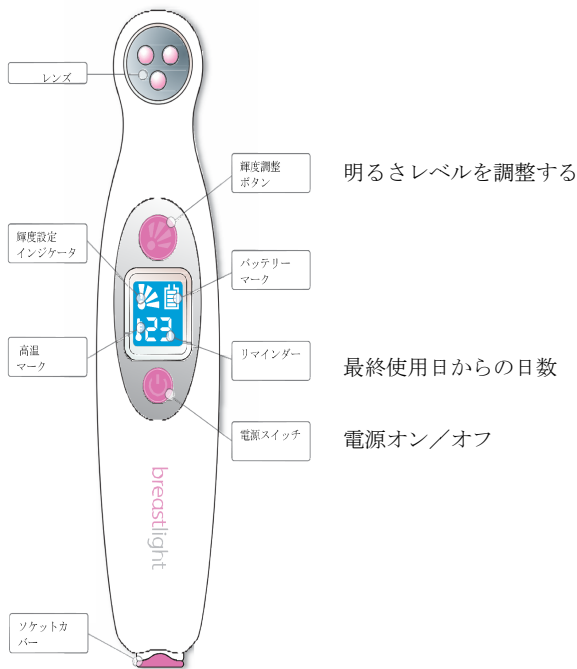

#### 2. 寸法と重量等

寸法: 幅 46.2mm 奥行 53.5mm 高 202.6mm  
質量: 本体 300g (電源アダプターを含まず)  
電源: 100~240V 50/60Hz  
消費電力: 5.4W

#### 3. 材質

PC-ABS樹脂

#### 4. 原理

乳房組織を通して無害な赤色光を照らして、半透明になった乳房内部を見ることができる。

### 【使用目的又は効果】

#### 1. 使用目的



検査のために乳房皮膚及び軟組織を照射して半透明にし、乳房皮膚及び軟組織を直接観察する。

#### 2. 効果

乳房の皮膚及び組織を特殊な赤色光で照射して半透明することによって動作する。非常に安全で便利な装置で、定期的検査によって、乳房に異常な変化を早期発見する可能性がある。

### 【使用方法等】

1. 上半身の服を脱いでから、部屋の照明をオフにして、2~3分待つ(目が慣れるまで)。
2. 胸の上にブレストライトジェル(別売品)を軽く塗る。
3. 本品の電源をオンにして、低い光源レベルからスタートして、皮膚に接している時に、必要な明るさレベルを高く変更する。
4. 片方の胸の真下から、皮膚にしっかり付けて、ゆっくり順番に、本品を動かしながら上から観察する。

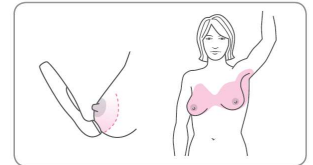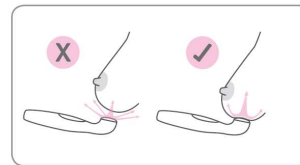

5. 脇下と乳頭を含む胸をすべて確認する。
6. 片方の胸を見終えたら、他方の胸を同様に確認する。
7. 終わったら、部屋の照明をオンにして、本品の電源をオフにする。
8. 過剰分のブレストライトジェルを拭き取る。

### 【使用上の注意】

1. 本品を分解や改造しないこと。
2. 本品に衝撃を与えたり、ぶつけたりしないこと。[故障と破損の原因になる]
3. 初めて使用する時或いは長期間未使用で再使用する時、4時間の充電が必要となる。
4. 本品は暗い部屋で使用する。
5. 一分間使用しなければ、自動的に電源がオフになる。
6. 光源部分温度が40℃を超えたら、自動的に電源がオフになる。
7. 本品は防水ではないので、入浴中などに使用しないこと。
8. 汚れたら柔らかい布で本品を清拭してください。

### 【保管方法及び有効期間等】

高温、多湿、直射日光および水濡れを避けて室温で保管すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

\*製造販売元  
華琳 株式会社  
電話番号 03-6666-9179

外国製造業者  
Ashgill Electronics Ltd. (英国)  
PWB Health Ltd. (英国)

本品の『取扱説明書』を必ず参照してください。