

機械器具 01 手術台及び治療台
一般医療機器 手術台アクセサリ (JMDN コード 70469000)


スパイダー3D コネクタ S

【禁忌・禁止】

本品について、改造や加工等を行わないこと。
[形状の変更や刻印をするなどの二次加工は折損の原因となるため]

【形状・構造及び原理等】

形状：足の関節鏡手術の際に使用するアクセサリで、足の固定に使用する。

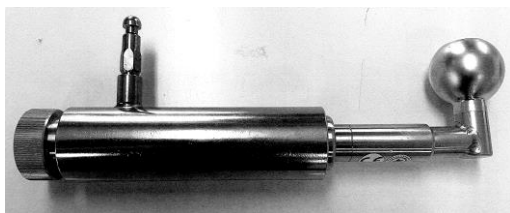

SNJ00280C

原材料：ステンレス鋼

原理：関節鏡手術の際、患部の足を本品に固定し、手術を行う手術位置を確保する。

【使用目的又は効果】

本品は、手術台に取り付け、足の関節鏡手術時に適切な位置で固定する。

【使用方法等】

本品は未滅菌のため、使用前に滅菌すること。

1. 滅菌方法

本品は、医療機関内において 10⁻⁶ 以下の無菌性保証水準が得られる条件で滅菌を行う。

2. 使用方法

SPIDER に確実に接続し、患部を固定し、手術位置を確保する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 本品は未滅菌品である為、使用前に必ず適切な方法で洗浄・滅菌を行うこと。([保守・点検に係る事項])
- (2) 使用前に必ず目視等で外観検査を行い、キズ、割れ、サビ、変形・破損、構成部品の緩み・脱落及び動作不良等の異常がないことを確認すること。又、異常が認められた場合は使用しないこと。
- (3) 使用前に、破損・変形・亀裂・傷・摩耗が無いか、適切に機能するかどうか点検すること。
- (4) 併用するインプラントや器械の添付文書を必ず読んでから使用すること。

2. 不具合・有害事象

以下のような不具合・有害事象が発現する可能性がある。

(1) 不具合

- ・過大な力を加えたことによる製品の破損
- ・金属疲労による製品の破損

(2) 有害事象

- ・感染症

3. 高齢者への適用

高齢者は、骨が粗鬆症化している場合があり、術中に過度の力を加えることにより骨折したり、インプラント埋植後、緩み等が起きる可能性があるため、慎重に使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

洗浄後は十分に乾燥させ、水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて室温にて保管すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 洗浄

- ・組付けた器械は取り外してから洗浄して下さい。
- ・構造が複雑な部分も十分に洗浄を行うこと。
- ・洗浄液は、中性 (pH6.0~8.0) 低発泡性酵素洗浄液を推奨する。
- ・pH11.0 を超える洗浄液は使用しないこと。

2. 滅菌

滅菌を行う前に必ず適切な方法で十分な洗浄を行うこと。

本品の滅菌には以下の方法を推奨する。

- ・推奨滅菌条件 (日本薬局方による)

温度	時間
115~118℃	30 分間
121~124℃	15 分間
126~129℃	10 分間

* 高圧蒸気滅菌以外の方法で滅菌を行った場合、製品に変色等が発生する場合があります。

3. 点検

1. 使用後は付着している血液、体液、組織及び薬品等が凝固しないよう、直ちに洗浄すること。
2. 洗浄に使用する洗剤は必ず医療用洗剤を使用し、家庭用洗剤は使用しないこと。
3. 洗浄の最、目の粗い磨き粉や金属ワルを用いて器具の表面を磨かない事。器具表面に擦過傷が生じ、錆や腐食の原因となる。
4. 強アルカリや強酸性洗剤・消毒剤は器具を腐食させる恐れがあるため、使用は避けること。
5. 洗浄後の器具は直ちに乾燥させ、出来れば乾いた布で再度拭き取り、湿った状態で長時間放置するのは避けること。器具表面へのシミや錆が発生する原因となる。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 製造業者
株式会社ニッコーテック
電話番号 086-425-8878