

機械器具 58 整形用機械器具
一般医療機器 靱帯・腱手術用器械 (JMDN コード 70966001)

ai ドリルスルーガイド

【警告】

【使用方法】

- ・本品は未滅菌品である。必ず適切な方法で洗浄・滅菌してから使用すること。【保守・点検に係る事項】参照


【禁忌・禁止】

【使用方法】

1. 本品に過剰な力を加えないこと。[破損等の原因となる]
2. 本品に曲げ、研磨、打刻（刻印）等の二次的加工（改造）をすることは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
[不具合の原因となる]
3. 本品を化学薬品にさらさないこと。
[腐食による破損の原因となる]

【形状・構造及び原理等】

形状：本形状は以下の通り

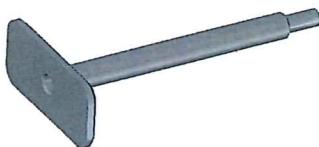

構造及び原理：骨孔に先端を刺入しドリルの挿入の補助をする。
原材料：ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

本品は、靱帯再建手術又は腱手術に用いる手動式の手術器械である。

【使用方法等】

骨孔に本品の先端を刺入しドリルの挿入の補助をする。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 本品は未滅菌品である為、使用前に必ず適切な方法で洗浄・滅菌を行うこと。【保守・点検に係る事項】
- (2) 使用前に必ず目視等で外観検査を行い、キズ、割れ、サビ、変形・破損、構成部品の緩み・脱落及び動作不良等の異常がないことを確認すること。又、異常が認められた場合は使用しないこと。
- (3) 使用前に、破損・変形・亀裂・傷・摩耗が無いか、適切に機能するかどうか点検すること。

2. 不具合・有害事象

以下のような不具合・有害事象が発現する可能性がある。

- (1) 不具合
 - ・過大な力を加えたことによる製品の破損
 - ・金属疲労による製品の破損
- (2) 有害現象
 - ・感染症

【保管方法及び有効期間等】

洗浄後は十分に乾燥させ、水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 洗浄

- ・構造が複雑な部分も十分に洗浄を行うこと。
- ・洗浄液は、中性 (pH6.0～8.0) 低発泡性酵素洗浄液を推奨する。

2. 滅菌

滅菌を行う前に必ず適切な方法で十分な洗浄を行うこと。

本品の滅菌には以下の方法を推奨する。

・標準的滅菌条件

温度	時間
115～118℃	30 分間
121～124℃	15 分間
126～129℃	10 分間

3. 点検

1. 使用後は付着している血液、体液、組織及び薬品等が凝固しないよう、直ちに洗浄すること。
2. 洗浄に使用する洗剤は必ず医療用洗剤を使用し、家庭用洗剤は使用しないこと。
3. 洗浄の最、目の粗い磨き粉や金属ケールを用いて器具の表面を磨かない事。器具表面に擦過傷が生じ、錆や腐食の原因となる。
4. 強アルカリや強酸性洗剤・消毒剤は器具を腐食させる恐れがあるため、使用は避けること。
5. 洗浄後の器具は直ちに乾燥させ、出来れば乾いた布で再度拭き取り、湿った状態で長時間放置するのは避けること。器具表面へのシミや錆が発生する原因となる。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 製造業者
株式会社ニッコーテック
電話番号 086-425-8878