

器 62 歯科用切削器
一般医療機器 歯科用スクーラ JMDN コード: 35320000

歯石ケアキット Cata-MEDICA


【禁忌・禁止】

- ・本品の形状変更や改造等をしないでください。
- ・本品に劣化や異常が認められた場合は、直ちに使用を中止してください。

【形状・構造及び原理等】**

〈形状・構造〉

1. 本品は以下の 5 器具にて構成されます。
 - (1) 歯科用探針(鉤型)
 - (2) 歯科用探針(針型)
 - (3) 歯科用スクーラ
 - (4) 歯科治療用ピンセット
 - (5) 歯鏡
2. 本品は、作業部、ハンドル部で構成されています。
3. 本品は未滅菌品です。必要に応じて使用前に滅菌を行い、使用してください。

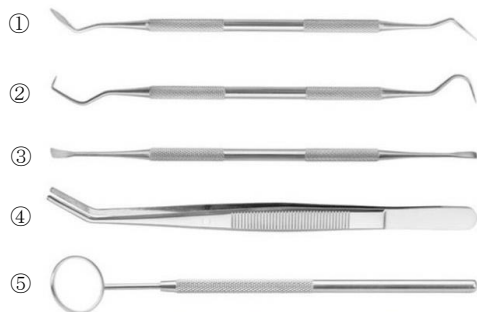

〈原材料及びサイズ〉

No.	器具名称	全長	原材料
①	歯科用探針(鉤型)	167mm	ステンレス鋼
②	歯科用探針(針型)	167mm	ステンレス鋼
③	歯科用スクーラ	170mm	ステンレス鋼
④	歯科治療用ピンセット	155mm	ステンレス鋼
⑤	歯鏡	165mm	ステンレス鋼 ガラス (ミラーヘッド)

〈原理〉

- ・本品の①②歯科用探針又は③歯科用スクーラのハンドル部を持ち、作業部を歯の表面にあてることで、歯石等の沈着物を除去します。
- ・本品の④歯科用ピンセットのハンドル部を持ち、先細部を閉じることで、口腔内に適用する創傷被覆・保護材を把持します。
- ・本品の⑤歯鏡のハンドル部を持ち、歯石等の除去の際に歯の表面や裏側をミラーヘッドで確認します。

【使用目的又は効果】

本品は、歯科治療又は診療において使用する歯科手用器具を組み合わせたキット製品であり、歯の表面に付着した歯石等の沈着物を除去することを目的に使用します。

【使用方法等】

1. 本品が洗浄・乾燥されて清潔であることを確認します。
2. 必要に応じて、滅菌を行います。

〈滅菌条件〉

- ・オートクレーブ滅菌 121℃-20 分
- ・滅菌バック (紙+PP) に収納し、滅菌してください。

3. 本品を用いて歯石等の沈着物の除去、診察における触診、創傷被覆・保護材の把持を行います。
4. 使用後は、本品を洗浄・乾燥後、専用ケースにて保管してください。

【使用上の注意】

1. 患者ごとに使用する場合は、洗浄・滅菌を行い、使用してください。
2. 本品を用いた処置により発疹、皮膚炎等の過敏症状又はアレルギー症状が認められた患者には使用を中止し、医師に相談してください。
3. 子供の診療・治療時に本品を使用する場合は、開口器等を用いて開口状態を維持し使用してください。本品を噛み、口腔内で破損し、怪我をするおそれがあります。
4. 破折等による誤飲の原因になるため、以下の事項は行わないでください。
 - (1) 本品に対して曲げ、切削、加圧等
 - (2) 粗雑な取り扱い (傷をつける、落下させる、強い衝撃を与える)
5. 薬液等が付着した場合は、速やかに洗浄してください。腐食の原因になります。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

- (1) 次のようなところに保管しないでください。
 - ・水のかかるところ
 - ・塩分など、暖房器具のそば、ほこり、直射日光、多湿・高温を含んだ空気の影響を受けるところ
 - ・子供や動物の手の届くところ
 - ・化学薬品の保管場所や腐食性ガスの発生するところ
- (2) 保管環境条件: 温度: 1~30℃、湿度: 10~95%RH (結露なきこと)

〈耐用期間〉

標準的な使用期間 : 5 年 [自己認証 (当社データ) による]

【保守・点検に係る事項】

〈点検方法〉

使用前に本品に傷、変形、破損等の異常がないことを確認してください。

〈洗浄方法〉

使用後に、温水ですすぎ、よく水を切って、自然乾燥してください。

〈滅菌方法〉

- ・オートクレーブ滅菌 121℃-20 分
- ・滅菌バック (紙+PP) に収納し、滅菌してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〈製造販売業者〉*

カーターテクノロジー株式会社
埼玉県北葛飾郡松伏町松伏 3207
TEL. 048-993-4422

〈製造業者〉**

Wuhan Jinguang Electronic Appliance Co., Ltd.