

取扱説明書/添付文書

類別：機械器具 80 はり又はきゅう用器具


一般医療機器 一般的名称：非能動型接触鍼（JMDN コード 70613001）

販売名：ソレール Solaire

禁忌・禁止

- 金属等に対しアレルギーの症状がある人は使用しないこと。
- 装着部に発疹、発赤、かゆみなどの症状が生じた場合や身体に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止すること。
- 小児には使用しないこと。
- 機器は改造しないこと。

【形状・構造及び原理】

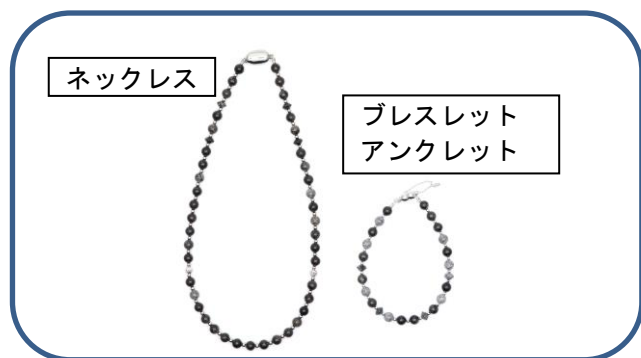

原理：刺激球による皮膚への接触により末梢神経を刺激する非能動型の医療機器。

【使用目的及び効果】


本体に連装される突起のある硬質物が首、腕、足首などの皮膚へ接触することにより、末梢神経を刺激して疼痛緩和などの治療効果を促進させる。

【使用方法等】


- ①ご使用の際には、図①のように「ソレール Solaire」の留め金具にピンを奥までしっかり差し込み、外れないことご確認のうえ、ご使用下さい。

図①：留め金具の使用方法


＜挿しピンタイプ＞

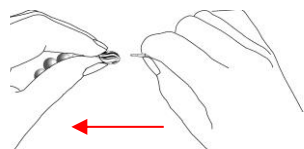

＜磁石吸着タイプ＞

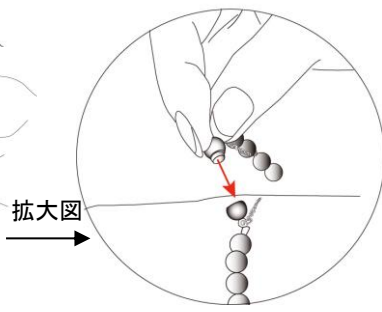


正常使用時の留め金具（しっかり留められた状態）
＜ピンタイプ＞ ＜磁石タイプ＞

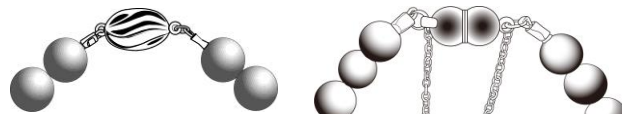

- ②挿しピンタイプの取り外しの際は、下図＜ピンタイプ＞に示す赤丸部分を押さえながらピンを矢印方向へ引くと簡単に外すことができます。また、磁石タイプの取り外しは、下図＜磁石タイプ＞に示す矢印方向へ引くと取りはずせます。

図②：取り外し方法

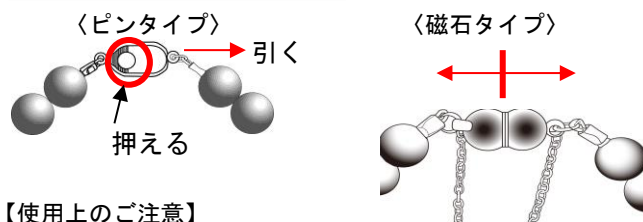

【使用上のご注意】

- ご使用の際は、本書を良く読みご使用下さい。
- ご使用中にかぶれなどの症状が生じた場合、使用を中止して、専門の医師にご相談ください。

【保管方法及び有効期間等】

- 高温・多湿な場所を避け小さなお子様の手が届かない場所へ保管下さい。
- 故障の際は、お買い上げいただいた代理店又は製造販売業者へお申し出下さい。また、ご使用にならなくなった機器は、お住まいの地域の規則に従い廃棄して下さい。

【取扱上の注意】

- 本商品には強い衝撃を与えないで下さい。変形や連装部品が外れてしまうことがありますのでご注意下さい。その際は、必ず修理をご依頼下さい。

【保守点検に係る事項】

- 長期間ご使用ならなかった場合や、ご使用の際には、製品に割れや、欠けなどが無い事をご確認のうえ、ご使用ください。また汚れや、チリなどが付着した場合は柔らかい布等で拭き取ってご使用ください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

■製造販売業者：株式会社加藤商会
住 所：山梨県甲府市住吉 4-6-27
電 話：TEL055-235-2388 FAX055-227-3242
■製造業者：株式会社加藤商会
（連絡先：同上）
販売業者〔販売店〕