

取扱説明書/添付文書

類別：機械器具 80 はり又はきゅう用器具


一般医療機器 一般的名称：非能動型接触鍼（JMDN コード 70613001）

販売名：Dr. バランス (balance)

禁忌・禁止

- 機器は【使用目的又は効果】の示す医療機器としての目的以外のご使用はお止め下さい
- 金属等に対しアレルギーの症状がある人は使用しないこと。
- 装着部に発疹、発赤、かゆみなどの症状が生じた場合や身体に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止すること。
- 他の医療機器との同時使用はしないこと。
- 機器は改造しないこと。

【形状・構造及び原理等】

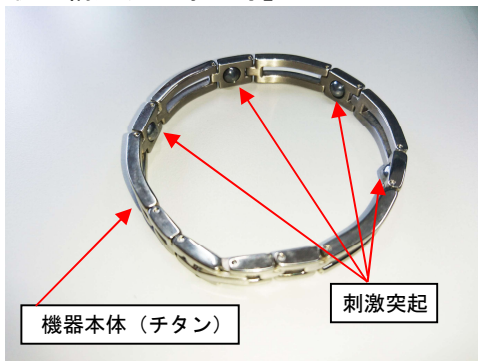

原理：チタン製金属をリング状に連結した本体に配置した刺激突起が皮膚に触れることにより末梢神経を刺激する非能動型の医療機器。


【使用目的又は効果】

突起状の硬質物が装着部の皮膚へ接触することにより、末梢神経を刺激して疼痛緩和の治療効果を促進させる。


【使用方法】

ご使用の際には、留具（フック）を下図のように受け金具へ下から差込んで引き出し折り返し部を抑えてしっかりと留めます。

【中折れフック式留具装着方】

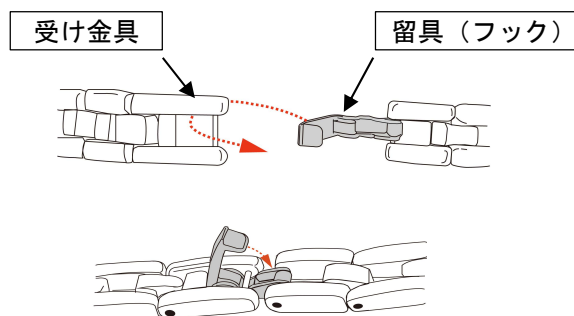


【プッシュ式留具装着方】

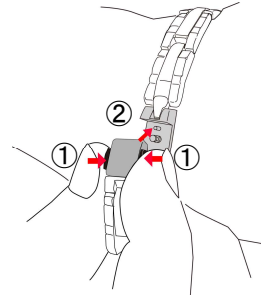

本体の横にある①の押え金具を押しながら②の受け金具に合わせて押し込み固定します。

Dr. バランス (balance) の使用箇所

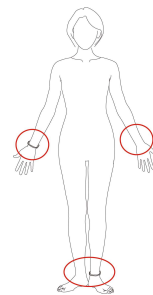

右図の赤丸で示す、手首及び足首に使用いたします。

【使用上の注意】

- ご使用の際は、本書を良く読みご使用ください。
- ご使用中にかぶれなどの症状が生じた場合、使用を中止して、専門の医師にご相談ください。

【保管方法及び有効期間等】

- 高温・多湿な場所を避け、小さなお子様の手が届かない場所へ保管ください。
- ご使用にならなくなった機器は、お住まいの地域の規則に従い廃棄して下さい。
- 故障の際は、お買い上げいただいた代理店又は製造販売業者へお申し出下さい。

【取扱い上の注意】

- 本商品には強い衝撃を与えないで下さい。変形や連装部品が外れてしまうことがありますのでご注意下さい。
- その際は、必ず修理をご依頼ください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- 製造販売業者：株式会社加藤商会
〒400-0851 山梨県甲府市住吉 4-6-27
TEL055-235-2388 FAX055-227-3242
- 製造業者：株式会社加藤商会
(所在地及び連絡先：同上)