

取扱説明書/添付文書

類別：機械器具 80 はり又はきゅう用器具
一般医療機器 一般の名称：非能動型接触鍼（JMDN コード 70613001）
販売名：ジョワ Joie

警告

- 本品は【使用目的又は効果】の示す医療機器としての目的以外のご使用はお止め下さい。
- 本品をご使用の際は、他の医療機器との同時使用はお止め下さい。
- 本品の改造はお止め下さい。

禁忌・禁止

- 小児及び監督を必要とする方の手の届く場所には置かないで下さい。本体より刺激玉の部品が外れ誤って、飲み込む恐れがあります。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師の診断を受け、指示に従って下さい。

【形状・構造及び原理等】

実製品は写真と色・形状が異なる場合がございます。



ネックレスタイプ

ブレスレットタイプ/
アンクレットタイプ


原理：刺激珠による皮膚への接触により末梢神経を刺激する非能動型の医療機器。

【使用目的又は効果】

本体に連装される突起のある硬質物が腕や足首などの皮膚へ接触することにより、末梢神経を刺激して疼痛緩和などの治療効果を促進させる。

【使用方法】

ご使用の際は、図①のように「ジョワ Joie」の留め金具に取付ピンを奥までしっかり差込み、外れないことをご確認のうえ、ご使用下さい。

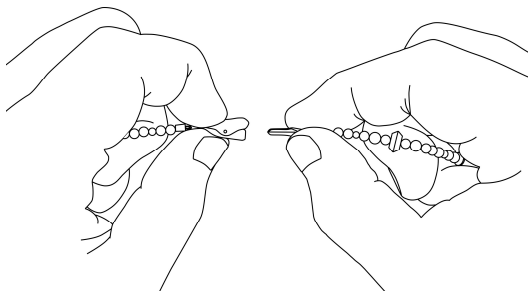


図①：留め金具の使用方法

正常使用時の留め金具



- ②取り外しの際は、留め金具の裏側の図2の赤丸部分を押さえながらピンを赤矢印方向へ引くと簡単に外すことができます。

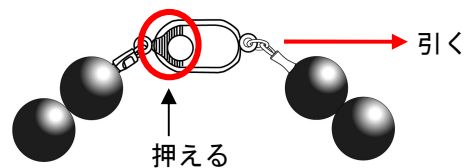

図②：取り外し方法

【使用上の注意】

- ご使用の際は、本書を良く読みご使用ください。
- ご使用中にかぶれなどの症状が生じた場合、使用を中止して、専門の医師にご相談ください。

【保管方法及び有効期間等】

- 高温・多湿な場所を避け、小さなお子様の手が届かない場所へ保管ください。
- 故障の際は、お買い上げいただいた代理店又は製造販売業者へお申し出下さい。また、ご使用にならなかった機器は、お住まいの地域の規則に従い廃棄して下さい。

【取扱い上の注意】

- 本商品には強い衝撃を与えないで下さい。変形や接着部品が外れてしまうことがありますのでご注意ください。その際は、必ず修理をご依頼ください。

【保守点検に係る事項】

- 長期間ご使用にならなかった場合や、ご使用の際は、製品の割れや、欠けなどが無い事を確認の上ご使用下さい。また、汚れや、チリなどが付着した場合は、柔らかい布等で拭き取ってご使用下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- 製造販売業者：株式会社加藤商会
〒400-0851 山梨県甲府市住吉 4-6-27
TEL055-235-2388 FAX055-227-3242
- 製造業者：株式会社加藤商会
(連絡先：同上)