

2019年9月30日 第1版発行

類別：機械器具 77 バイブレーター
 管理医療機器 一般の名称：家庭用電気マッサージ器 (JMDNコード：34662000)
 ライフフィット マッサージャー 3way

【警告】

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

○下記の人は必ず医師と相談のうえ使用してください。

- ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人 ●悪性腫瘍のある人
- 心臓に障害のある人 ●妊娠中や出産直後の人
- 糖尿病などの高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
- 皮膚に創傷のある人 ●安静を必要とする人
- 体温38℃以上(有熱期)の人 (例1：急性炎症症状の強い人(倦怠感、悪寒、血圧変動など) 例2：衰弱しているとき)
- 骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなどの急性疼痛性疾患の人
- 背骨に異常がある人、または背骨が左右に曲がっている人
- けんしょう(腱鞘)炎の人
- 使用しても効果が現れない場合は医師に相談すること
- その他医療機関で治療中の人
- 医師からマッサージを禁じられている人は使用しないでください。
(例：血栓(塞栓)症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など)
症状を悪化させる原因になります。
- 使用前には必ずマッサージ機構部の張地が破れていないか確認してください。また、その他の部分にも破れがないか確認してください。(どんなに小さな破れでも直ちに使用を中止し、ACアダプターを抜き、修理を依頼してください。)
- けがや感電の原因になります。
- 自分で操作できない人に使わせないでください。
事故やけがの原因になります。
- 子供には使用させないでください。
(乳幼児以外の子供で、保護者の監督下で使用する場合を除く。)
- 事故やけがの原因になります。
- 絶対に分解や修理、改造をしないでください。
発火や異常動作によるけがをする原因になります。

【禁忌・禁止】

- マッサージ以外の目的に使用しないでください。また、ひじ、ひざ、頭部、胸部、腹部へは使用しないでください。
事故やけがの原因になります。
- キャスター付きの椅子に座って使用しないでください。
転倒による事故やけがの原因になります。
- 本体内部に金属類や燃えやすいものを入れないでください。
感電やショート、火災の原因になります。
- 使用後はACアダプターをコンセントから抜いてください。
ホコリや湿気で絶縁劣化による漏電火災の原因になります。
- 水などをこぼしたり、ぬれた身体で使用しないでください。
感電やショート、故障の原因になります。
- 浴室など湿度の高い場所で使用しないでください。
感電や故障の原因になります。

【形状・構造及び原理等】

(1) 構成



本製品は背もたれ、座面、もみ玉、エアバッグ、リモコン、ACアダプター等で構成され、肩、背中、腰、骨盤、おしりなどのマッサージを行う。

(2) 本体の寸法及び質量

寸法(寝かせた状態)：幅 約55cm 奥行 約76.5cm 高さ 約18cm
 (起こした状態)：幅 約55cm 奥行 約41cm 高さ 約40cm
 質量：約5.3kg

(3) 電気的定格

- ・本体
 定格 : AC100V 50/60Hz
 定格消費電力：40W
 定格時間 : 20分
 本体入力 : DC24V
- ・ACアダプター
 品番 : IVP2400-2000
 定格入力 : AC100V
 定格入力周波数：50/60Hz
 定格出力電圧 : DC24V
 定格出力電流 : 2A

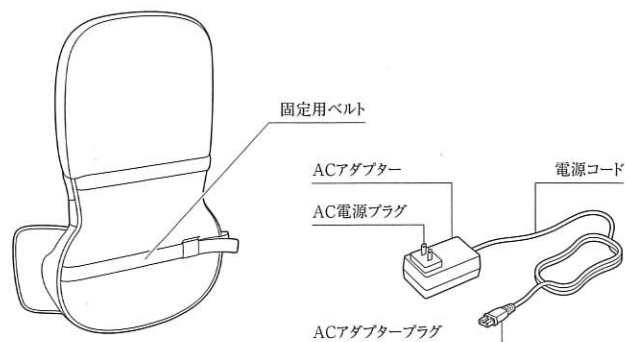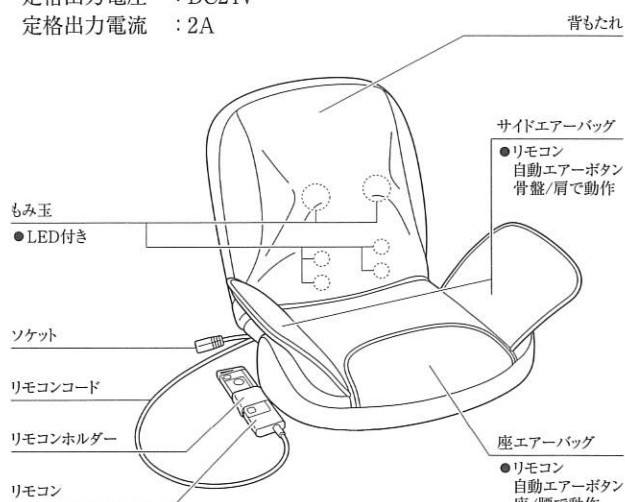

(4) 動作原理

本製品は、背もたれ内部にあるマッサージユニットの「もみモーター」により駆動するもみ玉と座面に組み込まれたエアポンプにより各エアバッグを膨張させマッサージします。付属のACアダプターを接続して使用します。

(5) 性能

もみ機能：速 約25回/分 遅 約18回/分
 圧迫機能：108kPa以下
 タイマー：約15分

【使用目的又は効果】

あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用する。こと。

取扱説明書を必ずご参照ください。

【使用方法等】

(1) 使用前の確認事項

- 取扱説明書の注意事項を確認してください。
- 張地が破けていないことを確認してください。
- ACアダプタープラグとソケット、ACアダプターとコンセントは確実に接続されているか確認してください。
- リモコンの電源ランプが点灯します。
- スイッチが正しく動作することを確認してください。
- はじめはマッサージの動きを確認してから、弱い刺激を短い時間で使用してください。
- しばらく使用しなかった機器を使用するときは、使用前に機器が正常に作動することを確認してください。

(2) マッサージ方法

- ①ACアダプタープラグをソケットに差してください。
(抜け落ちないように確実に接続する)
- ②ACアダプターをコンセントに差してください。
電源ランプが点灯します。
(抜け落ちないように確実に接続する)
- ③もみ自動ボタンを押すと[もみ自動モード]を開始します。
上の2つのもみ玉と下の4つのもみ玉が速度の切り替えと停止を異なる動きでマッサージします。
ボタンを押すごとに[自動Ⅰ][自動Ⅱ][停止]の順番に切り替わります。
自動エアボタンを押すと[自動エアコース]を追加できます。
あらかじめ設定された3種類のコースがあり、ボタンを押すごとに[座/腰][骨盤/肩][全部位][停止]の順番に切り替わります。
[自動エアコース]動作中、エア強さボタンのランプが点灯し、エアバッグの強さを選べます。
ボタンを押すごとに[弱][強]の順番に切り替わります。
もみ手動ボタンでもみ動作の速さを選べます。
ボタンを押すごとに[速][遅][停止]の順番に切り替わります。もみ手動ボタンでもみ動作中に自動エアボタンで[自動エアコース]を追加して複合動作も可能です。また、どちらかの動作を停止させて単独動作に切り替えることもできます。
- ④マッサージを終了したいときは[停止]ボタンを押してください。
- ⑤ACアダプターをコンセントから抜いてください。
- ⑥ACアダプタープラグをソケットから抜いてください。

- オートタイマーについて
使い過ぎや切り忘れを防止するため、動作開始から約15分で自動的に止まります。

【使用上の注意】

- 取り扱いを間違えると不具合を生じることがあります。取扱説明書の安全上のご注意および使用方法を厳守してお使いください。
- ACアダプターは交流100V以外の電源を使用しないでください。
感電や火災の原因になります。
- 1日の使用時間は15分以内にしてください。また一箇所の連続使用は5分以内(エアバッグを除く)にしてください。
逆効果やけがの原因になります。
- 使用中に、身体に異常を感じたときはただちに使用を中止し、医師に相談してください。
事故や体調不良を起こす原因になります。
- 故障が発見された場合は使用をただちに中止し、ACアダプターをコンセントから抜き、お買い上げ販売店またはご相談窓口にて点検、修理を依頼してください。
感電やショート、火災の原因になります。
- 次のようなときは使用しないでください。
 - ・疲労が激しいとき
 - ・酒に酔っているとき
 - ・湿疹が生じているとき体調不良を起こす原因になります。
- 強く押しつけて使用しないでください。
皮膚や筋肉を痛める原因になります。
- フトンの中や、毛布をかぶせて使用しないでください。
火災やモーター温度上昇の原因になります。
- 食前、食後の1時間は使用しないでください。
体調不良を起こす原因になります。

- 肌の弱い人は素肌で使用しないでください。
事故やけがの原因になります。
- 他の治療器具と同時に使用しないでください。
体調不良を起こす原因になります。
- ACアダプターやACアダプタープラグが破損したり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
感電やショート、火災の原因になります。
- 治療部位にアクセサリなどの硬いものをつけて使用しないでください。
機構部に接触してけがの原因になります。
- 落としたり、強い衝撃をあてないでください。
感電やショート、火災の原因になります。
- 二人以上で同時に使用しないでください。
事故やけがの原因になります。
- 付属以外のACアダプターを使用しないでください。
また、付属のACアダプターで他の電気製品を使用しないでください。
事故や故障の原因になります。
- 停電のときはACアダプターをコンセントから抜いてください。
停電復帰時に事故やけがの原因になります。
- ACアダプターを抜くときは電源コードを持たず、必ずACアダプターを持って抜いてください。
感電やショートの原因になります。
- お手入れの際はACアダプターをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手でACアダプターに触れないでください。
感電ややけどの原因になります。

【保管方法及び有効期間等】

- ACアダプターをコンセントから抜いてください。
- 電源コードのねじれをほどいて保管してください。
- 汚れやホコリをとったあと、湿気の少ない所に保管してください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。
- 故障や破損および取扱説明書に記載する異常が認められた場合は使用しないでください。

【保守・点検に係る事項】

- 乾いた布で汚れをふき取ってください。
- シンナー、ベンジン、アルコール、熱湯は使用しないでください。
変色、変形の原因になります。
- 故障が発見された場合はお買い上げ販売店またはご相談窓口にて点検、修理を依頼してください。
- 分解や改造をしないでください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

株式会社ライフフィット

電話：03-6450-0082

外国製造業者

蘇州大科健身器材有限公司

SUZHOU DAITEC EXERCISING MACHINE CO.,LTD.

国名：中華人民共和国