

2019年9月20日 第1版発行

類別：機械器具 77 パイプレーター
管理医療機器 一般の名称：家庭用エアマッサージ器（JMDNコード：34663000）
ライフフィット エアーレッグスリム

【警告】

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

○下記の人は必ず医師と相談のうえ使用してください。

- ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人 ●悪性腫瘍のある人
- 心臓に障害のある人 ●妊娠中や出産直後の人
- 糖尿病などの高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
- 皮膚に創傷のある人 ●安静を必要とする人
- 体温38℃以上（有熱期）の人（例1：急性炎症症状の強い人（倦怠感、悪寒、血圧変動など）例2：衰弱しているとき）
- 骨折しょう症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなどの急性疼痛性疾患の人
- けんしょう（腱鞘）炎の人
- 使用しても効果が現れない場合は医師に相談すること
- その他医療機関で治療中の人
- 医師からマッサージを禁じられている人は使用しないでください。
（例：血栓（塞栓）症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎および皮膚感染症（皮下組織の炎症を含む）など）
症状を悪化させる原因になります。
- 使用前には必ずエアバッグが破れていないか確認してください。
また、その他の部分にも破れがないか確認してください。（どんなに小さな破れでも直ちに使用を中止し、電源プラグを抜き、修理を依頼してください。）
けがや感電の原因になります。
- 自分で操作できない人に使わせしないでください。
事故やけがの原因になります。
- 子供には使用させしないでください。
（乳幼児以外の子供で、保護者の監督下で使用する場合を除く。）
事故やけがの原因になります。
- 絶対に分解や修理、改造をしないでください。
発火や異常動作によるけがをする原因になります。

【禁忌・禁止】

- 足、ふくらはぎ、太もものマッサージ以外の目的には使用しないでください。
事故やけがの原因になります。
- 本体内部に金属類や燃えやすいものを入れないでください。
感電やショート、火災の原因になります。
- 使用後は電源スイッチをOFFにして電源プラグをコンセントから抜いてください。
ホコリや湿気で絶縁劣化による漏電火災の原因になります。
- 水などをこぼしたり、ぬれた身体で使用しないでください。
感電やショート、故障の原因になります。
- 浴室など湿度の高い場所で使用しないでください。
感電や故障の原因になります。

【形状・構造及び原理等】

(1) 構成

本製品は、エアチューブ、エアバッグ等で構成され、足、ふくらはぎ、太もものマッサージを行う。

(2) 本体の寸法及び質量

寸法本体：幅 約21cm 奥行 約21.5cm 高さ 約26cm

エアバッグブーツ（片足）：幅 約33.5cm 奥行 約99cm

質量：約4.4kg（本体 約2.7kg エアバッグブーツ 約1.7kg）


(3) 電気的定格

・本体

定格 : AC100V 50/60Hz

定格消費電力：20W

定格時間 : 20分

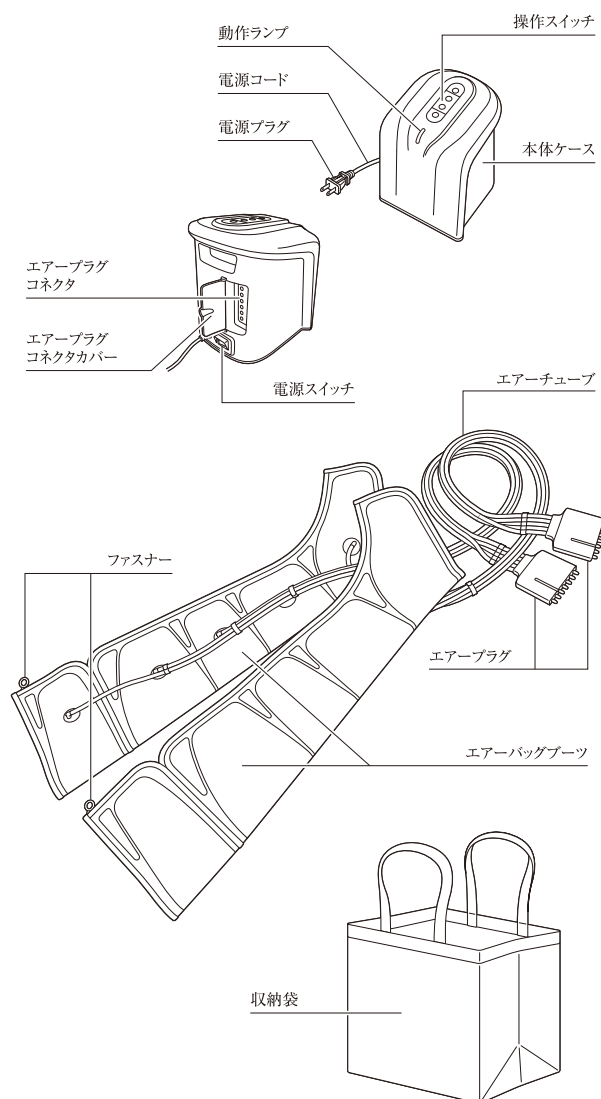

(4) 動作原理

本製品は、本体に組み込まれたエアポンプユニットでエアバッグブーツに収納されているエアバッグを膨脹させ、足、ふくらはぎ、太ももをマッサージします。

(5) 性能

圧迫機能：70kPa以下

タイマー：約15分

【使用目的又は効果】

あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用する。

【使用方法等】

(1) 使用前の確認事項

- 取扱説明書の注意事項を確認してください。
- エアバッグが破けていないことを確認してください。
- エアプラグが確実に接続されているか確認してください。
- 電源プラグが確実に接続されているか確認してください。
- 電源ランプが点灯します。
- スイッチが正しく動作することを確認してください。
- はじめはマッサージの動きを確認してから、弱い刺激を短い時間で使用してください。
- しばらく使用しなかった機器を使用するときは、使用前に機器が正常に作動することを確認してください。

(2) マッサージ方法

- ① 電源プラグをコンセントに差ししてください。
(抜け落ちないように確実に接続する)
- ② 本体背面下の電源スイッチを「ON」にしてください。
電源ランプが点灯します。
- ③ 両脚にエアバッグブーツを装着してください。
- ④ コースボタンを押すと本体上部の動作ランプが点灯してマッサージを開始します。
コースボタンには、[自動][専門]の各コースがあり、ボタンを押すごとに[自動1][自動2][専門1][専門2][専門3]の順番に切り替わります。
強さボタンでエアバッグの強さの設定ができます。
ボタンを押すごとに5段階の設定が可能です。
コースボタン動作中は、太ももボタンで太もものマッサージを追加できます。ボタンを押すごとに[入:点灯][切:消灯]が切り替わります。
- ⑤ マッサージを終了したいときは「停止」ボタンを押してください。
- ⑥ 本体背面下の電源スイッチを「OFF」にしてください。
- ⑦ 電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ⑧ エアプラグをエアプラグコネクタから抜いてください。

- オートタイマーについて
使い過ぎや切り忘れを防止するため、動作開始から約15分で自動的に止まります。

【使用上の注意】

- 取り扱いを間違えると不具合を生じることがあります。取扱説明書の安全上のご注意および使用方法を厳守してお使いください。
- 交流100V以外の電源を使用しないでください。
感電や火災の原因になります。
- 1日の使用時間は15分以内にしてください。
逆効果やけがの原因になります。
- 使用中に、身体に異常を感じたときはただちに使用を中止し、医師に相談してください。
事故や体調不良を起こす原因になります。
- 故障が発見された場合は使用をただちに中止し、電源プラグをコンセントから抜き、エアプラグをエアプラグコネクタから抜いてお買い上げ販売店またはご相談窓口にて点検、修理を依頼してください。
感電やショート、火災の原因になります。
- 次のようなときは使用しないでください。
 - ・疲労が激しいとき
 - ・酒に酔っているとき
 - ・湿疹が生じているとき体調不良を起こす原因になります。
- 強く押しつけて使用しないでください。
皮膚や筋肉を痛める原因になります。
- フトンの中や、毛布をかぶせて使用しないでください。
火災やモーター温度上昇の原因になります。
- 食前、食後の1時間は使用しないでください。
体調不良を起こす原因になります。
- 肌の弱い人は素肌で使用しないでください。
事故やけがの原因になります。
- 他の治療器具と同時に使用しないでください。
体調不良を起こす原因になります。
- 電源コードや電源プラグが破損したり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
感電やショート、火災の原因になります。

- 治療部位にアクセサリなどの硬いものをつけて使用しないでください。
機構部に接触してけがの原因になります。
- 落としたり、強い衝撃をあてないでください。
感電やショート、火災の原因になります。
- 二人以上で同時に使用しないでください。
事故やけがの原因になります。
- 停電のときは電源プラグをコンセントから抜いてください。
停電復帰時に事故やけがの原因になります。
- 電源プラグを抜くときは電源コードを持たず、必ず電源プラグを持って抜いてください。
感電やショートの原因になります。
- エアプラグをエアプラグコネクタから抜くときはエアプラグをひねりながら抜いたり、エアチューブを持って引き抜かず、必ずエアプラグを持って真つすぐ引き抜いてください。
故障や破損の原因になります。
- お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で電源プラグに触れないでください。
感電ややけどの原因になります。
- 付属品は本製品に同梱されたもの以外を使用しないでください。

【保管方法及び有効期間等】

- 電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 電源コードのねじれをほどいて保管してください。
- エアプラグをエアプラグコネクタから抜いてください。
- 汚れやホコリをとったあと、湿気の少ない所に保管してください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。
- 故障や破損および取扱説明書に記載する異常が認められた場合は使用しないでください。

【保守・点検に係る事項】

- 乾いた布で汚れをふき取ってください。
- シンナー、ベンジン、アルコール、熱湯は使用しないでください。
変色、変形の原因になります。
- 故障が発見された場合はお買い上げ販売店またはご相談窓口にて点検、修理を依頼してください。
- 分解や改造をしないでください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元
株式会社ライフフィット
電話：03-6450-0082

外国製造業者
蘇州大科健身器材有限公司
SUZHOU DAITEC EXERCISING MACHINE CO.,LTD.
国名：中華人民共和国