

機械器具(80) はり又はきゅう用器具
一般医療機器 非能動型接触鍼（JMDN コード：70613001）

販売名： アイソメディカルデバイス

【禁忌・禁止】


1. 本製品は使用目的以外に使用しないこと。[誤った使用方法は本製品の破損を招くため]
2. 本製品の加工、改造等は絶対に行わないこと
3. 本製品の使用にあたり、本書に記載されているすべての注意、指示を理解し、遵守して使用すること。
4. 脊椎固定術の手術を受けた方は本製品を使用しないこと。
5. 頸椎前方固定術の手術を受けた方は本製品を使用しないこと。（isoneck アイソネック）
6. 子供や低身長の方でブレード部に適切に首を配置できない場合は使用しないこと。
6. 運動障害や麻痺がある方は、医師に相談の上、使用すること。

【形状・構造及び原理等】

1. 原材料/熱可塑性ポリウレタン
2. 形状・構造等

JN01	isoneck アイソネック
JS01	isospine アイソスパイン

本製品を背骨の前面・背面の下に置いて使用することで、本体の凹凸等が椎間関節等を圧迫し、末梢神経を刺激する。

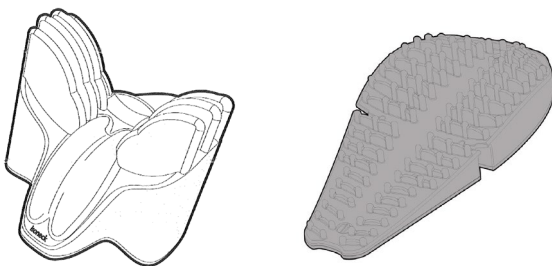

3. 動作原理

本製品を頸椎（isoneck アイソネック）、胸椎・腰椎（isospine アイソスパイン）の下に設置し、ブレードが椎間関節へ接触し、末梢神経を刺激する。

【使用目的又は効果】

本製品は、脊椎の疼痛緩和、他の治療効果を促進するため、皮膚内に挿入せず、皮膚への接触によって末梢神経を刺激する再使用可能な非能動型器具である。

【使用方法等】

- 1) 本品を床等の平らな場所に設置し、その上に仰向けまたはうつ伏せに寝ます。
- 2) 体の重みを利用して背骨に圧力をかけ、刺激します。
- 3) 圧力分散パット等を使用して圧力を調整します。

【使用上の注意】

- 故意に落としたり、叩きつけたりして本製品に衝撃を与えないこと。
- 他の医療機器との併用はしないこと。
- 身体に異常を感じたり、装着部に発疹、発赤、かゆみなどの症状が現れたりしたときは使用を直ちに中止すること。
- 製品の不具合を感じたときは使用を中止すること。

【保管方法及び有効期間等】

高温、多湿、直射日光を避け、適切な場所に保管すること。

【保守・点検に係る事項】

- 水洗いはできるが、汚れが目立つ場合は中性洗剤などで優しくふき取ること。
- 水にぬらした後はよくふき取り乾かしてから使用すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者、製造業者
株式会社マイステック
TEL：03-5656-4209



取扱説明書を必ず参照して下さい。