

機械器具 49 医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器
一般医療機器 歯科用リーマ 31876000

パスファインダー


再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ニッケル及びクロムに対し発疹、皮膚炎などの過敏症の既往症のある患者には、使用しないこと。
- 再使用禁止

【形状、構造及び原理等】

本品は、針部、ハンドル、エンドストップから構成され、針部の全長の異なる2種類がある。ハンドルはオレンジ色で、種類を示す「P」の文字が表示されている。エンドストップは針部全長毎に色別されている。

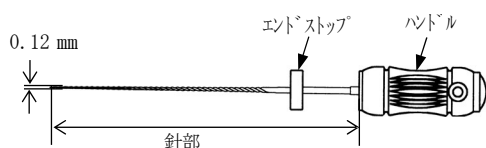

製品番号	針部全長	エンドストップ 色別
17023	21mm	緑
17017	25mm	青

材 質

針部：ステンレス鋼、ハンドル：ポリエチレンイミド樹脂、エンドストップ：シリコン

【保守・点検に係る事項】

- 使用前の点検
変形、損傷、腐食、劣化等がないか確認する。これらがある場合は、使用を中止すること。
- 消毒、滅菌
使用前に、消毒、高圧蒸気滅菌（134℃/6 分、あるいは 121℃/30 分）を実施する。

【保守・点検に関する注意事項】

- 消毒、滅菌には、できるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると、塩素イオンの影響で器具が腐食することがある。
- 薬液消毒を行うときは、薬剤の添付文書に記載された使用上の注意を守ること。薬剤の種類によっては、金属素材に影響を及ぼすことがある。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者氏名：エンピスタジャパン株式会社
製造業者：カー社 (Kerr Corporation)
国名：アメリカ (U.S.A.)

【使用目的又は効果】

本品は、根管へのアクセスを得るほか、根管開口部を拡大するために用いる。

【使用方法等】

- 滅菌、あるいは消毒済みのパスファインダーから治療する根管の状態に合わせて適切な種類を選択する。
- 徐々に根管へ挿入し、根尖部へ到達させる。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- 手用のみで使用し、ハンドピースに装着して使用しないこと。
- 折れたり曲がったりすることがあるので、無理な角度、過度の加圧での使用を避けること。

【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

- 本製品の使用により発疹などの過敏症状が現れた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- 水分、腐食性薬材及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。