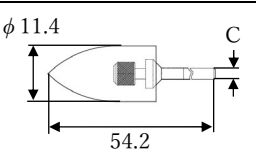
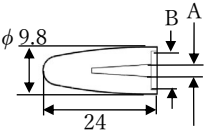
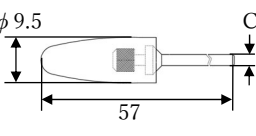


歯科材料（9）歯科用研削材料  
一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 70903000  
**スーパーアクリルポリッシャー**

**【形状、構造及び原理等】**

本製品の作業部形状は 2 種類あり、研磨材粒度は、細かいファイ  
ンと、粗いコースの 2 種類がある。研磨材粒度は作業部の色で識  
別できる。（ファイン：ライトブルー、コース：ダークブルー）  
又、軸無しと軸付きがあり、軸無しはナローフレームのファイン  
のみである。

使用回転数：10,000 回転／分以下。（注水無し）

| 種類                              | 軸無し                                                                                | 軸付き                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| フ<br>レ<br>ー<br>ム                |                                                                                    |   |
| ナ<br>ロ<br>ー<br>フ<br>レ<br>ー<br>ム |  |  |

A :  $\phi$  2.6    B:  $\phi$  8    C :  $\phi$  2.3                      (単位: mm)

材質 作業部: シリコンゴム      軸 部: ステンレススチール  
研磨材: 炭化ケイ素、酸化アルミニウム、ダイヤモンド砥粒

**【保管方法及び有効期間等】**

[保管方法]

- ・日光、水分、腐食性薬材及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。

[有効期間]

- ・60 ヶ月 [自己認証（製造元データ）による]  
使用期限は、包装に記載。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者 : エンビスタジャパン株式会社  
連絡先 : 0800-111-8600  
                  <https://www.envistaco.jp/support>  
製造業者 : スポファデンタル(SpofaDental a.s.)  
国名 : チェコ

**【使用目的又は効果】**

ゴム基材で結合された様々な研磨成分から成る歯科用研磨材。

**【使用方法等】**

歯科用駆動装置及びハンドピース又は歯科技工用回転機器に装  
着し、回転させて、ソフトタッチで断続的に被研削物に押し付け  
て研削、研磨する。

[使用方法に関する使用上の注意]

- 1) 使用回転数を超えた使用の場合には、破損してけがをする  
おそれがあるので、使用回転数を厳守すること。
- 2) ハンドピースメーカーの指定に従ってシャンクを確実に  
奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。
- 3) 折れたり曲がったりすることがあるので、無理な角度、過  
度の加圧での使用は避けること。
- 4) 軸無しは、繰り返しの使用によりマンドレルが抜けやす  
くなるので、使用前に必ず緩みがないか確認すること。

**【使用上の注意】**

[重要な基本的注意]

- ・ 損傷、変形（錆、表面キズ、曲がり、汚染）等のあるものは、  
使用しないこと。
- ・ 安全のために、保護メガネなどを使用すること。