

機械器具（58）整形用機械器具
一般医療機器 歯科インプラント補綴用器具 70722000
デュープリケートデンチャー

H69 E


【禁忌・禁止】

（使用方法）

- ・他社製品と組み合わせて使用しないこと。[相互作用の項参照]

【形状・構造及び原理等】

本品は、無歯顎の患者に使用する義歯の咬合を技工所等にて採得する目的に用いる複製義歯モデルである
（全顎用のみ）

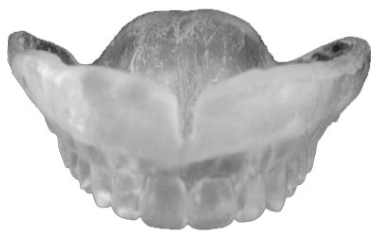

〔製品番号：14751〕

【原理】

本品を咬合器に対合顎模型と共に装着することにより、顎間距離の記録及び対合関係・平行関係などを記録し、咬合採得を行う。

【原材料】

エポキシ系樹脂

【使用目的又は効果】

本品は、歯科インプラント用の義歯の製作に用いる複製義歯モデルである。

【使用方法等】

＜コンピューターベースプランによる手順＞

- (1) ガイデッド・シリンダーを用いてインプラントレプリカをサージカルテンプレートの孔に装着する。
- (2) ガイデッド・アンカーピンとガイデッド・アンカーピンスリーブを組み合わせ、さらにソフトティッシュレプリカを加え、石膏の作業模型を作成する。
- (3) 作業模型にデュープリケートデンチャーを装着して、咬合器に対合顎模型と共に装着し、顎間距離の記録及び対合関係・平行関係などを記録する。
- (4) 咬合採得を行う。
- (5) 対合顎模型上に咬合記録材を一続きに塗布して、顎を咬合させ、サージカルテンプレートとサージカルインデックスを完成する。
- (6) 以降、サージカルテンプレートとサージカルインデックスを用いて通法によりインプラント埋入と補綴操作を行う。

【殺菌・消毒法】

高品質の殺菌・消毒剤（例：0.55W/V% フタラール溶液）を用いて、室温で12分間殺菌・消毒する。滅菌精製水で殺菌・消毒剤を充分洗い流し、加熱しないで素早く乾燥させる。なお、これらの溶液や水に30分以上浸さないこと。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 本品は技工所等にて使用する製品であり、直接患者に使用してはならない。
- (2) 本品を使用する際には、マニュアル等をよく理解した上で、適切な手順に従うこと。
- (3) 患者管理のために、製品番号等をカルテに記載すること。

2. 相互作用

使用禁忌・禁止（専用品以外併用しないこと）

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
他メーカーのインプラントおよび関連部品	磨耗、弛み等が発生する。	形状が異なるため適切な組み合わせが得られない。

【保管方法及び有効期間等】

1. 本品は、品質保持のため高温、湿度、直射日光の当たる場所を避け、室温で清潔な場所にて製品の包装袋に入れて保管すること。
2. 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：エンビスタジャパン株式会社

電話番号：0120-147-118

取扱説明書を必ずご参照ください。

H69 E