

機械器具（34）医療用刀
一般医療機器 歯肉切除メス 41544000

歯肉パンチ

再使用禁止（単回使用）

H68 G

【禁忌・禁止】


（使用方法）

- ・他社製品と組み合わせて使用しないこと。[相互作用の項参照]
- ・再使用禁止


【形状・構造及び原理等】

本品は、使用する他の歯科用インプラント器具に合わせて、下記の二種類がある。

歯肉パンチ

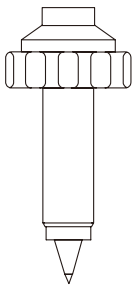

ガイドッド歯肉パンチ

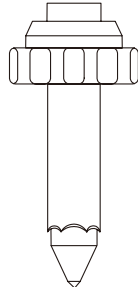

種類	品名	製品番号
歯肉パンチ	歯肉パンチ φ4.1mm（5個）	32Z2000
	歯肉パンチ φ5.2mm（5個）	32Z2002
	歯肉パンチ φ6.2mm（5個）	32Z2004
ガイドッド歯肉パンチ	ガイドッド歯肉パンチ NP（5個）	32Z2006
	ガイドッド歯肉パンチ RP（5個）	32Z2007
	ガイドッド歯肉パンチ 6.0/WP（5個）	32Z2008

【原理】

インプラント手術時、本品の先端をインプラント埋入部位に当て、手動で外筒を回転させることにより歯肉を切除する。

【原材料】

金属部分：ステンレススチール

白色部分：アクリロニトリルスチレンブタジエン樹脂

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用インプラント手術時の歯肉切除に用いる。

【使用方法等】

- (1) 歯科用インプラント埋入部位に先端の突起を当てる。
- (2) 突起の外側にある外筒を下げて手動で回転させ、歯肉を切除する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 本品はエチレンオキシド滅菌されたディスプレイ製であり、再使用・再滅菌はできません。
- (2) 本品の包装を開封したらずちに使用し、使用後は感染防止に留意し安全な方法で処分すること。

2. 相互作用

使用禁忌・禁止（専用品以外併用しないこと）

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
他メーカーのインプラントおよび関連部品	磨耗、弛み等が発生する。	形状が異なるため適切な組み合わせが得られない。

3. 不具合・有害事象

不具合：

本インプラント治療に伴う合併症は下記のものが含まれるが、それだけに限局されるものではない。

- (1) 一時的または長期的な疼痛や腫脹、感覚障害
- (2) 局所的、全身の感染
- (3) 隣接歯への有害な影響、あるいは非可逆的外傷
- (4) インプラント体または補綴物の破折
- (5) インプラント体の脱落

これら不具合・有害事象に対する治療のためにインプラント体の抜去または再手術が必要な場合がある。

【保管方法及び有効期間等】

1. 本品は、品質保持のため高温、多湿、直射日光の当たる場所を避け、室温で清潔な場所に保管すること。
2. 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
3. 本品は、ラベルに記載されている使用期限までに使用すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：エンピスタジャパン株式会社

電話番号：0120-147-118

取扱説明書を必ずご参照ください。

H68 G