

ノーベル洗浄用キット

再使用禁止

H103J


【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、生理食塩水バッグに接続し、歯科の外科手術時に使用する口腔内洗浄用のホースセット及び注水ノズルである。


①ホースセット（オッセオセット100&200 / オッセオケア用）
（品番：32F0128, 32F0128JP）

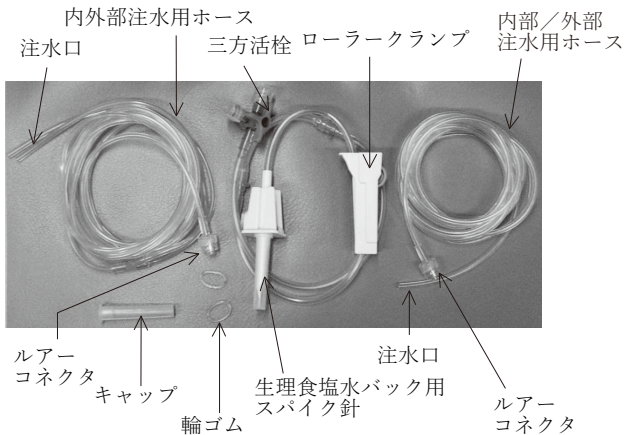

②注水ノズル（手動用）

（品番：32F1004, 32F1004JP）

（外科手術時に補助として使用する注水用ホース）

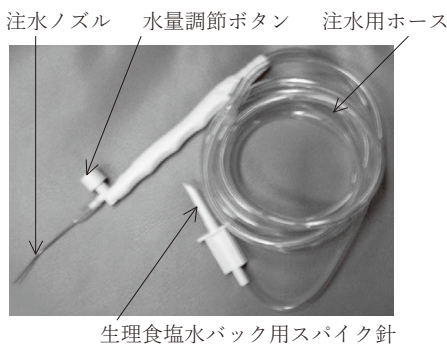

③ホースセット（オッセオセット300用）

（品番：NB04363600）



【原理】

本品は、外科手術時に生理食塩水バッグに接続し、歯科用エンジンを用いて注水し、口腔内を洗浄するための注水用ホース及び注水ノズルである。また、注水により使用器具や患部を冷却する。

【原材料】

ポリ塩化ビニル、ABS、ポリプロピレン、ポリエチレン、PMMA、ステンレススチール、シリコン

【使用目的又は効果】

本品は、創面清掃の目的で処置する部位を洗浄し、歯及び残留充填材等の破片又は壊死性物質及び感染性物質を除去するために歯科治療で使用するよう特別に設計された器具で、歯科用エンジン及びカフを用いて口腔内を洗浄するために使用する。

【使用方法等】

本品のホースセット及び注水ノズルはEOG滅菌済み製品であり、再使用はできない。

①ホースセット（オッセオセット100&200 / オッセオケア用）

1. 生理食塩水バッグを所定の位置に設置する。
2. エンジンユニットのポンプ部にホースをセットする。その方法はエンジンの取扱説明書を参照すること。
3. 内部又は外部注水用ホース若しくは内外部注水用ホースのルアーコネクタ部を三方活栓に接続し、ホースの開放部先端をハンドピースのノズルに接続する。この場合、ホースをハンドピース本体に固定する時は付属の輪ゴムを使用する。
4. 生理食塩水バッグにスパイク針を差し込む。
5. 三方活栓を開く。
6. 内外部注水使用時にどちらかの注水を停止したい場合は、ホースを折り曲げて付属のキャップに差し込む。
7. 注水ノズル（手動用）を併用する場合は三方活栓の空いているルアーコネクタ口に接続する。

②注水ノズル

1. 生理食塩水バッグを入れたカフを所定の位置に設置する。
2. ホースのルアーコネクタ部を接続する。
3. 生理食塩水バッグにスパイク針を差し込む。
4. カフを加圧する。推奨は100～250mmHg。
5. 注水中は定期的に圧の状態を確認し、圧力を調整すること。
6. ボタンを押すと注水が開始され、離すと注水が停止する。
7. オッセオセット100&200 / オッセオケアの注水システムに注水ノズルを使用する場合は、ホースセット（オッセオセット100&200 / オッセオケア用）の三方活栓の空いているルアーコネクタ口に接続する。

③ホースセット（オッセオセット300用）

1. 生理食塩水バッグを所定の位置に設置する。
2. エンジンユニットのポンプ部にホースセットをセットする。その方法はエンジンの取扱説明書を参照すること。
3. ホースの開放部先端をハンドピースのノズルに接続する。
4. 生理食塩水バッグにスパイク針を差し込む。
5. 本品は外部注水用のため、内部注水を行う場合はホースの先端部に、エンジンに付属のYスプレー・ノズルを接続して使用する。

取扱説明書を必ずご参照下さい。

【使用上の注意】

1. 本品のホースセット及び注水ノズルはディスポーザブル製品であるため、1人の患者に1回限りの使用のみで、再使用しないこと。
2. ホースのねじれや閉塞は生理食塩水の漏洩の原因となるため、ホースを正しく機器に取り付けるようにし、取付け後は異常のないことを確認すること。
3. 使用が終了した本品は感染の危険があるものとして取り扱うこと。また各施設の廃棄基準に従って処理すること。

* 【保管方法及び有効期間等】

(保管方法)

1. 本品は、品質保持のため高温、多湿、直射日光の当たる場所を避け、室温で清潔な場所に保管すること。
2. 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
3. 本品は、ラベルに記載されている使用期限までに使用すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：エンピスタジャパン株式会社

電 話 番 号：0120－147－118