

機械器具（55）医療用洗浄器  
一般医療機器 歯科用口腔洗浄器 12304020

## オッセオケア 洗浄用キット

再使用禁止


H149 E

### 【禁忌・禁止】 再使用禁止

### 【形状・構造及び原理等】

本品は、生理食塩水バッグに接続し、歯科の外科手術時に歯科用電気回転駆動装置や電動式骨手術機械である歯科用エンジンを用いて口腔内を洗浄するために用いる注水用のホースセットであり、注水により使用器具や患部を冷却する。

#### 1．イリゲーションチューブ（製品番号：1500984-010）

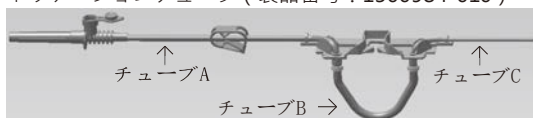

#### 2．イリゲーションチューブKM（製品番号：1501635-010）



#### 3．付属品：KMリング（製品番号：1501621-010）



### <原理>

本品は、外科手術時に生理食塩水バッグに接続し、歯科用電気回転駆動装置や電動式骨手術機械である歯科用エンジンを用いて注水し、口腔内を洗浄するための注水用ホースである。また、注水により使用器具や患部を冷却する。

### 【原材料】

ABS樹脂、ポリ塩化ビニル、シリコーンゴム、ポリエチレン

### 【使用目的又は効果】

本品は、創面清掃の目的で処置する部位を洗浄し、歯及び残留充填材等の破片又は壊死性物質及び感染性物質を除去するために歯科治療で使用するよう特別に設計された器具で、歯科用エンジン及びカフを用いて口腔内を洗浄するために使用する。

### 【使用方法等】

本品はEOG滅菌済み製品であり、再使用はできない。

1. 生理食塩水バッグを所定の位置に設置する。
2. 本品を慎重に滅菌袋から取り出す。
3. 歯科用エンジンのポンプ部に本品のチューブBをセットする。その方法は各歯科用エンジンの取扱説明書を参照すること。
4. 本品のチューブC又はチューブDの先端を歯科用エンジンのハンドピース等に接続する。イリゲーションチューブKMはチューブDを付属品にも接続してハンドピース等に取り付ける。
5. チューブAのクランプを閉じてキャップを外し、スパイク針を生理食塩水バッグに差し込む。
6. チューブAのクランプを開き、歯科用エンジンを操作して患部への注水・洗浄を行う。
7. イリゲーションチューブKM使用時にチューブDのどちらかの注水を停止したい場合には、そのチューブのクランプを閉じる。
8. 使用終了後は全てのクランプを閉じ、歯科用エンジン及びハンドピース等から本品を取り外し、本品及び生理食塩水バッグは、感染に注意して廃棄する。

### 【使用上の注意】

1. 本品はディスポーザブル製品であるため、1人の患者に1回限りの使用のみで、再使用しないこと。
2. チューブのねじれや閉塞は生理食塩水の漏洩の原因となるため、チューブを正しく機器に取り付けるようにし、取付け後は異常のないことを確認すること。
3. 本品は清潔な手または手袋を用いて取り扱うこと。
4. 本品の使用に当たっては機器の取扱説明書を熟読し、正しく取り付けて使用すること。
5. 使用が終了した本品は感染の危険があるものとして取り扱うこと。また各施設の廃棄基準に従って処理すること。

### \*【保管方法及び有効期間等】

#### （保管方法）

1. 本品は、品質保持のため高温、多湿、直射日光の当たる場所を避け、室温で清潔な場所に保管すること。
2. 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
3. 本品は、ラベルに記載されている使用期限までに使用すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：エンビスタジャパン株式会社

電話番号：0120-147-118

取扱説明書を必ずご参照ください。

H149 E