

歯科材料（2） 歯冠材料
管理医療機器 歯科インプラント用上部構造材 70819000

プロセラ コーピング ジルコニア

再使用禁止

H70 F


【禁忌・禁止】

（使用方法）

- ・他社製品と組み合わせて使用しないこと。[相互作用の項参照]
- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、白色のジルコニアセラミックス粉末を焼結により一体形成した固体です。

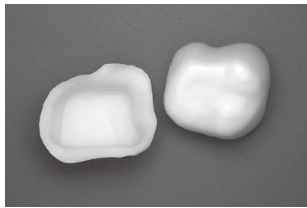

【原材料】

ジルコニアセラミック

【使用目的又は効果】

本品は外表面に歯科用陶材（ポーセレン）を築盛し、支台歯（自然歯又はアバットメント）に連結することで歯冠部分を補綴修復するための陶歯の中間構造体となるコーピングである。

【使用方法等】

1. 通法に従い、技工作業用の模型を作成する。
2. 本品を模型に連結し、研削器具を用いて必要に応じて高さや厚み、マージンなどを調整する。
3. 通法に従い、模型上において咬合や隣接歯との色調を考慮してポーセレンを築盛する。
4. 作製した補綴物を支台歯にセメントで固定する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1)本品は、ノーベル バイオケア社製品専用のコンポーネント類であるため、他社製品と併用しないこと。
- (2)本品は、ノーベル バイオケア社製インプラント手術用器械器具と共に使用すること。
- (3)本品は、高温・多湿を避け、清潔な場所に保管すること。

2. 相互作用

使用禁忌・禁止（専用品以外併用しないこと）

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
他メーカーのインプラントおよび関連部品	磨耗、弛み等が発生する。	形状が異なるため適切な組み合わせが得られない。

3. 不具合・有害事象

不具合：

本インプラント治療に伴う合併症は下記のものが含まれるが、それだけに限局されるものではない。

- (1)一時的または長期的な疼痛や腫脹、感覚障害
- (2)局所的、全身的感染
- (3)隣接歯への有害な影響、あるいは非可逆的外傷
- (4)インプラント体または補綴物の破折
- (5)インプラント体の脱落

これら不具合・有害事象に対する治療のためにインプラント体の抜去または再手術が必要な場合がある。

【保管方法及び有効期間等】

1. 本品は、品質保持のため高温、多湿、直射日光の当たる場所を避け、室温で清潔な場所に保管すること。
2. 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

* 製造販売元：エンビスタジャパン株式会社

電話番号：0120-147-118

製造元：Nobel Biocare ProCera, LLC

国名：アメリカ合衆国

取扱説明書を必ずご参照ください。

H70 F