

機械器具58 整形用機械器具

管理医療機器 歯列矯正用アタッチメント 41059000

スピリット MB


再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 本合金、類似成分の合金又は配合成分に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- 再使用禁止


【形状・構造及び原理等】

・スピリット MB

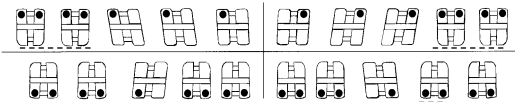

部位	トルク	アンギュレーション	商品番号			
上顎			.018L	.018R	.022L	.022R
中切歯	+14°	+5°	494-0111	494-0110	495-0111	495-0110
中切歯	+22°	+5°	494-0121	494-0120	495-0121	495-0120
側切歯	+7°	+8°	494-0211	494-0210	495-0211	495-0210
側切歯	+14°	+8°	494-0221	494-0220	495-0231	495-0230
側切歯-フック付	+7°	+8°	494-1211	494-1210		
犬歯	0°	+10°	494-0301	494-0300	495-0301	495-0300
犬歯	+7°	+10°	494-0321	494-0320		
犬歯-フック付	0°	+10°	494-1301	494-1300	495-1301	495-1300
犬歯-フック付	+7°	+10°	494-1321	494-1320		
小臼歯	-7°	0°	494-0514/左右共通	495-0514/左右共通		
小臼歯	0°	0°	494-0506/左右共通	495-0506/左右共通		
小臼歯-フック付	-7°	0°	494-1514/左右共通	495-1514/左右共通		
小臼歯-フック付	0°	0°	494-1506/左右共通	495-1506/左右共通		
下顎			.018L	.018R	.022L	.022R
切歯	-1°	0°	494-0025/左右共通	495-0025/左右共通		
犬歯	-7°	+6°	494-0411	494-0410	495-0411	495-0410
犬歯	+7°	+5°	494-0421	494-0420		
犬歯-フック付	-7°	+6°	494-1411	494-1410	495-1411	495-1410
犬歯-フック付	+7°	+5°	494-1421	494-1420		
第1小臼歯	-11°	0°	494-0615/左右共通	495-0615/左右共通		
第1小臼歯-フック付	-11°	0°	494-1615/左右共通	495-1615/左右共通		
第2小臼歯	-17°	0°	494-0725/左右共通	495-0725/左右共通		
第2小臼歯-フック付	-17°	0°	494-1725/左右共通	495-1725/左右共通		

・アレキサンダー スピリット MB

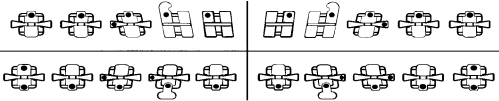

部位	トルク	アンギュレーション	製品番号	
上顎			.018L	.018R
中切歯	+14°	+5°	494-0111	494-0110
側切歯-フック付	+7°	+8°	494-1211	494-1210
犬歯	-3°	10°	494-3311	494-3310
小臼歯	-7°	0°	494-3514/左右共通	
下顎			.018L	.018R
中切歯	-5°	0°	494-3055/左右共通	
側切歯-フック付	-5°	+6°	494-3063	494-3062
犬歯	-7°	+6°	494-3343	494-3342
第1小臼歯	-11°	0°	494-3615/左右共通	
第2小臼歯	-17°	0°	494-3725/左右共通	

・フェイスペイント：

部位	中切歯	側切歯	犬歯	小臼歯
上顎	ブルー	レッド	グリーン	オレンジ
下顎	レッド	レッド	パープル	ピンク

原材料：ブラケット-ホリカー-ネット

スロット部分-ステンレス鋼:Cr16.00～18.00%,Ni6.00～8.00%,
その他(C,Mn,P,S,Si),Fe 残余

【使用目的又は効果】

歯又は他の器材に付けて矯正力を付与するために用いる。

【使用方法等】

- 患者に合ったブラケットを選択する。
- ダイレクトボンド用接着材の使用 방법에従い、ブラケットを歯面に接着固定する。
- 接着材が十分に硬化した後、スロット部にワイヤー（矯正用線）を通す。
- 金属製結紮線、エラストックモジュール等を用い、ブラケットにワイヤーを固定する。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 油脂等により、適切な接着力が得られなくなるので、ボンディングベースを直接手でさわらないこと。
- 接着材が十分に硬化してからワイヤーを装着すること。
- 90℃以上に加熱すると品質が低下するので、加熱タイプの接着材は使用しないこと。

【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

- 本製品の使用により発疹などの過敏症状が現れた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- 使用されるダイレクトボンド用接着材の種類、接着手順の不備等によっては接着中に脱落することがあるので、脱落した場合は、直ちに医師の診断を受けさせること。

【不具合・有害事象】

有害事象
掌蹼膿疱症、扁平苔癬、皮膚炎などの歯科金属疹（遅発性金属アレルギー疾患）を発症することがあります。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

水分、腐食性薬材及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。

【耐用期間】

製造から5年間[自己認証（製造元データ）による]

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者氏名：カボデンタルシステムズ株式会社
連絡先：03-6859-0065
製造業者：オーム公社(Ormco Corporation)
国名：アメリカ (U.S.A.)