

機械器具 58 整形用機械器具
管理医療機器 歯列矯正用エラスチック器材 38733000
パワーチェーン

再使用禁止


【禁忌・禁止】

再使用禁止

【使用方法等】

- 患者に適した種類、長さ（リング数）を選択する。
- 歯牙に装着した歯列矯正装置に取り付ける。

【形状・構造及び原理等】

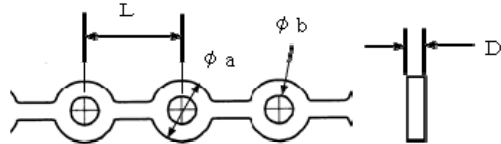

（単位：mm）

種類	リンク 外径 (a)	リンク 内径 (b)	リンク間 距離 (L)	リンク 厚さ (D)	色調
パワーチェーンⅠ	2.8	1.3	4.4	0.7	クリア グレー
パワーチェーンⅡ	2.8	1.3	3.4	0.7	クリア グレー
パワーチェーン ジェネレーションⅡ クロス	2.7	1.3	2.8	0.5	クリア グレー
パワーチェーン ジェネレーションⅡ オープン	2.8	1.3	3.4	0.5	クリア グレー
パワーチェーン ジェネレーションⅡ ホワイト	2.8	1.3	4.4	0.5	クリア グレー
カラー パワーチェーン クロス	2.7	1.2	2.8	0.7	別表
カラー パワーチェーン オープン	2.8	1.3	3.4	0.7	別表
デモン タイバック モジュール サイズ 1	3.0	1.3	6.1	0.5	クリア グレー
デモン タイバック モジュール サイズ 2	3.0	1.3	8.6	0.5	クリア グレー

カラー パワーチェーン 色調

ピンク、パープル、ブラック、グリーン、レッド、ブルー、オレンジ、イエロー、ホワイト、テール、ローズ、バイオレット、エマルトグリーン、シルバー、ジェイト、ルビー、メタリックブルー、マロン

原材料：ポリウレタン系熱可塑性エラストマーポリエステルタイプ、色素

【使用目的又は効果】

歯列矯正装置と併用し、歯列矯正装置による歯牙の移動、保持に用いる。

【使用上の注意】

〔重要な基本的注意〕

- 本製品の使用により発疹などの過敏症状が現れた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

【保存方法及び有効期間等】

〔貯蔵、保管方法〕

- 高温多湿を避けて室温で保管すること。

〔有効期間〕

- カラーパワーチェーン、パワーチェーンⅠ/Ⅱ 30 ヶ月（ピンクのみ 20 ヶ月）
ジェネレーションⅡ、デモンタイバックモジュール 36 ヶ月〔自己認証（製造元データ）による〕
使用期限は、スプール内面、包装に記載

*
**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者氏名：エンビスタジャパン株式会社
製造業者：オームコ社 (Ormco Corporation)
国名：アメリカ (U. S. A.)