

機械器具 58 整形用機械器具
管理医療機器 歯列矯正用結さつ材 41677000
リガチャー ワイヤー

再使用禁止


【禁忌・禁止】

- ・ 本合金、類似成分の合金又は配合成分に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- ・ 再使用禁止


【形状・構造及び原理等】

形状：


- ・ プリフォームド リガチャー ワイヤー
- ・ テフロンコーテッド リガチャー ワイヤー

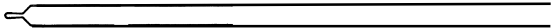


- ・ ミニツイステッド リガチャー タイ

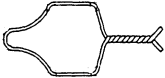

- ・ コバヤシ タイ フック

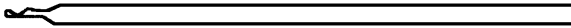

- ・ ミニツイステッド コバヤシ タイ フック
- ・ トゥースカラー コバヤシ タイ フック

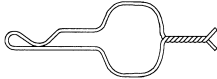

原材料：

- ・ ステンレス鋼
Cr 17.0～19.0%, Ni 8.0～10.0%,
その他 (C, Mn, P, S, Si) 5% 以下, Fe 残余
- ・ コーティング
テフロンコーテッド リガチャー ワイヤー：ETFE (テトラフルオロエチレン・エチレン共重合物)
トゥースカラー コバヤシ タイ フック：PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)

種類：

名称	ワイヤー径 mm (インチ)	製品番号
プリフォームド リガチャー ワイヤー	0.23(0.009)	270-0009
	0.25(0.010)	270-0010
	0.28(0.011)	270-0011
	0.30(0.012)	270-0012
テフロンコーテッド リガチャー ワイヤー	0.30(0.012)	272-0012 芯 0.20(0.008)
	0.20(0.008)	
ミニツイステッド リガチャー タイ	0.20(0.008)	270-0000
	0.25(0.010)	270-0001
コバヤシ タイ フック	0.30(0.012)	271-0012
	0.36(0.014)	271-0014
	0.41(0.016)	271-0016
ミニツイステッド コバヤシ タイ フック	0.30(0.012)	271-0000
	0.36(0.014)	271-0001
トゥースカラー コバヤシ タイ フック	0.41(0.016)	271-0006 芯 0.30(0.012)
	0.30(0.012)	

【使用目的又は効果】

歯列矯正に用いる結紮線である。

【使用方法等】

1. 歯列矯正用ブラケットに矯正用ワイヤーを装着する。
2. リガチャー ワイヤーのループをブラケットのタイウイングに装着し、矯正用ワイヤーがブラケットのスロットからはずれないように、プライヤーで結紮する。
3. 余分なリガチャーワイヤーをカッターで切断する。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

本製品の使用により発疹などの過敏症状が現れた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

[不具合・有害事象]

有害事象

掌蹠膿疱症、扁平苔癬、皮膚炎などの歯科金属疹（遅発性金属アレルギー疾患）を発症することがあります。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

水分、腐食性薬材及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。

**[有効期間]

製造から 5 年間[自己認証（製造元データ）による]

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者氏名：エンピスタジャパン株式会社
製造業者：オーム公社(Ormco Corporation)
国名：アメリカ (U.S.A.)