

機械器具 (65) 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用充填・修復材補助器具 38782000
(歯科治療用ピンセット 31814000)

アプリケーション システム


再使用禁止 (ホルダーは除く)

【禁忌・禁止】


- ホルダーはニッケル及びクロムを含有しているため、ニッケル及びクロムに対し発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある医療関係者、及び患者には使用しないこと。
- 再使用禁止 (ホルダーは除く)

【形状・構造及び原理等】


・ マイクロブラシ

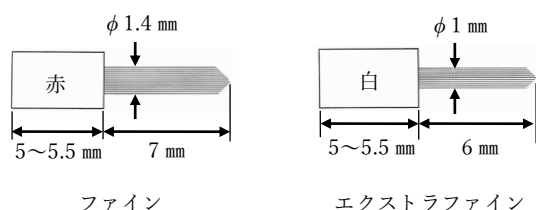

・ マイクロアプリケーションター

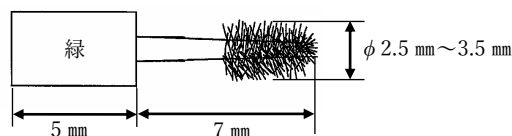

ホルダー (製造販売届出番号 : 27B1X00149100200)

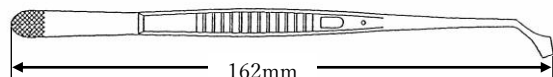

材質

マイクロブラシ : ポリアミド (PA)

マイクロアプリケーションター : ポリアミド (PA)

ホルダー : ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

口腔内で主に液体状の充填材、又は修復材を適用するために用いる。

【使用方法等】

ホルダーで、マイクロブラシあるいはマイクロアプリケーションターを保持し、充填材あるいは修復材を適用する。

【使用上の注意】

- ホルダーは使用前に必ず洗浄・滅菌 (保守点検に係わる事項参照) を行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- 直射日光、水分、腐食性薬材及びその蒸気の暴露を避けて、外圧 (物理的負荷) 及び汚染を受けないように保管すること。

[有効期間]

- 60 ヶ月 [自己認証 (製造元データ) による]
使用期限は、包装に記載。

【保守・点検に係る事項】

ホルダーのみ適用

- 使用前・使用後の点検
破損、ヒビ、キズ、腐食等がないか確認すること。これらがある場合は、使用を中止すること。
- ホルダーの洗浄・消毒・滅菌
 - 使用後は、精製水を用いて速やかに洗浄する。
 - 本製品は超音波洗浄器、薬液消毒が可能。
 - 高圧蒸気滅菌 (134°C、3分間) を実施する。

[保守・点検に関する注意事項]

- 洗浄、消毒、滅菌には、できるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると、塩素イオンの影響で器具が腐食することがある。
- 薬剤消毒を行うときは、薬剤の添付文書に記載された使用上の注意を守ること。薬剤の種類によっては、金属素材に影響を及ぼす事がある。
- 加熱滅菌器の乾燥湿度には注意すること。高温の乾燥は、器具が変質または変色することがある。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者氏名 : カボンタルシステムズ株式会社

連絡先 : 03-6866-7272

製造業者 : カー・ハーヴェ社 (KerrHawe SA)

国名 : スイス (Switzerland)