

機械器具 55 医療用洗浄器
一般医療機器 洗浄針 70459000

イリゲーション プローブ


再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・ ニッケル及びクロムに対し発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある医療関係者、及び患者には使用しないこと。
- ・ 再使用禁止

【形状、構造及び原理等】

本品は、側面に穴があり刃先を有しない針で、針基及び針管から構成され、針管にはプロテクターが付いている。針管は 4 種類の太さがあり、太さはカラーコードで識別できる。

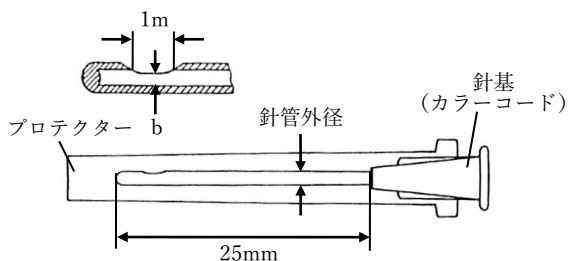

針基形式：ISO 594-1 めす(雌)6%(Luer)円錐フィッティング

製品番号	ゲージ	針管外径 (mm)	b (mm)	カラーコード
502	21G	0.8	0.45	グリーン
503	23G	0.6	0.35	ブルー
504	25G	0.5	0.30	オレンジ
505	30G	0.3	0.18	イエロー

原材料

針管：ステンレス鋼
針基：ポリプロピレン

【使用目的又は効果】

刃先を有しない針で、口腔、歯髄腔、根管など各部の洗浄や歯科外科手術中の洗浄に用いる。

【使用方法等】

1. 必要に応じて手袋を着用する。
2. 包装から取り出し、プロテクターが付いた状態でシリンジにしっかり装着する。
3. プロテクターをまっすぐ引いて外し、使用する。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) 感染を防ぐため、針管には直接手を触れないように注意すること。
- 2) 破損や液漏れすることがあるため、針管及び針基に過度な負荷をかけないこと。

- 3) 予め接続部に緩み、外れないことを確認してから使用すること。また使用中は定期的に破損、緩み、液漏れ等がないか十分確認すること。
- 4) 針管が折れる可能性があるため反復折り曲げは行わないこと。
- 5) 接液部を汚染させないこと。

【使用上の注意】

〔重要な基本的注意〕

- 1) 組織を損傷させる可能性があるため、高圧洗浄はしないこと。
- 2) 本品は刃先がないので注射には使用しないこと。
- 3) 開封したらすぐに使用し、使用後はプロテクターを装着し、感染防止に留意して安全な方法で処分すること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

〔有効期間〕

- ・ 60 ヶ月 [自己認証 (製造元データ) による]
- 使用期限は、包装に記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者氏名 : カボデンタルシステムズ株式会社
連絡先 : 03-6866-7272
製造業者 : カー・ハーヴェ社 (KerrHawe SA)
国名 : スイス (Switzerland)