

機械器具 16 体温計

管理医療機器 皮膚赤外線体温計 17888000



非接触赤外線体温計 EZIS TEMP

【禁忌・禁止】

- ・測定結果による自己診断や治療はしないでください。医師の指導に従ってください。
- ・測定センサー部は汚れたまま使用しないでください。測定誤差が生じる要因になります。
- ・乳幼児の手の届かないところに保管してください。また、子供だけで使わせないでください。けがのおそれがあります。

【形状、構造及び原理等】

1. 各部の名称

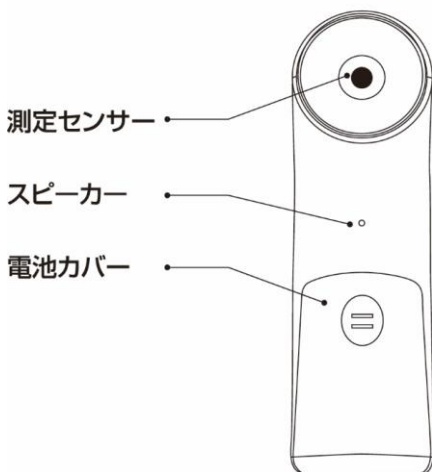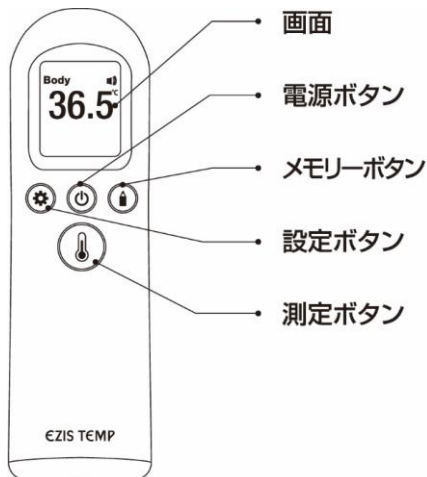

2. 構成

本体
保管用ケース
取扱説明書

3. 本体寸法及び重量

寸法: 高さ 140×厚さ 42×幅 40.5mm
重量: 約 60g(電池を含まず)

4. 動作原理

対象物から放射される赤外線をサーモパイルセンサーで捉え、温度に変換します。こめかみから1～3cm離れたところで測定した表面温度を舌下で測定した体温に換算します。

5. 電氣的定格

電源: DC3V(単 4 形乾電池 2 本)
電撃保護: 内部電源機器 BF 形装着部
消費電力: 0.05W
防塵防水保護等級: IP00

6. 性能及び安全性に関する規格

- (1) 測定範囲
体温: 32℃～42.9℃
- (2) 測定精度
体温測定時:
±0.2℃(35℃～42℃の場合)
±0.3℃(上記以外の場合)
- (3) 最小表示単位 0.1℃
- (4) 測定範囲外告知
体温測定時、32℃未満のときは「Lo」を表示、
42.9℃を超えるとときは「Hi」を表示する
- (5) 使用環境条件 16℃～40℃ 95%RH 以下(結露なきこと)
- (6) 低電圧時の動作
2.6±0.1V でも機器は作動し、低電圧警報が画面に表示される

【使用目的又は効果】

体表面上の皮膚の体温を測定するために用いること。

【使用方法等】

1. 電源ボタンを押して電源を入れる。
2. 体温測定モードになっていることを確認する。
体温測定モードの場合、画面に「Body」という文字が表示され、画面全体の色は緑になっている。
測定モードは設定ボタンを短く押すことで切り替わる。
3. 測定ボタンを押す。
こめかみから1～3cm離すようにして本体を持ち、「ピー」という測定終了の音が鳴るまで体温計とこめかみの位置を動かさないようにする。
4. 画面上に表示された測定結果を確認する。
5. 画面に「OFF」が表示されるまで、電源ボタンを押す。
60 秒以上使用していない場合、自動的に電源が切れる。

詳細については、取扱説明書をよくお読みください。

取扱説明書を必ずご参照ください。

【使用上の注意】

1. こめかみ部で測定してください。
2. あらかじめ測定部位におけるご自身の平熱を把握しておいてください。
3. 周辺温度が 16℃～40℃の環境で使用してください。
4. 運動後や入浴後は、30 分以上経ってから測定してください。
5. 汗や髪の毛、化粧等により、測定結果に精度を欠く場合があります。
6. 本製品の保管場所と使用場所の温度差が大きい場合は、使用環境に 30 分以上放置してから測定してください。
7. 測定センサー部を傷つけないようにしてください。
8. 本体を水につけないでください。
9. 画面に電池交換マークが表示されたら、新しい電池と交換してください。
10. 電池や電池カバーは乳幼児の手の届かないところに置いてください。

【保管方法及び有効期限等】

1. 保管方法
 - ・ 高温・高湿・直射日光は避けてください。
保管環境条件： -20℃～+50℃、
95%RH 以下（結露なきこと）
 - ・ 長期間使用しない場合は電池を取り外してください。電池の液漏れが起こる可能性があります。
2. 耐用期間
測定回数 5,000 回以上
[自己認証(当社データ)による]

【保守・点検に係る事項】

1. 測定センサー部が汚れた場合は、アルコール綿又はアルコールで湿らせた綿棒を使用し、優しく拭いてください。
2. 本体はやわらかくてきれいな布で拭いてください。
3. 本製品は防水構造ではないため、水洗いはしないでください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 KAVAS JAPAN

埼玉県川口市芝高木1-12-2

製造業者 十和田オーディオ株式会社

秋田県鹿角郡小坂町小坂字大稲坪 98 番地