

機械器具 18 血圧検査又は脈波検査用器具
一般医療機器 アネロイド式血圧計 16156000

BS ディスポーザブル血圧計カフ シリーズ F

再使用禁止


【禁忌・禁止】

1. 点滴を行っている部位にカフを装着しないこと。
2. カフのコネクタを他のラインに接続しないこと。
3. 非観血血圧測定以外に使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

本品は、アネロイド血圧計の他、医用電子血圧計、多項目モニタ、非観血血圧モジュール等、非観血血圧計に使用する。

<形状・構造>

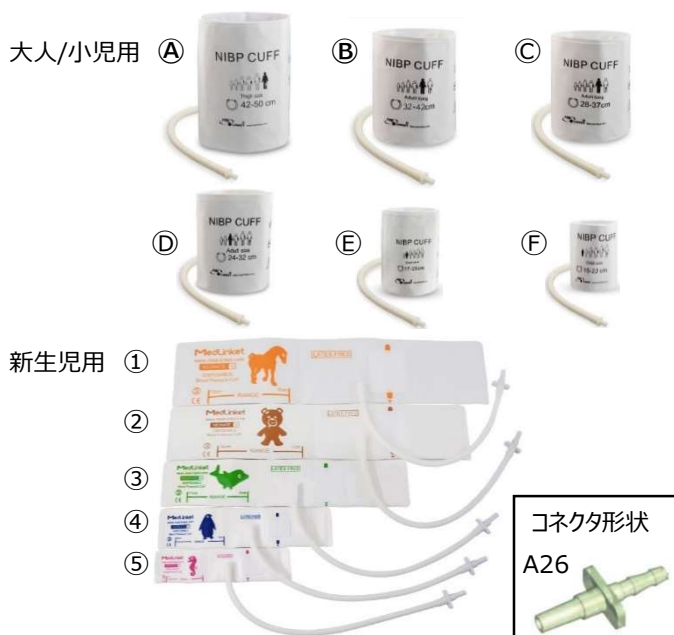

	適応サイズ	適合周長 cm	製品番号	仕様
A	大人/肢	42-50	Y000DT1	大人/小児用 ディスポーザブル シングルチューブ ラテックスフリー DEHP フリー
B	大人/太	32-42	Y000DLA1	
C	大人/長	28-37	Y000DAL1	
D	大人	24-32	Y000DA1	
E	大人/小	17-25	Y000DSA1	
F	小児	15-22	Y000DC1	
1	新生児-#5	8-15	Y000DSN1-5	新生児用 ディスポーザブル シングルチューブ ラテックスフリー DEHP フリー
2	新生児-#4	7-14	Y000DSN1-4	
3	新生児-#3	6-11	Y000DSN1-3	
4	新生児-#2	4-8	Y000DSN1-2	
5	新生児-#1	3-6	Y000DSN1-1	

<作動原理>

本品は、カフ内部のブラダに空気圧を加圧することにより動脈を圧迫し、また減圧することにより動脈を開放し、非観血式血圧測定を行なう。

【使用目的又は効果】

<使用目的>

本品は非観血血圧計に接続して患者の腕周りに巻きつけ、加圧・減圧により非観血血圧を測定するディスポーザルカフである。

【使用方法等】

1. 患者の上腕から肘の間にカフを巻きつける。
2. 「ARTERY」矢印マークが上腕の動脈線上来るようにする。
3. 巻きつけたカフの端が「RANGE」の範囲内であることを確認する。範囲内でない場合はサイズが合っていないので他のサイズに交換する。
4. 測定終了後、カフを腕から取り外す。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

1. 強く巻かないこと〔血流を阻害するおそれがある〕
2. 患者の腕周りに適合するサイズのカフを使用すること。
〔サイズが適合しないカフを使用すると測定値が不正確になる可能性がある〕
3. カフを装着する患者の測定部位に損傷、炎症などがないことを確認すること。
4. 血圧測定中は測定部位以外に接触することがないようにすること。〔カフや接続チューブを圧迫したりすると測定値が不正確になる〕
5. 測定中は手足の動きをしないようにすること〔測定値が安定しないことがある〕
6. カフのコネクタや、チューブが患者や装置に絡まないよう注意すること〔装置から抜けるおそれがある〕
7. 血圧測定後、速やかにカフを取り外すこと。
8. 本品は単回使用品であるので、再使用禁止。複数の患者に使用しないこと。

【保管方法及び期間等】

<保管方法>

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿、殺菌灯等の紫外線を避け保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ビットストロング
電話 番号：03-3868-5605

製造業者：Shenzhen Med-link Electronics Tech Co., LTD
製造国：中華人民共和国

ご使用前に血圧計本体の取扱説明書を必ずご参照ください。