

添 付 文 書

機械器具 65 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用注入器具 70718000
(機械器具 55 医療用洗浄器 一般医療機器 洗浄針 70459000)


再使用禁止

BS シリンジ用キャピラリーチップ

【禁忌・禁止】：再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

形状・外観：

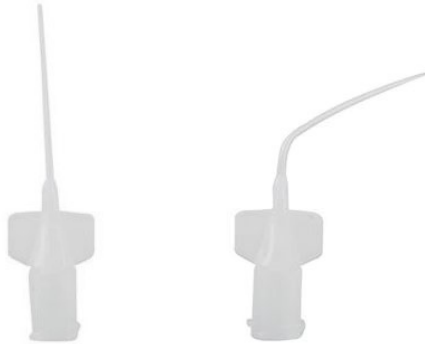

S121-S

S121-C

型番・形状・用途

No	型 番	形 状	装 着	用 途
1	S121-S	ストレートタイプ	ユニバーサル ルアーコネクター	歯内療法用途 根管口腔内用チップ
2	S121-C	カーブタイプ		歯内療法用途 根管口腔内用チップ

【使用目的又は効果】

シリンジの先端部に本品を接続し、薬液液体、低調度ペースト等の吐出、および口腔、歯髄腔、根管など各部の洗浄、または唾液吸引ユニットに接続による根管内吸引乾燥に使用する。

【使用方法等】

- 1) シリンジ先端に装着
用途に応じたチップをシリンジ先端に装着します。
- 2) 接続はユニバーサルルアーコネクタースタイルです。
- 3) チップが確実に装着されていることを確認します。
- 4) 使用後はシリンジからチップを外し、規定に沿って廃棄する。

【使用方法に関する使用上の注意】

- ・用途に応じて本品と併用する製品の添付文書等を確認後、使用すること。
- ・本品と適合しないシリンジは使用しないこと。
- ・あらかじめ接続部に緩みがないことを確認してから使用すること。また、使用中は定期的に緩み、外れがないことを確認すること。
- ・急激に押し出すと破損または脱落する恐れがあるため、ゆっくりと一定の圧力で注入すること。
- ・洗浄液等を誤って漏出させ、口腔粘膜や皮膚、眼、衣服等に付着させないよう注意すること。

【使用上の注意】

- ①本品は、【使用目的又は効果】の項に記載された用途以外には使用しないこと。
- ②使用前に必ず製品の点検をし、破損、磨耗、腐食、変形、変質、その他損傷等が確認された場合使用しないこと。
- ③使用前に消毒する場合、消毒用アルコールで清拭すること。
- ④高圧蒸気滅菌をしないこと。
- ⑤本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【貯蔵・保管方法及び有効期間等】

1. 高温、低温、多湿、直射日光、火気、水分(水濡れ)を避けて、外圧(物理的負荷)及び汚染を受けない清潔な場所に保管すること。
2. 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【包装】

- ・ S121-S ストレートタイプキャピラリーチップ (ホワイト) 50 本入
- ・ S121-C カーブタイプキャピラリーチップ (ホワイト) 50 本入

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：株式会社ビットストロング
住 所：〒112-0002
東京都文京区小石川 2 丁目 25 番 16 号
電話番号：03-3868-5605

外国製造業者：SEIL GLOBAL Co., LTD.
原産国：大韓民国