

LED照明灯 KA900

【警告】


- 周りの人や機器に十分注意して操作してください。
【事故・故障および破損の原因となります。】
- 光源に触らないでください。
【火傷をする原因となります。】
- 本品の分解・改造はしないでください。

【禁忌・禁止】

- 本品の光源を直視しないでください。
【目が眩んだり、目の組織（網膜）に障害を引き起こす可能性があります。】
- ヘッドランプ部を布等で覆わないでください。
【ヘッドランプ部が過熱する恐れがあります。】

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

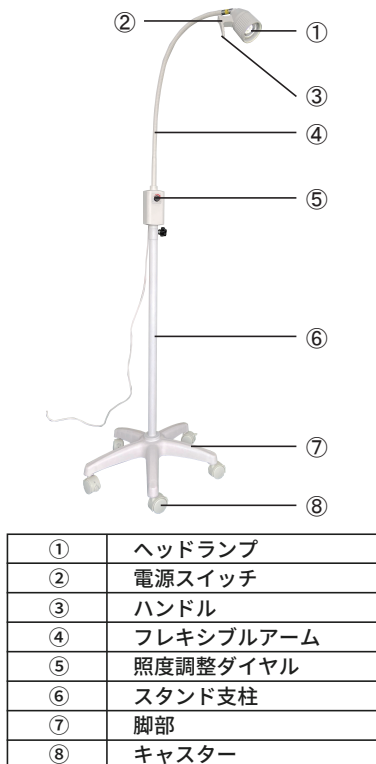

①	ヘッドランプ
②	電源スイッチ
③	ハンドル
④	フレキシブルアーム
⑤	照度調整ダイヤル
⑥	スタンド支柱
⑦	脚部
⑧	キャスター

2. 原材料

ABS樹脂、鉄、PVC被覆金属

3. 仕様

光 源	LED発光ダイオード
入 力 定 格 電 圧	100～240V 50/60Hz
中 心 照 度	70,000 Lux @ D=30cm 40,000 Lux @ D=50cm 10,000 Lux @ D=80cm
色 温 度	4500K-5500K
LED部 消費電力	3W

本品は、EMC規格 IEC 60601-1-2：2014に適合しています。

【使用目的又は効果】

本品は、通常、軽症の診療及び治療時に用いる診療用照明器です。
ある場所から別の場所へ容易に移動できるよう設計されています。

【使用方法等】

〈使用前〉

- ① 本品を安定した位置に設置し、キャスターのストッパーをかけてください。
- ② 電源プラグをコンセントに接続してください。
- ③ 電源スイッチをON【|側】にしてください。
- ④ 診察部位に照射されるように、ハンドルを持って、ヘッドランプとフレキシブルアームを動かし、照射角度及び照射距離を調整してください。
- ⑤ 照度調整ダイヤルで照度を調整してください。

〈使用后〉

- ① 電源スイッチをOFF【○側】にしてください。
- ② コンセントから電源プラグを抜いてください。抜くときは電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜いてください。

〈作業環境〉

温 度	-10～+40℃
湿 度	85% 未満
大 気 圧	86.0～106.0 kPa

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- 他の治療において、強い光に曝露しないように注意喚起されていないか、また既往歴として光線過敏症がないかを患者に確認し、該当する場合は、治療部位以外（皮膚等）に光が当たらないように注意して使用してください。
- 電源は定格で使用してください。
- 振動のない安定した場所で使用してください。
- 濡れた手で使用しないでください。
- 水滴のかかる状態や、湿度の高い場所では使用しないでください。
- 電源コードの上に物を置かないでください。
- 点灯中及び消灯直後は、LED電球及びヘッドランプが高温になっている場合があります、やけどの恐れがあるので触れないでください。
- 点灯中は照射光を直視したり、患者の目に当てないでください。
- 使用中に体が過敏に反応し、めまいや吐き気などを引き起こした場合は、照度を落としたり、必要な時以外は消灯するなどし、長時間強い光が目に入らないようにしてください。
- 薬液等が樹脂や金属塗装面に付着した場合、樹脂が変質したり、塗装が剥れ、内部金属が腐食する恐れがあるため、速やかに清拭してください。
- 清掃する前に電源プラグをコンセントから抜き、清掃の際は、液体洗剤を使用しないでください。
- 本品に異常が発生したときは、ただちに電源スイッチで電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

- 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないでください。
- 水のかからない場所に保管してください。
- 傾斜、振動、衝撃などに対する安定状態に注意してください。

〈耐用期間〉

5年〔自己認証（製造所データ）による〕

※ LED電球寿命：平均50,000時間

【保守・点検に係る事項】

- 必ず定期点検を行ってください。
- しばらく使用のない本品を再度使用する際は、使用前に必ず本品が正常かつ安全に作動することを確認してください。
- 本品の分解・改造はしないでください。
- 故障や異常が発生したときは、【故障中】などの表示を行うなど、安全対策を講じてください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〈製造販売業者〉

KAEI株式会社

大阪市中央区南船場2-4-8

TEL：06-6940-4085

〈製造業者〉

Shantou Easywell Technologies Co.,Ltd（中国）