

器 24 知覚検査又は運動機能検査用器具
一般医療機器 平衡機能計(17242001)

平衡機能計 REEVEER-Scale

湿度：10～80%(結露、氷結がないこと)

【禁忌・禁止】

<適用対象(患者)>

次の患者には使用しないこと。

1)起立が著しく困難な患者(被検者)

<併用医療機器(【使用上の注意】相互作用の項参照)>

1)高圧酸素患者治療装置との併用

2)可燃性麻酔ガス及び高濃度酸素雰囲気内での使用

<使用方法>

1)本装置は防爆型ではないので、装置の近くで可燃性及び爆発性の気体を使用しないこと。

〈動作原理〉

テコの原理に基づいた垂直荷重センサを用い、水平面上の四角形の各頂点に配置された4つのセンサの出力から、垂直荷重の作用中心(COP)を算出し、これを水平面上の重心位置として測定する。

【使用目的又は効果】

測定台に直立した人体の重心の位置と動きを表示し、定量解析を行う機器をいう。

【使用方法等】

<使用方法>

- 1)検出台に電源コード(Type-C)を差し込む。
- 2)重心動揺計のプログラムを起動する。(PC)
- 3)検査条件を設定する。
- 4)被検者を検出台に立たせる。
- 5)計測を開始する。
- 6)計測が終了したら、被検者を検出台から降ろす。
- 7)検査終了。
- 8)検出台のコードを抜く。

詳細は取扱説明書をご参照ください。

【使用上の注意】

<使用注意(次の患者には慎重に適用すること)>

1. 機器の使用前の注意事項
 - ・水のかからない場所に設置してください。
 - ・使用条件に適した場所に設置してください。
 - ・傾斜、振動、衝撃など安定状態に注意し設置してください。
2. 機器の使用中の注意事項
 - ・機器及び被験者に異常が認められた場合、速やかに被験者の安全を確保し、機器の使用を中止してください。
 - ・被験者が検出台につまずくまたは、ふらつきの転倒が発生しないように介助してください。
3. 機器の使用後は次の事項に注意すること。
 - ・使用後はPCと本体の接続を外し電源を落としてください。
 - ・コードを持って引き抜くと故障の原因になりますので、コード類に無理な力がかからないように抜いてください。
 - ・検出台の表面をアルコール等で拭き洗浄してください。
4. 機器の清掃に関わる注意事項
 - ・検出台を清掃する場合は消毒用アルコールで布拭きしてください。

<相互作用(他の医薬品・医療機器等との併用に関すること)>

1)併用禁忌(併用しないこと)

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
高圧酸素患者治療装置	使用禁止	爆発または火災の危険があります
可燃性麻酔ガスおよび高濃度酸素雰囲気内での使用	使用禁止	爆発または火災の危険があります

【形状・構造及び原理等】

〈品目の概要〉

測定台に直立した人体の重心の位置と動きを表示し、定量解析を行う機器をいう。


〈構成〉

① 検出台

〈付属品〉

- ② 解析部(PC)
- ③ 電源コード(PC用)：ACアダプター
- ④ 電源コード(Scale用)：Type-C
- ⑤ 負荷検査用計測ラバー(オプション)

〈外観〉

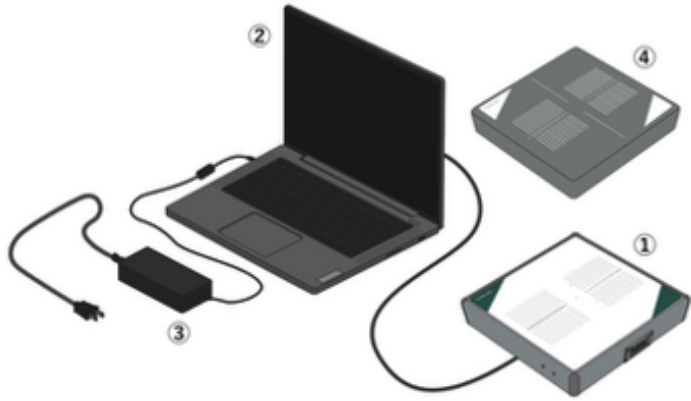

〈体に接触する部分の組成〉

品名	品番	素材	シール素材
Premium(鉄)	REEVEER-SP	SPHC	KBマットN60A
Light(アルミ)	REEVEER-SL	A5052アルミ合金	KBマットN60A
負荷検査用計測ラバー(Premium / Light共通)		PET(ポリエチレンテレフタレート)	—

〈動作保証条件〉

温度：15～35℃

取扱説明書を必ずご参照ください。

2)併用注意(併用に注意すること)

周辺機器

- ①本装置にコンピュータ等の周辺機器を接続する場合は、定められた方法により接続してください。
指定以外の機器を接続すると、漏れ電流により患者(被検者)及び操作者が電撃を受けることがあります。
- ②本体を移動させる場合は、必ず電源をオフし、電源プラグを抜いてから行ってください。コードが傷んで火災や感電の原因となります。

【保管方法及び有効期間等】

<保管の条件>

周囲温度:-20～+65℃

相対湿度:10～80%(結露、氷結のないこと)

<耐用期間>

5年

(但し、指定された使用環境において標準的な頻度で使用されたものに限る)

【保守に係る事項】

<清掃・消毒・滅菌の方法>

詳細は取扱説明書をご参照ください。

<保守>

詳細は取扱説明書をご参照ください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社Parafeed
東京都台東区元浅草2-6-4上野コアビル4階

電話番号:03-5246-3622

FAX番号:03-5246-3623

取扱説明書を必ずご参照ください。