

カボ イリゲーションチューブ


再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止。[汚染の恐れがあるため。]

* 【形状・構造及び原理等】

1) カボ イリゲーションチューブ S600

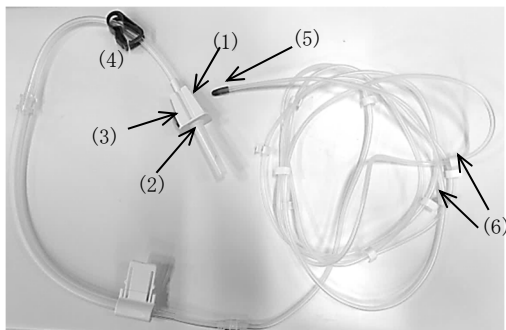

- | | |
|-----------------|---------------------------|
| (1) 2way 通気スパイク | (4) クランプ |
| (2) チッププロテクター | (5) ファイナルチップ
(チューブ近位端) |
| (3) 通気フィルタ | (6) 固定用クリップ |

原理：コンソールにより作動制御されるポンプの蠕動動作により、設定された流量で液体がチューブ内を流れる。

原材料（チューブ）：ポリ塩化ビニル、シリコーンゴム

【使用目的又は効果】

歯科、外科手術用送水装置とハンドピースとを接続に用いるチューブである。

【使用方法等】

- ・ クランプを閉じた状態で、2way 通気スパイクからチッププロテクターをはずし、液体容器内へ挿入する。
- ・ 併用する歯科・外科手術用コンソールの内蔵ポンプ内の接続部に、チューブを接続させる。
- ・ チューブをコンソール等、併用機器に固定用クリップで固定する。
- ・ 近位端をハンドピースのスプレー管に接続して、クランプと通気フィルタの蓋を開け、送水を開始する。

* 【併用する医療機器】

1) カボ イリゲーションチューブ S600

一般的名称	販売名	認証番号
歯科用ユニット	エステチカ E 8 0	220AIBZX00050000
	エステチカ E 7 0	222AIBZX00013000
	エステチカ E 5 0	223AIBZX00015000
	カボ エステチカ E70/E80 ビジョン	227AIBZX00036000
	プリムス 1058 L i f e	228AIBZX00014000
	カボ ユニカ	304AKBZX00078000
電動式骨手術器械	エキスパートサージ	226AIBZX00039000
	マスターサージ	227AIBZX00031000

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- ・ 包装に損傷があった場合は使用しないこと。
- ・ 常にチューブが送水ライン上で押しつぶれたり折れ曲がったりすることなく、また張力がかかっていない状態にしておくこと。
- ・ 生理食塩液等の容器及びその注入ラインからの液漏れがないことを確認すること。
- ・ チューブをポンプに取り付ける際には、機器の電源は切っておくこと。
- ・ 開封後は速やかに使用すること。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- ・ 併用する機器の取扱説明書等を参照しながら、接続を行うこと。
- ・ 処置中は本品のみならず接続されている関連機器全般と患者の状態を常に監視し、異常が検知された場合は直ちに治療を中止して適切な処置を行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- ・ -20 ～ +70℃の温度下で、保管すること。
- ・ 直射日光のあたる場所や熱源のそばに保管しないこと。

2. 有効期間

包装に記載の使用期限までに使用すること。

[記載の使用期限は自己認証（製造元データ）による]

(例：  **2017-01** は使用期限 2017 年 1 月 を示す。)

本品を廃棄する場合は、感染性廃棄物となるため、必ず地方自治体毎に定められた条例・規則に従って廃棄処分をすること。

* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者氏名：カボプランメカジャパン株式会社
製造業者：オムニア社 (OMNIA S.r.l.)
国名：イタリア (Italy)