

REVICARE レビケア

医療用品 04整形用品

一般医療機器 家庭用遠赤外線血行促進用衣 71105001

【禁忌・禁止】

- ・自分自身で着脱することができない患者〔何らの症状が発生した場合にそれを悪化させる危険性が高いため〕
- ・湿疹、かぶれ、傷口など皮膚に異常がある場合は使用しないこと。
- ・異常（かゆみ、かぶれなど）を感じたら、使用を中止すること。

*【形状・構造及び原理等】

寸法 （公差：±10%）


1.形状・構造

1. 半袖Tシャツ(メンズ)



	(単位cm)				
	S	M	L	LL	3L
着丈	67	69	71	74	77
身巾	51	54	57	61	65

2. ハーフパンツ(メンズ)

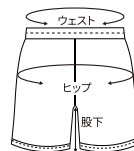


	(単位cm)				
	S	M	L	LL	3L
ウエスト	64	72	80	88	96
ヒップ	101	106	111	117	124
股下	18	19	20	21	22

3. 半袖Tシャツ(レディース)



	(単位cm)			
	S	M	L	LL
着丈	60	62	64	66
身巾	54	56	58	60

4. ハーフパンツ(レディース)

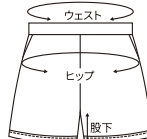

	(単位cm)			
	S	M	L	LL
ウエスト	64	68	72	76
ヒップ	98	102	106	110
股下	16	17	18	19

5. 長袖Tシャツ(ユニセックス)



	(単位cm)						
	SS	S	M	L	LL	3L	4L
着丈	62	65	68	71	74	77	80
身巾	53	56	59	62	65	68	71

6. ロングパンツ(ユニセックス)



	(単位cm)						
	SS	S	M	L	LL	3L	4L
ウエスト	60	65	70	75	80	85	90
ヒップ	98	103	108	113	118	123	128
股下	64	66	68	70	72	74	76

ご使用前に必ずこの文書をお読みください

【原理】

本製品は、原材料となる繊維に高純度セラミックを配合することで、着用時に一定量の遠赤外線を安定的に放射するよう設計されています。遠赤外線がもたらす温熱作用により血行を促進し、身体の冷えを和らげるとともに、疲労感の軽減や筋肉のこわばりの緩和をサポートします。日常的に身に着けることで、身体機能の改善を補助する衣類型の医療機器です。

【使用目的又は効果】

(遠赤外線の血行促進作用)

- ・血行促進
- ・疲労回復
- ・筋肉のハリ・コリの緩和
- ・筋肉の疲れを軽減
- ・抗菌防臭、防ダニ

【使用方法等】

- ・本品は繰り返しご使用いただけます。
- ・ご使用前に、本品に破損や異常がないことをご確認ください。
- ・本品は衣類として着用してください。
- ・日常生活時および就寝時のいずれにもご着用いただけます。
- ・本品の感じ方には個人差があるため、継続してご着用いただくことをおすすめします。
- ・直接素肌に着用してください。
- ・より快適にご使用いただくため、上下セットでの着用をおすすめします。

【使用上の注意】

- ・睡眠中の着用は発汗量が増える場合があります。就寝前後は十分な水分補給を行ってください。
- ・初めて着用する前に、一度洗濯してからご使用いただくことをおすすめします。
- ・体質・体調により、かゆみ、かぶれなどの異常が生じる場合があります。異常を感じた場合は直ちに使用を中止してください。
- ・濃色品と淡色品は分けて洗濯してください。濡れたまま放置したり、浸け置き洗いをしたりしないでください。
- ・洗濯や着用時の摩擦により、色落ち・色移りが生じることがあります。また、プリント部分は剥がれる場合がありますのでご注意ください。
- ・蛍光増白剤を含まない洗剤をご使用ください。
- ・タンブラー(回転式)乾燥はお避けください。
- ・素材の特性上、摩擦や揉みにより毛玉が生じやすい場合があります。目立つ毛玉はハサミまたは毛玉取り器で取り除いてください。

【保管方法及び有効期間等】

- ・直射日光、水濡れ、高温、多湿な環境を避けて保管してください。
- ・しばらく使用しない時は、一度干してから、湿気のない場所で保管してください。

[耐用期間] 2年

【取扱い上の注意】

- ・効果には個人差があります。
- ・本品は繰り返し使用可能ですが、素材の特性上、湿気や日光(紫外線)の影響を受けたり、長期の使用による経年劣化で伸びが生じたりする場合がありますので、ご注意ください。
- ・本製品の機能は使用状況により低下する場合があります、永続的な効果を保証するものではありません。
- ・すべての臭いを抑制するものではありません。
- ・イラストはイメージです。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- ・製造販売業者 株式会社福商 メディカル事業部 〒116-0014東京都荒川区東日暮里4-13-15マンチエスターⅡ2F
- ・販売業者 株式会社K.K物産 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里2-29-3 日清ビル4F