

器39 医療用鉗子

一般医療機器 抜歯用鉗子 JMDN35552000

智歯鉗子

【使用目的、効果又は効能】

智歯の脱臼専用鉗子は、嚙部先端部を第2大臼歯と第3大臼歯の間に挿入し智歯を起こすようにすると脱臼します。又、把持専用鉗子は智歯を確実に把持出来る形状になっています。

【使用上の注意】

- 1 注意事項の厳守：**器具の正しい使用のために、注意事項を必ず守り、目的以外の使用はしない事。
- 2 使用者の限定：**本品は歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- 3 目的外使用の禁止：**この器具は歯科治療専用器具です。智歯の脱臼のみに御使用下さい。智歯の前の歯を破損しないでください。智歯を起こすように脱臼してください。
目的上、先端部は尖っていて、肉厚も薄いので欠ける可能性があります。ハンドルを強く握ると欠けます。徐々に力を加え無理に力を加えないで下さい。
- 4 誤飲の予防：**万が一、欠けた場合、患者さんが誤飲しないような治療前の処置を施して下さい。
(例えば、ラバーダム防湿など)
- 5 素材：**素材の13Cr系ステンレス鋼は、鉄に比較して錆びにくい金属ですが、使用方法、環境によっては腐食（錆び）することがある。以下の使用上の注意を守ってください。
- 6 二次加工の禁止：**折損等の原因となるので、器具の二次加工(改造)を絶対に行わないこと。
- 7 家庭用洗剤の使用禁止：**金属を腐食させることがあるので使用しないこと。
- 8 洗浄、消毒、滅菌上の注意**
 - ・使用後は、防錆洗浄液、精製水を用いて器具に付着した血液、体液、組織片を速やかに除去すること。
 - ・洗浄、消毒、滅菌には、出来るだけ精製水を使用する事。水道水を使用すると、塩素イオンの影響で器具が腐食する事がある。
 - ・加熱滅菌器（オートクレイブ滅菌器など）の乾燥温度に注意する事。変色の原因になります。洗浄、滅菌後は十分乾燥させてから保管する。
 - ・薬液消毒を行う時は、使用上の注意を守ること。
- 9 磨き粉、金属ウール、金ブラシの使用禁止**
腐食の原因となるので使用しないこと。
- 10 保管上の注意：**
 - ・電気分解を要因とした錆を防ぐため、材質の異なる器具と一緒に保管しないこと。
 - ・「もらいさび」を防ぐため、錆びている器具と一緒に保管しないこと。また、化学薬品と一緒に収納、保管しないこと。

- 1 1 取扱いについて：**器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取扱いはしないこと。

【保守・点検に係わる事項】

使用前、使用後の点検：使用前、使用後に、嚙部にキズや腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

定期的に器具全体を点検すること。


【包装】

ポリ袋かビニール袋に1個入包装又は紙箱に1個入包装（内包はポリ袋）


【製造業者又は製造販売業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者名	(有)木村鉗子製作所
住所	〒131-0033 東京都墨田区向島1-18-9
電話番号	03-3623-1232
ファックス	03-3623-1232
ホームページ	http://www.kimura-kanshi.com/
E-mail	kimura.kanshi@nifty.com

【形状、構造及び原理】

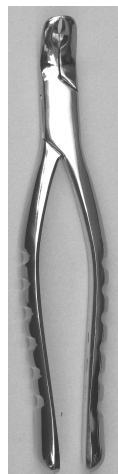

000106
細 型

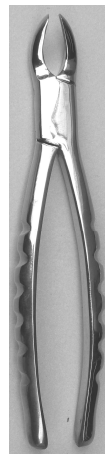

000103
宇賀式



000101
遠藤式 上顎



000102
遠藤式 下顎

【禁忌・禁止】

- * 歯科診療・歯科治療以外には使用しないこと。
- * 使用目的以外には使用しないこと。
- * 劣化や異常が見られた場合は器具の使用を中止すること。
- * 器具の形態変更や改造等はないこと。
- * 器具を落下したり、強い衝撃を与えないこと。