

類別：医 04 整形用品
一般医療機器 創傷面積測定器（70446000）

マイクロメジャー

再使用禁止

【警告】

1) 本品は滅菌済であるので、再使用しないこと。

【禁忌・禁止】

適用対象（患者）

1. 本品は、リンパ管や微細血管の吻合処置等の部分的な径や長さの概略値確認用として使用する以外の目的には、使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

《原理》

目盛板 0.2mm ピッチラインと被対照となるものとの比較測定。


《構成》

1. 組成

表面フィルム：P E T
内側プレート：P E
糸：黒シルクプレート

2. 形状・構造

外形寸法：4.8×2.6×t0.2(mm)

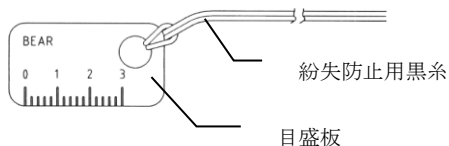

＊糸長さ：約 5～50 (cm)

数値表示：片面のみ

【使用目的又は効果】

微細組織片の大きさ、リンパ管や微細血管の吻合処置等の部分的な径などを測定する。

【使用方法等】

- 1) 本製品は、滅菌済み品ですので、タイベック包装材料より、取り出しご使用ください。
- 2) 目盛は、片面のみ印字されていますので、印字面を確認のうえ、被測定領域の付近においていただき、目盛値を確認してください。
- 3) 本製品には、紛失防止用に黒い糸が結びつけられていますので、使用後は、その糸がついていることを確認の上、取り除いてください。

【使用上の注意】

- 1) 使用前に、目盛板に紛失防止用糸が付いており、機能上の問題が無いことを確認してください。
- 2) 本品の使用により感作又はアレルギー反応を呈する可能性がある患者には使用しないこと。
- 3) 使用後は医療用廃棄物として適切な処理をすること。
- 4) 包装材料が損傷している場合には、必ず廃棄すること。

《重要な基本的注意》

- 1) 医療用の目的以外には使用しないこと。
- 2) 添付資料を事前に読んでから使用すること。
- 3) 包装材より取り出すときには、目盛板を強くつまみまますと、表面等に傷をつけることがありますので、注意すること。
- 4) 溶剤等により、変形、溶解することがありますので、本製品に触れないようにすること。

《相互作用》

他の医療機器との併用使用はない。

《不具合・有害事象》

【不具合】

置き忘れによる、組織等の拒否反応。

【保管方法及び有効期間等】

《貯蔵・保管方法》

- 1) 高温、多湿、直射日光及び水ぬれを避けて室温で保管すること。
- 2) 包装材料に傷を付けたり、ピンホールを生じさせないように取り扱うこと。
- 3) 製品の使用期限を確認し、使用期限を過ぎたものは、廃棄すること。
- 4) 開封後、使用しなかったものは、破棄すること。

《使用の期限》

適切な貯蔵方法で保管する時、使用期限は外箱に表示。

＊【主要文献及び文献請求先】

株式会社 ベアーメディック
電話番号：03-3818-4041

＊【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

株式会社 ベアーメディック
電話番号：03-3818-4041