

機械器具 25 医療用鏡
一般医療機器 内視鏡用レンズ洗浄具（JMDN 70167000）

ベアーノズル


再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 本品を加工、改造しないこと。[本来の性能が発揮されないことがあるため]
2. 再使用禁止。[製品の品質低下や汚染の恐れがあるため]
3. 一度開封したものは再滅菌しないこと。[十分な滅菌ができない恐れがあるため]

【形状・構造及び原理等】

1. 形状及び寸法
代表例

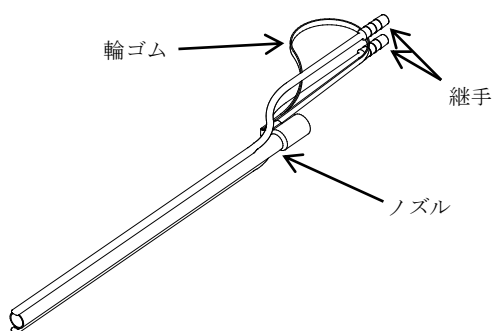

2. 原材料

本体：ステンレス
輪ゴム：ポリウレタンゴム

【使用目的又は効果】

本品は、内視鏡の挿入部に装着してレンズに付着した血液や異物を除去するために、洗浄水をレンズ端面に誘導する器具である。

【使用方法等】

1. 本品は、滅菌品であるので開封後直ちに使用すること。
2. 内径φ2mmの送水チューブ、及び吸引チューブを用意する。
3. 継手に送水チューブ、及び吸引チューブを接続する。
4. φ4mm硬性内視鏡をノズルに挿入する。
輪ゴムを硬性内視鏡に引っ掛けて固定する。
硬性内視鏡レンズ面とノズル先端がそろっていることを確認する。
5. 使用前に送水、及び吸引のテストをして、レンズ面に洗浄水が当たっていること、及びレンズ面に付着した洗浄水が吸引されていることを確認する。
6. 術中にレンズ面が血液等で汚れた場合、洗浄を行う。

【使用上の注意】

1. 使用注意
 - 1) 使用前には、
 - (1) 本品の仕様は予告なく変更する場合がある。仕様変更による誤操作を防ぐため、添付文書は必ず使用する製品に添付のものを参照すること。
 - (2) 併用する医療機器の添付文書も参照して、適切に使用すること。
 - (3) 本品に関して不明な点は販売元まで問い合わせること。
 - (4) 本品に傷、汚れ、バリなどの異常があるものは使用しないこと。
 - (5) φ4mm硬性内視鏡（挿入部長さ112mm）を用意すること。

- (6) 内径φ2mmの送水チューブ、吸引チューブを用意すること。
- (7) 鼻腔内に挿入する前に送水、及び吸引の動作確認を行うこと。

2) 使用後の注意

硬性内視鏡をノズルから引き抜き、本品を廃棄する。

2. 重要な基本的注意

- 1) 表面等に傷をつけないよう注意すること。
- 2) 溶剤等により、輪ゴムが変形、溶解することがありますので、注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 貯蔵方法・保管方法

- 1) 高温、多湿、直射日光及び水ぬれを避けて室温で保管すること。
- 2) 包装材料に傷を付けたり、ピンホールを生じさせないように取り扱うこと。
- 3) 開封後、使用しなかったものは、破棄すること。

2. 使用の期限

適切な貯蔵方法で保管する時、使用期限は外箱に表示。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

株式会社 ベアーメディック
電話番号：03-3818-4041