

ディスポーザブルマイクロ バスキュラークリップ

再使用禁止

【警告】

- 1) 汚染あるいは感染した創傷部位に使用する場合は、適切な外科的処置をおこなうこと。

【禁忌・禁止】

適用対象（患者）

1. 再使用禁止。
2. 使用期限の過ぎた物は、使用しないこと。
3. 一度開封したものは再滅菌しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 組成

本体：ステンレス、ポリカーボネイト樹脂
軸：ABS、ステンレス或いはチタン
スプリング：ステンレス、チタン


2. 形状・構造

代表的な製品群形状は、以下の通り。
本添付文書に該当する製品の製品名及びサイズ等の詳細仕様は、包装表示ラベルを参照すること。

シングルクリップ

TI□-1


TK□-1

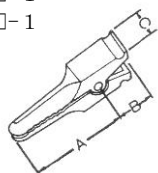


ダブルクリップ（スライドバー付）

TI□-2


TK□-2

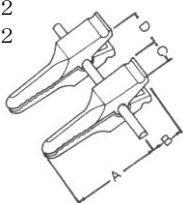


HK-□

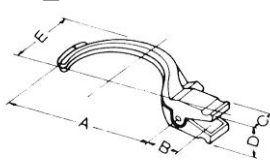

TKF-3

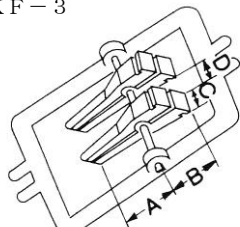


ES-□□□

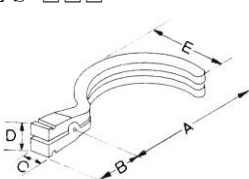

MH-1-□



TKF-5

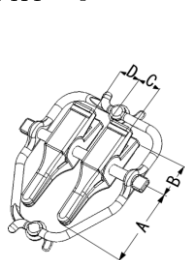

*TG-1

*TG-2



□の部分は省略表示

*3. 原理

スプリングによるクリップ力の確保。

【使用目的又は効果】

本品は、ポリカーボネイト或いはステンレスの材料からなる、一時止血用クリップ。

【使用方法等】

1. 使用方法

- 1) 血管径に適合したサイズのクリップを選択する。

製品コード	血管径（φmm）
*TG	*~0.5
TIS、TKS	~1
TIM、TKM	1~2
TIL、TKL	2~4
HK	~2
TKF	0.2~1
ES	5~12
MH	~1

- 2) 動脈用、静脈用によりクリップ力が異なるため、適切なものを選択する。

- 3) クリップは、ハンド或いは、専用のクリップ用鉗子を使用して、血管を一時的に止血する。

- 4) MHクリップは、専用のKS-Sクリップ鉗子を使用し、先端部を2mm以上開かないこと。

【使用上の注意】

1. 使用注意

- 1) 本品の使用により感作又はアレルギー反応を呈する可能性がある患者には使用しないこと。

2. 重要な基本的注意

- *1) 脳血管一時止血専用のクリップではありません。
- 2) 医療用の目的以外には使用しないこと。
- 3) 添付資料を事前に読んでから使用すること。
- 4) 表面等に傷をつけないよう注意すること。

3. その他の注意

- 1) 使用後は医療用廃棄物として適切な処理をすること。
- 2) 包装材料が損傷している場合には、必ず廃棄すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 貯蔵方法・保管方法

- 1) 高温、多湿、直射日光及び水ぬれを避けて室温で保管すること。
- 2) 包装材料に傷を付けたり、ピンホールを生じさせないように取り扱うこと。
- 3) 製品の使用期限を確認し、使用期限を過ぎたものは、廃棄すること。
- 4) 開封後、使用しなかったものは、破棄すること。

2. 使用の期限

適切な貯蔵方法で保管する時、使用期限は外箱に表示。

【主要文献及び文献請求先】

株式会社 ベアーメディック

電話番号：03-3818-4041

※※【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

株式会社 ベアーメディック

電話番号：03-3818-4041