

** 2021 年 4 月 21 日 (第3版)

* 2017年 5 月 30 日 (第2版)

2017年 3 月 1 日 (初版)

医療機器届出番号 13B2X00381000012

器 58 整形用機械器具のうち理学療法用器械器具 一般医療機器
測定機能付自力運動訓練装置(JMDN コード:70612000) 特定保守管理医療機器

販 売 名
アンギオ cpet

****【禁忌・禁止】**

- ・医師から運動を禁止されている方もしくは運動テストあるいは負荷運動が禁忌となる症状・状態の方は、本機器を使用しないで下さい。
- ・可燃性麻酔のある場所では使用しないでください。


【形状・構造及び原理等】

1. 概要

本機器は、診断治療に有用な測定値を得るために用いるリハビリテーション用訓練装置です。

2. 構成部品


本機器は以下の部品から構成されます。

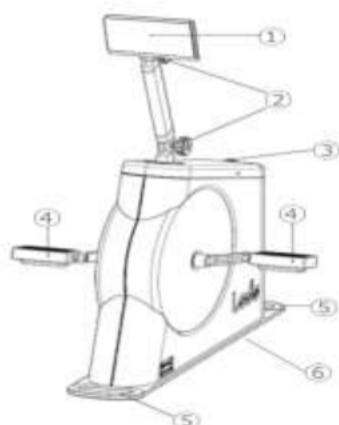

- ①7 インチディスプレイ ②ディスプレイ角度調整ネジ
③メインスイッチ (on/off) ④ペダル
⑤ハンドルバー ⑥コネクション (底面)



7 インチディスプレイ

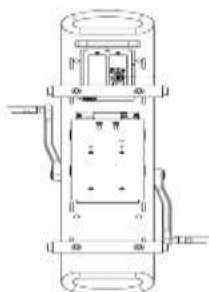

底面

* オプションとして、7 インチディスプレイPCUあり

(プログラム・コントロール・ユニット;プロトコル 50 種類作成可能)

3. 寸法・重量

高さ: 1060 mm(最大) 660 mm(最小) *ディスプレイ高による

長さ: 750 mm 幅: 407 mm 重量: 29 kg

4. 電氣的定格

100-240V 50/60 Hz(160Watt)

5. 外観写真



6. 作動原理

本品では負荷制御に渦電流電磁ブレーキ方式を用いています。

【使用目的又は効果】

本品は、診断治療に有用な測定値を得るために用いるリハビリテーション用訓練装置です。

【品目仕様】

本体仕様

- 1) 負荷量: 7~1000 Watt (増減 1 Watt 単位)
- 2) ブレーキング・システム: 渦電流電磁ブレーキ方式
- 3) 定量負荷維持範囲: 30~150 rpm
- 4) キャブレーション: ダイナミック
- 5) インターフェース: USB/デジタル
- 6) 精度: 7~100 W $\pm 3\%$ 、100~500 W $\leq 3\%$ 、500~1000 W $\leq 5\%$
- 7) 測定内容: 負荷量、rpm、時間
- 8) 表示: タッチパネル式7インチディスプレイ

*** オプション**

- 1) 7 インチディスプレイPCU
(プログラム・コントロール・ユニット;プロトコル 50 種類作成可能)

【使用方法等】

使用方法の詳細は取扱説明書を参照して下さい。

＜設置＞

1. 本機器は平坦で水平な場所に設置して下さい。

＜接続＞

1. コンセントに正しい電圧が供給されているか確認して下さい。
2. エルゴメーターの主電源に電源ケーブルを接続し、電源ケーブルをコンセントに接続して下さい。
3. 主電源をONにし、タッチパネル式ディスプレイに電源が入ったことを確認して下さい。

＜操作＞

本品を操作する場合は下記の手順で操作して下さい。

1. 本品の主電源を入れ、タッチパネル式ディスプレイが立ち上がりセルフテスト画面が表示されます。セルフテスト完了後、スタートアップ画面が表示されます。
2. 希望する項目をタッチまたはスワイプし選択します。
3. ペダルを漕いで運動を開始して下さい。
4. ペダル回転数が30rpm以上になると負荷がかかり始めます。希望によりタッチパネルで負荷を増減して下さい。

**【使用上の注意】

1使用上の注意

- 1) 本機器に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止して下さい。
- 2) 被験者が異常を訴えた場合は、直ちに使用を中止して下さい。
- 3) 被験者やエルゴメーターが動いた時にケーブル類の干渉が無いよう確認して下さい。
- 4) 画面の表示が一切ない場合は、電源コードや電源供給を確認して下さい。確認しても問題が解決しない場合はメーカーに連絡して下さい。
- 5) 接続コネクタは指定されたものを使用して下さい。
- 6) 金属部、電子部は濡らさないで下さい。
- 7) 本機器を分解又は改造しないで下さい。
- 8) 本機器の設定と操作は平坦で水平な場所で行って下さい。
- 9) 本機器の周囲に60cm以上の空きスペースを確保してください。
- 10) 本機器使用時は運動に適した衣服、靴を着用して下さい。衣服や紐の緩みがあると、巻き込まれる恐れがあります。
- 11) 使用前・使用中に本機器に部品や物を置かないで下さい。
- 12) 高周波機器を本機器の近くで使用しないで下さい。エルゴメーターのパフォーマンス低下につながる恐れがあります。

**【保管方法及び有効期間等】

水のかからない場所に保管して下さい。
化学薬品の保管場所やガスの発生する場所には保管しないで下さい。

保管条件

周囲温度 -20℃～+60℃
相対湿度 10%～95%（結露しないこと）
気圧 500hPa～1060hPa

使用条件

周囲温度 +14℃～+35℃
相対湿度 30%～90%（結露しないこと）
気圧 800hPa～1060hPa

耐用年数:7年〔自己認証(当社データ)による〕

但し、指定された使用環境において標準的な頻度で使用され、指定の保守点検を行った場合の年数であり、使用状況によっては耐用期間が異なる場合がある。

**【保守・点検に係る事項】

事故や故障を防ぐために定期的に保守・点検を行って下さい。
[業者による1年ごとの保守点検を推奨しています]
詳細については、取扱説明書の保守・点検に係る事項を必ずお読み下さい。

【包装】

1台／箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

(製造販売業者)
旭光物産株式会社
東京都文京区本郷 1-33-8
電話番号:03-3814-1635
(製造業者)
製造国名:オランダ
製造業者名:LODE B.V. (ロード ビービー)