


マトリックスリテイナ

【形状・構造及び原理等】

形状：

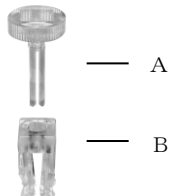

材質：ポリカーボネート

- ・完全に乾燥させてから保管すること。
- ・使用（滅菌）前に汚れ、傷、曲がり等がないか点検をすること。
- ・点検後、セット・包装をし、高圧蒸気滅菌をすること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】* **

製造販売業者：フィード株式会社
商品インフォメーションデスク
電話 0120-004-504

製造業者：ハニル デンタル インダストリアル カンパニー
リミテッド（大韓民国）
（HANIL DENTAL IND. CO., LTD）

【使用目的又は効果】

マトリックスバンドを歯の所定の位置に保持するために用いる歯科用器具である。

【使用方法等】

1. 使用前に滅菌する。（高圧蒸気滅菌／各医療機関により検証され確認された滅菌条件による。推奨 121℃ 15 分間）
2. AとBを組み合わせ、溝の位置を合わせる。
3. マトリックスバンドを輪状にし、端をマトリックスリテイナの溝に差し込む。
4. Aを回してマトリックスバンドを巻きつける。
5. マトリックスバンドを窩洞形成した歯牙に装着する。
6. Aを回して巻きつけ、マトリックスバンドの位置を固定する。
7. 通法に従い、窩洞充填、重合を行う。
8. マトリックスリテイナとマトリックスバンドを歯牙から外す。
9. 通法に従い形態修正、研磨を行う。

「使用方法に関連する使用上の注意」

マトリックスバンドを過度の力で締めすぎないこと。

【使用上の注意】

- ・本品はプラスチック製のマトリックスバンド用である。ステンレス鋼製のマトリックスバンドは硬いため適切に巻きつかないことがあるので、使用しないこと。
- ・損傷、変形（曲がり）、変質等のあるものは使用しないこと。
- ・誤飲させないように注意し、必要に応じてラバーダムを使用すること。
- ・【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外の使用はしないこと。
- ・歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】

- ・機器に付着している血液、体液、組織及び薬品等は乾燥する前に、洗浄液等への浸漬等により確実に除去すること。
- ・汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用するすること。
- ・洗剤の残留がないよう十分にすすぎを行うこと。仕上げすすぎには、浄化水（濾過、蒸留、脱イオン化等）を用いること。