

メストラ技工用プライヤ

【形状・構造及び原理等】


インサートイングプライヤ

材質：ステンレス鋼



テレスコピッククラウンプライヤ

材質：ステンレス鋼

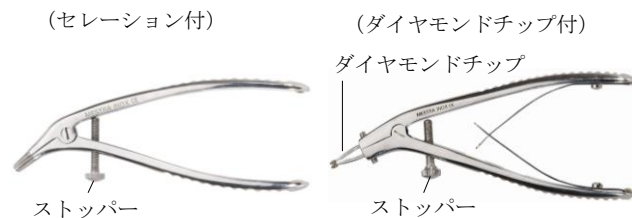

【使用目的又は効果】

レジンやセラミックス等を築盛するために用いる。

【使用方法等】

インサートイングプライヤの操作方法

グリップ操作で先端部を開いてクラウン、ブリッジを挟み、ラチェットをかけて状態を保持する。

テレスコピッククラウンプライヤの操作方法

本体のストッパーを緩めてからグリップ操作で先端部を開き、セレーション部分またはダイヤモンドチップ部分にクラウン、ブリッジを挟んだら、ストッパーを締めて固定する。

【使用上の注意】

- ・使用前に必ず製品の点検（【保守・点検に係る事項】参照）をし、異常が確認された場合使用しないこと。
- ・折損、破損等の原因となるので、本品に対する曲げ・切削、打刻（刻印）等の二次的加工（改造）は絶対に行わないこと。
- ・破折等の原因となるため、強い衝撃を与えないように丁寧に扱うこと。
- ・長期の使用により金属疲労や磨耗等の劣化が生じるので、適宜交換すること。
- ・【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ・歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。
- ・「もらいさび」を防ぐため、錆びている器具と一緒に保管しないこと。

- ・接触腐食を防ぐため、材質の異なる金属製器具どうしは保管時に接触させないこと。
- ・インサートイングプライヤはラチェットを開いた状態にして保管すること。ラチェットを深くかけたまま保管することは破損等の原因になるおそれがある。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】

- ・使用前に必ず点検し、本品に破損、磨耗、腐食（錆）、変形、孔の発生、脱落、その他損傷等が確認された場合、使用を中止し廃棄すること。
- ・機器に付着した薬品、歯科材料等は、乾燥・固化する前に濡れた布等による拭掃等により確実に除去すること。
- ・腐食、変色、シミ等を防ぐため、水分等付着した場合は保管期間の長短にかかわらず直ちに乾燥すること。その際、可動部に適切なメンテナンスオイルを注油すること。
- ・完全に乾燥していることを確認してから保管（【保管方法及び有効期間等】参照）すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】* **

製造販売業者：フィード株式会社
商品インフォメーションデスク
電話 0120-004-504

製造業者：タリレス メストライツァ エス エル（スペイン）
（Talleres Mestraitua, S.L.）