

機械器具 65 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用マトリックスウェッジ 16370000

デンタルシリコンウェッジ


再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

形状：

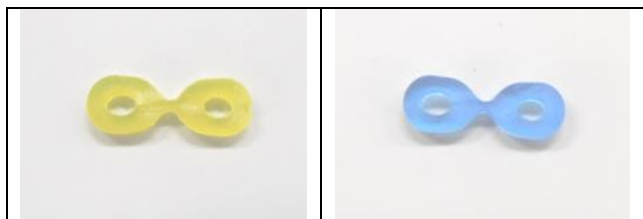

材質：シリコン

単位：mm

色	長さ	幅	厚さ
黄色	16.5±0.3	5.5±0.3	2.0±0.3
青	16.5±0.3	5.5±0.3	2.5±0.3

【使用目的又は効果】

充填物の挿入時に歯をわずかに分離させるために歯頸部に設置する歯科用器具である。

【使用方法等】

1. 汎用歯科用ラバーダムクランプ鉗子（別売）又は歯科用充填・修復材補助器具（別売）を本品の穴にひっかけて伸ばす。
2. 歯科用マトリックスバンド（別売）、本品の順に装着する。
3. 処置後、本品、歯科用マトリックスバンドの順に取り外す。
※別売品を併用する場合は、各製品の添付文書をあわせて参照すること。

【使用上の注意】

- ・使用前に必ず製品の点検をし、破損、磨耗、変形等が確認された場合使用しないこと。
- ・使用前に消毒する場合、消毒用アルコールで清拭すること。
- ・使用の際は誤飲させないよう充分注意すること。飲み込んだ場合、直ちに医師の診断を受けさせること。
- ・本品に対して、発疹・皮膚炎などの過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。
- ・本品の使用により、発疹などの過敏症状があらわれた場合には、ただちに使用を中止すること。
- ・必要に応じてラバーダム等の防湿処置を行うこと。
- ・【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ・歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- ・廃棄の際は感染防止に留意し、関係法令及び各自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。
- ・高圧蒸気滅菌をしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・高温、低音、多湿、直射日光、火気、水分（水漏れ）、オゾン、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けない清潔な場所に保管すること。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：フィード株式会社
商品インフォメーションデスク
電話 0120-004-504

製造業者：ハンゾウ シーイー メディカル インストルメント
カンパニー リミテッド
（中華人民共和国）
（Hangzhou Siyi Medical Instrument Co., Ltd）